

## CALIBRAZIONE MANUALE (MQCS)

**Eseguire la procedura di CALIBRAZIONE ogni volta che cambiate stanza**

1. premete contemporaneamente e rilasciate i pulsanti “faccina” e “casa”:  
comparirà la scritta “CAL”;
2. entro 10 secondi aprite il cappuccio protettivo e premendo il pulsante “casa” avvicinate il termometro contro una parete interna o un oggetto avente temperatura costante e collocato tra circa 80 e 150 cm dal pavimento fino a quando vedrete la temperatura esattamente tra i due archi;
3. rilasciate il pulsante: il display indicherà la temperatura dell’ambiente.  
Per essere sicuri che questa temperatura sia verosimile, evitate di puntare il termometro contro pareti che danno sull’esterno o finestre, evitate tavoli, fonti di calore o freddo (caloriferi, condizionatori, lampade, computer, superfici a contatto con il corpo umano, ecc). Si consiglia una parete interna oppure un armadio.
4. Il termometro è pronto per eseguire una misurazione.




### **Il Visiofocus è CALIBRATO**

*e pronto per la misura della temperatura dei soggetti stabilizzati in quella stanza.*

## COME RILEVARE LA TEMPERATURA CORPOREA

Avvicinare il VISIOFOCUS perpendicolarmente al CENTRO della FRONTE premendo il pulsante “faccina” e avvicinando il Visiofocus fino a quando la temperatura non è al centro dei due archi. Rilasciare il pulsante e attendere il rapido lampeggio delle luci prima di spostare il termometro.  
**RICORDATE:** al centro della fronte e non in mezzo alle sopracciglia né sulle tempie.

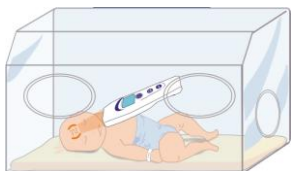

VISIOFOCUS può essere molto utile anche utilizzato all’interno dell’INCUBATRICE. **IMPORTANTE:** fare la calibrazione su una parete interna dell’incubatrice stessa (non è un problema se non vedete le luci sulla parete) prima di rilevare la temperatura corporea sulla fronte del bambino.




### **ATTENZIONE!!**

*Se la fronte è sudata oppure la persona ha una maschera per l’ossigeno, oppure si tratta di un paziente anziano, specie se con fronte molto rugosa, occorre eseguire la misurazione in una zona alternativa come sulla palpebra:*



*Puntare Visiofocus e fare una scansione sulla palpebra chiusa. Non preoccupatevi se la persona apre gli occhi durante la misura: le luci sono completamente innocue.*

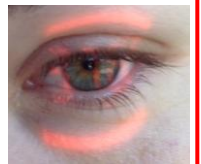


*Richiudere il cappuccio dopo ogni misurazione. Il termometro mostrerà la temperatura ambiente per 15 minuti prima di spegnersi.*

**NEL CASO IN CUI RISCOVRIATE TEMPERATURE ALTE O BASSE RISPETTO ALLA VALUTAZIONE DELLO STATO DEL PAZIENTE O IN CONFRONTO AD UN ALTRO TERMOMETRO, ASPETTARE 20-30 MINUTI DALLA MISURAZIONE E RILEVARE NUOVAMENTE LA TEMPERATURA CORPOREA.**

### **N.B.: LA GUIDA D’ONDA DORATA DEVE ESSERE SEMPRE PULITA E LUCIDA!!**

Per pulirla usare un cotton-fioc inumidito di soluzione alcolica, rimuovendo lo sporco dal fondo della guida fino all’esterno. Assicurarsi che eventuale liquido in eccesso non penetri nel termometro. **Non usare per almeno 30 minuti dopo la pulizia**

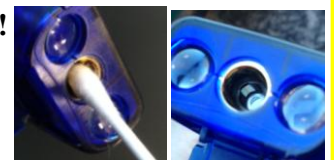

PRIMA DI INVIARE QUALSIASI TERMOMETRO IN ASSISTENZA, CONTATTARE TECNIMED AL NUMERO VERDE 800-930321 O PER MAIL [info@tecnimed.eu](mailto:info@tecnimed.eu) o FAX +39 0332 402347). POTETE ANCHE VISITARE I NOSTRI SITI [WWW.TECNIMED.IT](http://WWW.TECNIMED.IT) O [WWW.VISIOFOCUS.IT](http://WWW.VISIOFOCUS.IT)