



Littmann® CORE Stethoscope

Connects to Eko Software

Eko

3M

(en)	English	pp. 1	(sl)	Slovenski	pp. 33
(fr)	Français	pp. 3	(et)	Eesti	pp. 35
(de)	Deutsch	pp. 5	(lv)	Latviesu	pp. 37
(it)	Italiano	pp. 7	(lt)	Lietuviskai	pp. 39
(es)	Español	pp. 9	(ro)	Romana	pp. 41
(nl)	Nederlands	pp. 11	(hr)	Hrvatski	pp. 43
(sv)	Svenska	pp. 13	(bg)	Български	pp. 45
(da)	Dansk	pp. 15			
(no)	Norsk	pp. 17			
(fi)	Suomi	pp. 19			
(pt)	Português	pp. 21			
(el)	Ελληνικά	pp. 23			
(pl)	Polski	pp. 25			
(hu)	Magyar	pp. 27			
(cs)	Čeština	pp. 29			
(sk)	Slovensky	pp. 31			

Дигитален стетоскоп 3M™ Littmann® CORE

Ръководство за бърз старт

Изтеглете приложението Eko от Apple App Store® или от Google Play Store®.

Включете безжичната технология Bluetooth® на телефона или таблета си, стартирайте приложението и включете стетоскопа CORE.


Eko

Какво има в кутията

- Дигитална приставка Eko CORE и стетоскоп 3M™ Littmann® Cardiology IV™
- Допълнителен комплект меки уплътнителни тапи 3M Littmann (малки)
- Ръкав без охлаждане със сигнализация
- USB кабел за зареждане
- Ръководство за бърз старт

Наушници

Поставете наушниците с насочено напред движение.

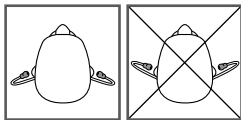

Сила на звука

Използвайте бутоните (+) и (-), за да регулирате силата на звука. Има 7 степени на силата на звука.

Включване и изключване

Когато стетоскопът CORE е изключен, той действа като неусилен стетоскоп.

За да включите стетоскопа CORE, натиснете превключвателя на захранването. Светлинният индикатор ще започне да мига. Вече ще чувате усилен и филтриран звук в наушниците.

Функции за телемедицина и ИИ

Eko предлага функции за телемедицина и ИИ, които изискват софтуерен абонамент (когато се предлага, е продаван отделно).

Можете да настроите абонамент онлайн на адрес ekohealth.com

Активно шумопотискане

Стетоскопът CORE включва активно шумопотискане, за да елиминира околния шум от околната среда. Активното шумопотискане може да се включва или изключва от приложението Eko.



Известия

((⦿)) (тигане)

стетоскопът CORE е включен и търси устройство

● (жълто)

стетоскопът CORE е изключен и се зарежда

((●)) (жълто)

Ниско ниво на батерията на стетоскопа CORE

○

стетоскопът CORE е включен и свързан

● (зелено)


стетоскопът CORE е напълно зареден

((●)) (синьо)

стетоскопът CORE записва

Записване

Когато сте свързани към приложението Eko, натиснете бутона (○), за да започнете да записвате.

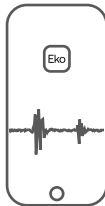

Зареждане

Свържете micro USB кабела към стетоскопа CORE и използвайте UL-сертифицирано или 5 V USB с маркировка CE стенно зарядно. Пълното зареждане на стетоскопа CORE отнема около 2 часа. Светлинният индикатор ще светне в зелено, когато устройството е напълно заредено.

Ръководство за потребителя

Прегледайте ръководството за потребителя, преди да използвате стетоскопа Littmann CORE. За да прегледате ръководството, посетете: ekohealth.com/getstarted
За повече информация относно изделията на 3М вижте HCBRegulatory.3M.com

Обслужване и поддръжка

Ако се намирате в САЩ, моля, посетете littmann.com/service или се обадете на 1-800-228-3957. Ако се намирате извън САЩ, посетете littmann.com, за да откриете данните за контакт на местния офис на 3М.



Apple App Store е търговска марка на Apple Inc.
Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC.
Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG
LBL 143 Ред. В

System assembled by 3M Company



3M Deutschland GmbH
Health Care Business

www.littmann.com



Made in USA with
Globally Sourced Materials

 **3M Company**

2510 Conway Ave.
St. Paul, MN 55144 USA



EC REP

3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss, Germany



Made in Malaysia

 **Eko Devices, Inc.**

1212 Broadway, Suite 100
Oakland, CA 94612 USA



0537

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

©2020 3M; Eko Devices Inc. All rights reserved.

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L, and Cardiology IV are marks and/or registered marks of 3M.

Unauthorized use prohibited.

Eko trademarks, including CORE, are marks and/or registered marks of Eko Devices Inc.

Issue Date: 2020-11

34-8726-3344-0