

ECG Electrodes

Instructions for use

These instructions for use are intended for the following
Ambu ECG electrodes: L, M, N, P, Q, QR, R, SP, SU, T, VL and VLC.

Instructions for use

Инструкции за употреба

Návod k použití

Brugervejledning

Bedienungsanleitung

Οδηγίες χρήσης

Instrucciones de uso

Kasutusjuhend

Käyttöohjeet

Mode d'emploi

Upute za upotrebu

Használati útmutató

Istruzioni per l'uso

使用説明書

Naudojimo instrukcija

Lietošanas pamācība

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Instrukcja użycia

Instruções de utilização

Instruçiuni de utilizazê

Инструкция по применению

Návod na použití

Navodila za uporabo

Bruksanvisning

Kullanım talimatları

使用说明

Инструкции за употреба

Електроди за ЕКГ

1.0 Предназначение

Електродът се поставя на повърхността на тялото, за да придобие електрически сигнал от повърхността на тялото към устройството за записване и мониторинг, което създава електрокардиограма или векторна кардиограма.

1.1 Противопоказания

Не са известни.

1.2 Предупреждения и предпазни мерки

Предупреждения

- Повърхностните електроди трябва да се прилагат само върху здрава, чиста кожа (напр. не върху отворени рани, тези, инфилтрани или възпалени области).
- Само за еднократна употреба. Повторната употреба на продукта може да причини контаминация, водеща до инфекции.
- След отстраняване на защитното покритие на електродите то трябва да се изхвърли в специално предназначения кош за боклук.
- С изключение на SU-00-C: Отстранете електрода от пациента при извършване на изследване чрез МРТ, тъй като това може да доведе до изгаряне на кожата на пациента.

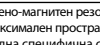
Предпазни мерки

- По време на хирургични процедури електродите трябва да бъдат поставени възможно най-далеч от електромагнитната област, за да се избегне до минимум нежеланото протичане на радиочестотни (RF) тит, които могат да донесат изгаряния на кожата.
- Електродите трябва да се използват само от или след консултации с медицински специалисти, които са добре запознати с правилното им поставяне и употреба.
- Не наксипайте, изплаквайте или стерилизирайте електродите, тъй като тези процедури може да оставят вредни остатъци или да доведат до неиздръжливост на електродите.
- За да се сведе до минимум рискът от раздразнение.

1.3 Потенциални нежелани събития

Потенциалните нежелани събития, свързани с използването на повърхностни електроди, са кожни реакции, като например изгаряния на кожата, зачервяване на кожата, сърбеж или образуване на малки мехури.

2.0 Обяснение на използваните символи

Символи на електродите за ЕКГ на Ambu	Индикация	Символи на електродите за ЕКГ	Индикация	Символи на електродите за ЕКГ на Ambu	Индикация
	Медицинско издание		Птиа		Микропористо
	Държавна на производител		Влажен гел		Полимер
	Рентгенопрозрачно				
					

3.0 Наказания за употреба

- Ако е необходимо, нанесете областите на прилагане с мек сапун и вода и подсушете внимателно.
- Само за възрастни: Подгответе кожата от прекалено сухосни области, ако е необходимо. Непригоден е всеки от мазилки, ако кожата съпротивлява с твърде високо. Правилното поставяне на електродите обикновено се определя от болничните/лицата и/или местните протоколи/процедури.
- Предпазните ленти може да имат остри ръбове, затова електродите трябва да се навакват внимателно от подбелката. Отстранете електрода от подбелката лентя и го поставяте върху кожата. Изменете програмната лента веднъж след отстраняване на електродите.
- Ако се използват електродите с сензор или предварително прикрити водещи кабел, конекторът или предварително прикритият водещ кабел трябва да се поставят в позиция, при която водещите кабелни са насочени в една и съща посока към оборудването.
- Поставяне електрода върху кожата с чист, чистоскопо акцентиран ръб с кръгово, гладко и стабилно движение.
- Свържете водещи кабел от ЕКГ устройството за мониторинг към електрода. Ако електродът е доставен с предварително поставен водещ кабел, той може да бъде свързан директно към ЕКГ устройството за мониторинг.
- Отстраняване на електроди: Бавно и постепенно изваждайте електрода, дръжте електрода бавно до повърхността на кожата, когато държите надалека от повърхността на кожата, когато държите надалека от повърхността на кожата. Избягвайте да отстранявате електрода под ъгъл 45 градуса, за да намалите риска от механична травма.
- Самоналепящите електроди трябва да се заменят, ако вече не прилепват добре към кожата.
- Остатъците от гел могат да се премахват посредством хигиенизи кърти или вода.
- Електродите в отворена торбичка може да изсъхнат, така че не отваряйте торбичката, докато не е необходимо.
- Електродите са за еднократна употреба и трябва да се изхвърлят в съответствие с местните болнични процедури.

4.0 Продуктивност на приложението (времетраеие в часове)

Номер на артикул	Разпоредбата на системата	Адаптивна система	Материал на свързване	Индикация за пациент	Продуктивност на приложението
L	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	Възрастни	72
M	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	Възрастни	24
N	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	При периферични пациенти	24
P	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	При периферични пациенти	24
Q	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	Възрастни	24
QR	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	Възрастни	24
R	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	Възрастни	24
SP	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	Възрастни	24
SU	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	Възрастни	24
T	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	Възрастни	24
VL	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	Възрастни	72
VLC	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	Възрастни	72