

БГ - ЕДНОКРАТНИ МУНДЗЕКТИ - УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Мундшуките за еднократна употреба са предназначени да се използват заедно с оборудване за изследване на белодробната функция и позволяват на пациента да извърши теста без пряк контакт с оборудването.

Пациентът лично манипулира мундшука, като го вкарва в устройството. Мундшуките трябва да се прилагат в контакт само с непокътната, чиста и здрава кожа.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Идентификационните данни (код, партида и дата на производство) са показани на идентификационния етикет на кутията.

УПОТРЕБА:

Винаги следвайте инструкциите за употреба на устройството, където се поставя мундшука. Поставете мундшука в сензора на уреда (турбина или пневмотахометър) без сила.

Никога не използвайте повторно мундшука, за да избегнете излагането на пациента на риск от кръстосано заразяване.

Не отваряйте преди употреба.

Не използвайте, ако опаковката е повредена.

Устройството не е подходящо за използване в неонаталната педиатрия.

Преди употреба съхранявайте на хладно и сухо място.

ИЗХВЪРЛЯНЕ И БЕЗОПАСНОСТ: След употреба продуктът трябва да се изхвърли в нормални нетоксични контейнери за твърди отпадъци или общи болнични отпадъци.


Внимание, ако устройството се използва повторно, съществува риск от кръстосана инфекция за пациента, който го използва повторно

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Въз основа на опита и резултатите от различни анализи няма вредни ефекти в резултат на правилното използване на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранението трябва да става на хладно и сухо място.

ВНИМАНИЕ: Индивидуалното опаковане в термозапечатана торба гарантира липса на бактериално натоявяване, което се следи периодично според системата за качество на производителя. Ако устройството се използва повторно, съществува риск от кръстосана инфекция за пациента, който го използва повторно.

Manuale d'uso LUMED Rev. 4.0 01/09/2023

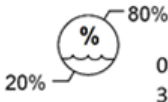

LUMED Srl

Via Staffora 18/9

20073 Opera ITALIA

www.lumed.com

tel +39 (0)2 57606750