

ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ. ПРЕДИ УПОТРЕБА СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ЛЕКАР.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не е предназначено за лица с тегло над 242 lbs (110 kg) - Не е предназначено за замръзени или хлъзгави условия. - Да не се използва от лица с алергии към латекс.

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА: За да разгънете бастуна си, дръжте дръжката и оставете съгъваемите сегменти на дръжката да се разгънат към пода. За да предотвратите падания, трябва винаги да проверявате и се уверявате, че отделните сегменти на пръчката (Фиг. 1) са стабилно заключени на място.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не разглобявайте корпуса на Trusty Cane TM. Вътре в бастуна има ластична корда. Неконтролираното освобождаване на ластичната корда може да причини тежки наранявания на незащитени части на тялото, особено на очите, в случай че ластичната корда бъде срязана, разкъсана или повредена, прекратете употребата. Не разгъвайте кордата повече от необходимото за разглобяване или сглобяване на сегментите.

За да регулирате височината на Trusty CaneTM: Разхлабете ключалката за завъртане (Фиг. 2), като я завъртите няколко пъти по часовниковата стрелка. Натиснете заключващия бутон (Фиг. 3) и издърпайте нагоре дръжката за удължаване или натиснете надолу дръжката за скъсяване. След като регулирате бастуна Trusty CaneTM до желаната височина не забравяйте да затегнете ключалката за завъртане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите падане, винаги се уверявайте, че отделните сегменти на пръчката са здраво заключени на място и че заключващият бутон е задействан изцяло.

За да сгънете Trusty CaneTM: Бастунът Trusty CaneTM може лесно да се сгъне до удобен за пътуване размер, като се разделят 4-те отделни сегмента на пръчката един от друг. Задръжте всеки един от сегментите на пръчката близо до свързването и ги разделете (Фиг. 4). Отделните сегменти на пръчката ще се сгънат леко заедно (Фиг. 5).

За да използвате лампите на Trusty CaneTM: Бутонът в горната част на дръжката на Trusty CaneTM (Фиг. 6) активира светлините. Натискането на бутона веднъж ще активира лампите, а повторното натискане ще ги изключи. Лампите ще изгаснат автоматично след 20 минути.

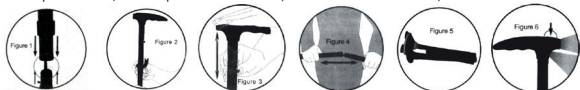

Поддръжка на Trusty CaneTM: За да смените батериите, използвайте отвертка Philips, за да отворите отделението за батерии под дръжката на Trusty CaneTM. Отстранете изтощените батерии и ги изхвърлете правилно. Като използвате 3 AAA батерии, подравнете + и -, както е посочено, иначе лампите няма да работят. Сменете и затегнете винта на вратата за батериите. Проверявайте бастуна редовно за следи от износване, включително за протриване на ластичната корда или износване на гумените крачета. Ако забележите следи от износване, незабавно прекратете употребата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не смесвайте стари с нови батерии. Не смесвайте алкални, стандартни (въглеродно-цинкови) или акумулаторни (никел-кадмиеви) батерии.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА GIMA: Прилага се стандартна 12-месечна B2B гаранция Gima.

Gima 43044 - 43045 REF GB-801 (SV) GB-801 (BK)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Vaalistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Geïmporteer door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilberleed av/تولید شده بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made In China

Importato da/imported by/importé par/importado por/importiert von/
Importado por/Εισαγυγί από/Dovezeno od strane/Dovezeno uživatelem/Importeret
af/Importēja/ Tuojas/Uvezeno od strane/importálta/importēja/importavo/
Importert av/Geïmporteerde door/importowane przez/importat de/Dovážal/
Uvozi/Importat av/توزیع شده بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



