


ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ЗА МИНИ ВЕЛОЕРГОМЕТЪР

1. Извадете мини велоергометра от кутията, след което го хванете внимателно. Вижте фигура 1.
2. Разположете мини велоергометра на земята на едно и също ниво, след което поставете ръкохватката с винт А върху него, както е показано на фигурата. Вижте фигура 2.
3. Завъртете ръкохватката с винт А, така че да осигурите правилен натиск на ос В. (по посока наляво, за да увеличите налягането, обратно, за да го намалите) Включете бутона на калкулатора С и завъртете ос В, веднага след като започне да се използва. Погледнете фигура 3 (за повече информация вижте инструкцията за калкулатора).
4. След употреба издърпайте цифра 0 към вътрешността и го сгънете добре, както е показано на фигура 5.
5. Забележка:
 - (1) Преди употреба го проверете и се уверете, че е поставен здраво и на едно и също ниво;
 - (2) Не забравяйте да оставите натискът да е минимален, когато започнете да го използвате, след което го увеличете, за да достигне необходимото;
 - (3) Приложим за: възрастни хора, деца, стари хора;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Please don't try to stand up on the mini cycle, that will damage the machine.

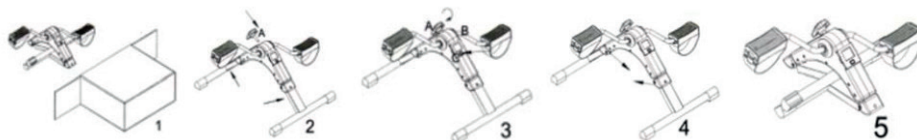

УПРАЖНЕНИЕ КОМПЮТЪР РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ:

TI ME -----00: 00-99:59MIN
COUNT-----0-9999
REPS/MIN-----0-9999
CALORIE -----0-9999KAL

ФУНКЦИЯ НА БУТОНА:

MODE: С този бутон можете да избирате и заключавате конкретна функция, която желаете, а като задържите бутона за 4 секунди, се нулират всички стойности на функцията.

РАБОТНИ ПРОЦЕДУРИ:


AUTO ON/OFF: Системата се включва при натискане на който и да е бутон или при отчитане на вход от датчика за скорост. Мониторът се изключва автоматично, ако в продължение на 4 минути не постъпи сигнал.

ФУНКЦИЯ:

TIME Натиснете бутон MODE, докато ">" започне да сочи TIME. Когато сензорът за скорост получи какъвто и да е сигнал, той започва да отброява и автоматично натрупва време за тренировка при започване на упражнението. **COUNT** Когато ">" сочи на COUNT, компютърът ще показва стъпките, когато сензорът за скорост получи някакъв сигнал, започва да брой и автоматично натрупва брой за упражнение при започване на тренировка. **REPS/MIN** С натискане на бутон MODE, докато "<" започне да сочи REPS/MIN., когато сензорът за скорост получи някакъв сигнал, започва да брой и автоматично натрупва брой за упражнение при започване на тренировка. **CALORIE** С натискане на бутон MODE, докато ">" се покаже CAL. Когато сензорът за скорост получи какъвто и да е сигнал, той започва да отброява и автоматично натрупва калории за тренировка при започване на упражнението.

SCAN Когато ">" сочи към SCAN, компютърът автоматично ще покаже следните функции в посочения ред: TIME-----COUNT-----STRIDES-----CALORIES

ЗАБЕЛЕЖКА 1. Спец. на батерия: 1,5V, LR44 (1 бр.) - 2. Ако мониторът се показва неправилно, моля, поставете отново батериите. - 3. Процедура за инсталиране на батерията:

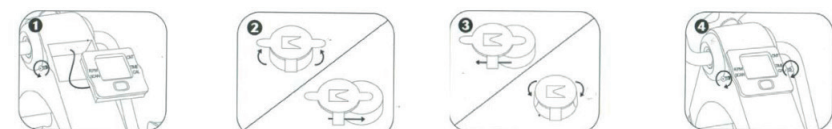

Разхлабете и отстранете винтовете от всяка страна на екранния модул, след което внимателно извадете екранния модул от гледното му.

На гърба на екрана повдигнете езичката на батерията и я издърпайте навън.

Поставете нова батерия 1,5V LR44, с положителния полюс надолу и затворете капачицата.

Поставете обратно екранния блок в гледното му и го закрепете с винта

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА GIMA

Прилага се стандартната 12-месечна B2B гаранция (за взаимоотношения между фирми) на фирма Gima.

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός:
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD
No.31th Floor, Jinmao Building, CBD Centre,
Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

REF TD001P-3

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por/ Ein-
geführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

GIMA 43151