



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Διανέμονται από - Distribuiti da :

Gima S.p.A


Via Marconi, 1

20060 Gessate (MI) - Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com


ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ GIMA - ΟΒΛΙΧΕΙΟΝΥΨ ΣΤΙΤ GIMA

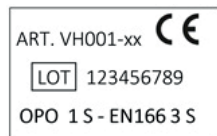

Λωρίδα με κλείσιμο τύπου σκρατς
Páska se suchým zipem

Μετωπιαία επένδυση με δυνατότητα αντικατάστασης
Vyměnitelné čelní polstrovaní

Εναλλάξιμο αξεσουάρ κλειδώματος
Vyměnitelné uzamykací příslušenství

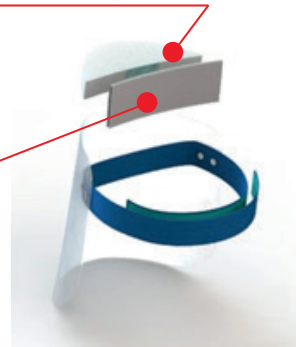

CZ

OZNAČENÍ A SYMBOLY POUŽITÍ

LOT

VH001: model výrobku, xx kód barvy pásky. LOT: číslo šarže OPO: identifikace výrobce; 1: optická třída; S: symbol nízkoeenergetického dopadu; -EN166: referenční technická norma, 3: symbol pro kapaliny; S: symbol nízkoeenergetického dopadu, CE: certifikace CE. Štít je v souladu s nařízením (EU) 2016/425 a certifikátem CE oznámeného subjektu č. 0426 (Italcert Srl, Viale Sarca 33, Milán) s certifikátem a ve shodě s normou EN 166:2001. ES prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese výrobce a společnosti Gima www.gimaitaly.com

NANESENÍ A NASTAVENÍ

- 1) Naneste čelní opěrku a utáhněte ji zavíráním na suchý zip.
- 2) Položte masku na čelo a vycentrujte ji.
- 3) Napněte pásky a zajistěte je zavíráním na suchý zip v požadované poloze.

ÚDRŽBA A OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

Proveďte kontrolu štítu před každým použitím: zkontrolujte čistotu, průhlednost, nepřítomnost prasklin a neporušenost švů. Dále zkontrolujte, zda čelenka není opotřebovaná a že se při upevnění na hlavě nepovoluje. Pokud je štít poškozený, vyměňte jej

- Vyčistěte v případě kontaminace cizími látkami

- Vyměňte v případě poškození nebo v případě neodstranitelné kontaminace.

Čištění: OOP musí být čistěn neagresivním čisticím prostředkem, vlažnou vodou pomocí měkkého hadříku, který se používá i ve fázi oplachování. Pro účely dezinfekce používejte dezinfekční roztoky na bázi alkoholu. Čelní opěrku lze odejmout a prát v práčce při 40° Pro účely dezinfekce používejte dezinfekční roztoky na bázi alkoholu.

Opakované použití: Štít je opakovaně použitelný, pokud byl nejprve dezinfikován a byla vyměněna čelní opěrka a jakékoli volitelné uzavírací příslušenství.

UCHOVÁNÍ, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ A PŘEPRAVA

Chraňte před přímým slunečním zářením, zářivkami, rentgenovými paprsky a ozonem. Uchovávejte na suchém místě v jejich obalu a chráňte je před deformacemi. Teplota: +5°C až +40°C, relativní vlhkost: < 60%. Přepravujte v uzavřeném a dobře uzavřeném sáčku.

Datum expirace: 5 let, od prodeje konečnému uživateli, je-li skladován v původním obalu a v podmínkách uvedených výše.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Materiály, které mohou přijít do kontaktu s pokožkou nositele, by mohly způsobit citlivým osobám alergické reakce. Oblíček štít může při nošení přes oční brýle přenášet nárazy, a tím vytvářet nebezpečí pro nositele.

Pokud je hledí poškrábané nebo poškozené, štít vyměňte.

Chránič není vhodný k ochraně proti částicím s vysokou rychlostí jak při pokojové teplotě, tak při extrémních teplotách.

Officina Prodotti Ortopedici S.r.l.
(O.P.O srl). Società Unipersonale
Via Bellini, 33 40067 Rastignano - (Pianoro) BO Italy
www.opo.it
Made in Italy

REF 30846

πρότυπο/Šablona VH001

