



# Littmann® CORE Stethoscope

Connects to Eko Software

Eko

3M



(en)	English	pp. 1	(sl)	Slovenski	pp. 33
(fr)	Français	pp. 3	(et)	Eesti	pp. 35
(de)	Deutsch	pp. 5	(lv)	Latviesu	pp. 37
(it)	Italiano	pp. 7	(lt)	Lietuviškai	pp. 39
(es)	Español	pp. 9	(ro)	Romana	pp. 41
(nl)	Nederlands	pp. 11	(hr)	Hrvatski	pp. 43
(sv)	Svenska	pp. 13	(bg)	Български	pp. 45
(da)	Dansk	pp. 15			
(no)	Norsk	pp. 17			
(fi)	Suomi	pp. 19			
(pt)	Português	pp. 21			
(el)	Ελληνικά	pp. 23			
(pl)	Polski	pp. 25			
(hu)	Magyar	pp. 27			
(cs)	Čeština	pp. 29			
(sk)	Slovensky	pp. 31			

# Digitální stetoskop CORE 3M™ Littmann®

## Stručná referenční příručka

Z obchodu App Store® nebo Google Play® si stáhněte aplikaci Eko.

V telefonu nebo na tabletu si zapněte bezdrátovou funkci Bluetooth®, spusťte aplikaci a zapněte stetoskop CORE.


Eko

## Obsah balení

- Digitální nástavec Eko CORE a stetoskop 3M™ Littmann® Cardiology IV™
- Doplnková sada měkkých těsnících olivek 3M Littmann Snap Tight (malé)
- Nechladivé pouzdro
- Nabíjecí kabel USB
- Stručná referenční příručka

## Olivky do uší

Olivky vkládejte tak, aby směřovaly dopředu.

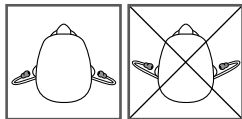

## Hlasitost

Hlasitost upravujte pomocí tlačítek (+) a (-). K dispozici je 7 stupňů hlasitosti.

## Zapnutí a vypnutí

Když je stetoskop CORE vypnutý, funguje jako stetoskop bez zesílení.

Chcete-li stetoskop CORE zapnout, stiskněte přepínač napájení. Začne blikat kontrolka.

Nyní v olivkách uslyšíte zesílený a filtrovaný zvuk.

## Funkce telemedicíny a umělé inteligence

Aplikace Eko nabízí funkce telemedicíny a umělé inteligence, které vyžadují předplatné softwaru (pokud je k dispozici, prodává se samostatně).

Předplatné si můžete sjednat online na adrese ekohealth.com.

## Aktivní potlačení hluku

Stetoskop CORE obsahuje funkci aktivního potlačení hluku, která eliminuje okolní hluk z prostředí. Aktivní potlačení hluku lze vypnout nebo zapnout pomocí aplikace Eko.



## Oznámení

((( ))) (blikající)  
stetoskop  
CORE je zapnut  
a vyhledává  
zařízení.

● (žlutá)  
stetoskop CORE je  
vypnut a nabíjí se.

(●●) (žlutá)  
stetoskop CORE  
má vybitou baterii.


○  
stetoskop CORE je  
zapnut a připojen.

● (zelená)  
stetoskop CORE je  
plně nabit.

(●●) (modrá)  
stetoskop CORE  
nahrává.

## Nahrávání

Po připojení k aplikaci Eko zahájíte nahrávání stisknutím tlačítka (o).

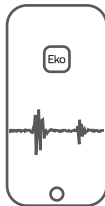

## Nabíjení

Připojte mikrokabel USB ke stetoskopu CORE a použijte nástěnnou nabíječku 5V USB s certifikací UL nebo CE. Úplné nabití stetoskopu CORE bude trvat asi 2 hodiny. Po úplném nabití se kontrolka rozsvítí zeleně.

## Uživatelská příručka

Než začnete používat stetoskop CORE Littmann, prostudujte si uživatelskou příručku. Příručku si můžete zobrazit na internetové stránce:

[ekohealth.com/getstarted](http://ekohealth.com/getstarted)

Další informace o zařízeních společnosti 3M naleznete na internetové stránce [HCBRegulatory.3M.com](http://HCBRegulatory.3M.com).

## Servis a podpora

V USA navštivte internetové stránky [littmann.com/service](http://littmann.com/service) nebo volejte na číslo 1-800-228-3957. Pokud jste mimo USA, navštivte prosím internetové stránky [littmann.com](http://littmann.com), kde naleznete kontaktní údaje místní pobočky společnosti 3M.



Apple App Store je ochranná známka společnosti Apple Inc.

Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG.

LBL 143 Rev B

System assembled by 3M Company



**3M Deutschland GmbH**  
Health Care Business

[www.littmann.com](http://www.littmann.com)



Made in USA with  
Globally Sourced Materials

 **3M Company**  
2510 Conway Ave.  
St. Paul, MN 55144 USA


**MD**

**CE**

 **3M Deutschland GmbH**  
Health Care Business  
Carl-Schurz-Str. 1  
41453 Neuss, Germany




Made in Malaysia

 **Eko Devices, Inc.**  
1212 Broadway, Suite 100  
Oakland, CA 94612 USA

**MD**

**CE**

**0537**

 **Emergo Europe**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

©2020 3M; Eko Devices Inc. All rights reserved.

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L, and Cardiology IV are marks and/or registered marks of 3M.  
Unauthorized use prohibited.

Eko trademarks, including CORE, are marks and/or registered marks of Eko Devices Inc.

Issue Date: 2020-11  
34-8726-3344-0