



Littmann® CORE Stethoscope

Connects to Eko Software

Eko

3M

(en)	English	pp. 1	(sl)	Slovenski	pp. 33
(fr)	Français	pp. 3	(et)	Eesti	pp. 35
(de)	Deutsch	pp. 5	(lv)	Latviesu	pp. 37
(it)	Italiano	pp. 7	(lt)	Lietuviškai	pp. 39
(es)	Español	pp. 9	(ro)	Romana	pp. 41
(nl)	Nederlands	pp. 11	(hr)	Hrvatski	pp. 43
(sv)	Svenska	pp. 13	(bg)	Български	pp. 45
(da)	Dansk	pp. 15			
(no)	Norsk	pp. 17			
(fi)	Suomi	pp. 19			
(pt)	Português	pp. 21			
(el)	Ελληνικά	pp. 23			
(pl)	Polski	pp. 25			
(hu)	Magyar	pp. 27			
(cs)	Čeština	pp. 29			
(sk)	Slovensky	pp. 31			

Digitální stetoskop CORE 3M™ Littmann®

Stručná referenční příručka

Z obchodu App Store® nebo Google Play® si stáhněte aplikaci Eko.

V telefonu nebo na tabletu si zapněte bezdrátovou funkci Bluetooth®, spusťte aplikaci a zapněte stetoskop CORE.


Eko

Obsah balení

- Digitální nástavec Eko CORE a stetoskop 3M™ Littmann® Cardiology IV™
- Doplnková sada měkkých těsnících olivek 3M Littmann Snap Tight (malé)
- Nechladivé pouzdro
- Nabíjecí kabel USB
- Stručná referenční příručka

Olivky do uší

Olivky vkládejte tak, aby směřovaly dopředu.

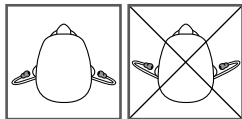

Hlasitost

Hlasitost upravujte pomocí tlačítek (+) a (-). K dispozici je 7 stupňů hlasitosti.

Zapnutí a vypnutí

Když je stetoskop CORE vypnutý, funguje jako stetoskop bez zesílení.

Chcete-li stetoskop CORE zapnout, stiskněte přepínač napájení. Začne blikat kontrolka.

Nyní v olivkách uslyšíte zesílený a filtrovaný zvuk.

Funkce telemedicíny a umělé inteligence

Aplikace Eko nabízí funkce telemedicíny a umělé inteligence, které vyžadují předplatné softwaru (pokud je k dispozici, prodává se samostatně).

Předplatné si můžete sjednat online na adrese ekohealth.com.

Aktivní potlačení hluku

Stetoskop CORE obsahuje funkci aktivního potlačení hluku, která eliminuje okolní hluk z prostředí. Aktivní potlačení hluku lze vypnout nebo zapnout pomocí aplikace Eko.



Oznámení

((())) (blikající)
stetoskop
CORE je zapnut
a vyhledává
zařízení.

● (žlutá)
stetoskop CORE je
vypnut a nabíjí se.

(●●) (žlutá)
stetoskop CORE
má vybitou baterii.


○
stetoskop CORE je
zapnut a připojen.

● (zelená)
stetoskop CORE je
plně nabit.

(●●) (modrá)
stetoskop CORE
nahrává.

Nahrávání

Po připojení k aplikaci Eko zahájíte nahrávání stisknutím tlačítka (o).

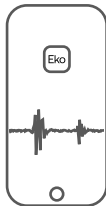

Nabíjení

Připojte mikrokabel USB ke stetoskopu CORE a použijte nástěnnou nabíječku 5V USB s certifikací UL nebo CE. Úplné nabití stetoskopu CORE bude trvat asi 2 hodiny. Po úplném nabití se kontrolka rozsvítí zeleně.

Uživatelská příručka

Než začnete používat stetoskop CORE Littmann, prostudujte si uživatelskou příručku. Příručku si můžete zobrazit na internetové stránce:

ekohealth.com/getstarted

Další informace o zařízeních společnosti 3M naleznete na internetové stránce HCBRegulatory.3M.com.

Servis a podpora

V USA navštivte internetové stránky littmann.com/service nebo volejte na číslo 1-800-228-3957. Pokud jste mimo USA, navštivte prosím internetové stránky littmann.com, kde naleznete kontaktní údaje místní pobočky společnosti 3M.



Apple App Store je ochranná známka společnosti Apple Inc.
Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG.

LBL 143 Rev B

System assembled by 3M Company



3M Deutschland GmbH
Health Care Business

www.littmann.com



Made in USA with
Globally Sourced Materials

3M Company
2510 Conway Ave.
St. Paul, MN 55144 USA

MD

CE

EC REP **3M Deutschland GmbH**
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss, Germany



Made in Malaysia

Eko Devices, Inc.
1212 Broadway, Suite 100
Oakland, CA 94612 USA

MD

CE

0537

EC REP **Emergo Europe**
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

©2020 3M; Eko Devices Inc. All rights reserved.

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L, and Cardiology IV are marks and/or registered marks of 3M.
Unauthorized use prohibited.

Eko trademarks, including CORE, are marks and/or registered marks of Eko Devices Inc.

Issue Date: 2020-11
34-8726-3344-0