

CS - JEDNORÁZOVÉ NÁUSTKY - NÁVOD K POUŽITÍ

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ: Jednorázové náustky jsou určeny k použití společně s vybavením pro studium funkce plic a umožňují pacientovi provést test bez přímého kontaktu s vybavením. Pacient osobně manipuluje s náustkem vložením do zařízení. Náustky musí být aplikovány pouze v kontaktu s neporušenou, čistou a zdravou pokožkou.

IDENTIFIKACE PRODUKTU: identifikační údaje (kód, šarže a datum výroby) jsou uvedeny na identifikačním štítku na krabici.

POUŽÍVÁNÍ:

Vždy dodržujte návod k použití zařízení tam, kde je nasazen náustek

Vložte náustek do senzoru zařízení (turbína nebo pneumotachometr) bez použití násilí.

Nikdy znovu nepoužívejte náustek, aby nedošlo k vystavení pacienta riziku křížové kontaminace.

Před použitím neotvírejte.

Nepoužívejte, pokud je obal poškozen.

Přístroj není vhodný pro použití v novorozenecké pediatrii.

Před použitím skladujte na chladném a suchém místě.

LIKVIDACE A BEZPEČNOST: po použití musí být produkt zlikvidován v běžných netoxických nádobách na pevný odpad nebo v běžném nemocničním odpadu.


Pozor, pokud je zařízení znovu použito, existuje riziko křížové infekce pro pacienta, který jej znovu použije

KONTRAINDIKACE: na základě zkušeností a výsledků různých analýz nevykazují žádné škodlivé účinky vyplývající z vhodného použití produktu.

SKLADOVÁNÍ: Skladujte na chladném a suchém místě.

UPOZORNĚNÍ: jednotlivé obaly v tepelně uzavřeném sáčku garantují nepřítomnost bakteriální zátěže, která je periodicky sledována dle systému kvality výrobce. Pokud je zařízení znovu použito, existuje riziko křížové infekce pro pacienta, který jej znovu použije.

Manuale d'uso LUMED Rev. 4.0 01/09/2023

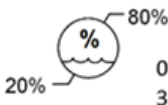

LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750