







Directions for use

## Ambu<sup>®</sup> Man School



**Ambu A/S**  
Baltorpbakken 13  
DK-2750 Ballerup  
Denmark  
T +45 72 25 20 00  
F +45 72 25 20 50  
[www.ambu.com](http://www.ambu.com)

492516040 - 11/2016 - V01 - Printed in China

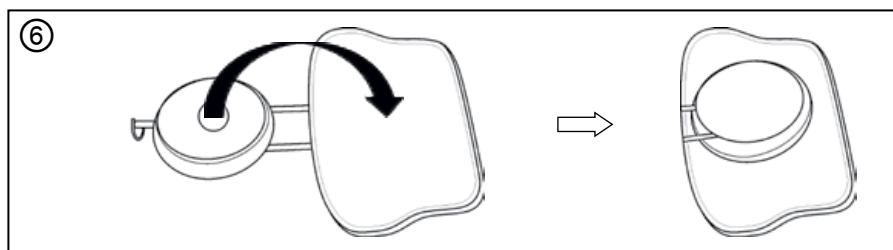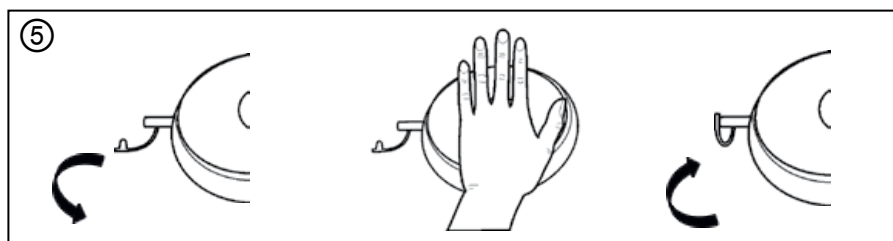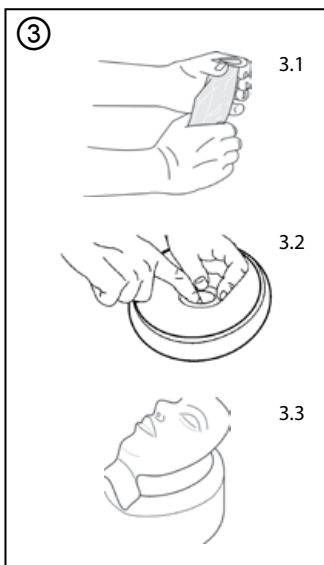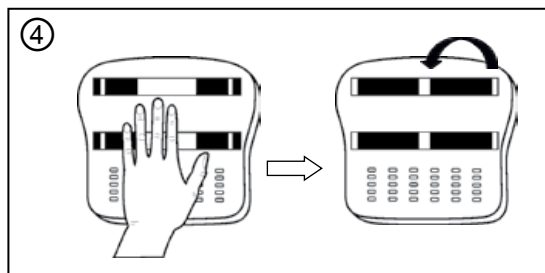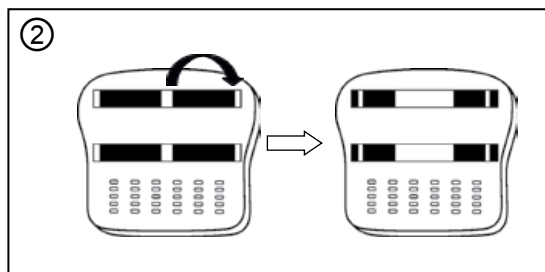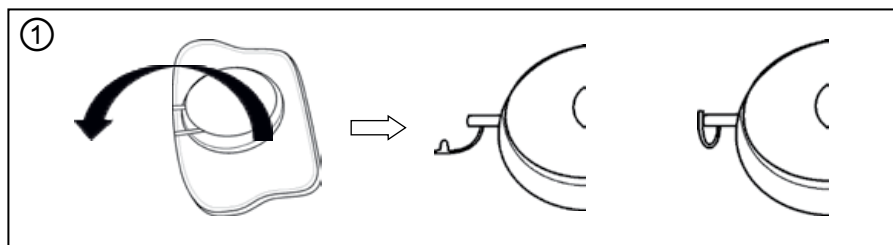

## Obsah

1. Úvod
2. Technické specifikace
  - 2.1. Rozměry
  - 2.2. Materiál
  - 2.3. Použití a uchovávání
3. Použití
  - 3.1. Příprava na výcvik
  - 3.2. Po výcviku
  - 3.3. Čištění
    - 3.3.1. Obličejový díl
    - 3.3.2. Čištění hlavy a těla

## Strana

- 8
- 8
- 8
- 8
- 8
- 8
- 9
- 9
- 9
- 9

## 1. Úvod

AmbuMan School se může používat k demonstraci a školení všech postupů pro základní resuscitaci.

Je určeno pro použití k edukaci žáků ve školách pod dohledem instruktora nebo učitele.

AmbuMan School se bude používat zejména s ohledem na níže uvedené specifikace pro školení resuscitace.

- ventilace z úst do úst
- ventilace z úst do nosu
- Zevní komprese hrudníku
- Uložení pádel AED

## 2. Technické specifikace

### 2.1. Rozměry

Hmotnost: 0,8 kg

Rozměry (délka x šířka x výška): 45 x 30 x 10 cm

### 2.2. Materiál

Pásky	Nylon	Hlava	Silikonové
Základní deska	Polykarbonát	Obličejový díl	Polyvinyl chlorid
Pod	Styren-butadienového kaučuku	Plicní vak	Polyvinyl chlorid
Hrudník	Polypropylen	Hlavový vak	Polyethylene

### 2.3. Použití a uchování

Teplota skladování (bez kondenzace): -18 °C (-0,4 °F) až 40 °C (105 °F)

Teplota použití (bez kondenzace): -5 °C (23 °F) až 40 °C (105 °F)

Vlhkost: 5 % až 95 %

## 3. Použití

### 3.1. Příprava na výcvik

Rozbalte hlavu po vrchol a nafoukněte. Po nafouknutí vzduchový ventil uzavřete. ①

Otočte figurínu hlavou dolů, uvolněte pásky ze středu a zajistěte na suchý zip na vnějšku. ②

Vložte hlavový vak a připevněte tvář k hlavě. ③

Figurína je nyní připravena pro školení KPR.

### POZNÁMKA:

Používejte pouze pumpu nebo stříkačku pro nafouknutí hlavy, abyste předešli kontaminaci hlavy.

Pokud hlava během použití kolabuje, otevřete hlavový ventil a znovu hlavu nafoukněte na dostatečnou úroveň.

Nikdy nepoužívejte figurínu bez hlavového vaku, protože by mohlo dojít ke kontaminaci uvnitř.

Hlavové vaky a tvářové díly se musí před použitím novým školencem vyměnit.

### 3.2. Po výcviku

Odstraňte tvářový díl a hlavový vak a hlavový vak vyhoďte.

Očistěte tělo a tvářový díl dle popisu v bodě 3.3.

Otočte figurínu hlavou dolů, zatlačte základní desku do středu a figurínu stlačte.

Zatáhněte za pásek nejprve do strany a pak pásek připevněte suchým zipem do středu základní desky. ④

Otevřete vzduchový ventil a hlavu pro vyfouknutí stlačte. Pak vzduchový ventil zavřete. ⑤

Odklopte hlavu na hrudník a umístěte figurínu zpět do krabice pro uskladnění. ⑥

### 3.3. Čištění

#### 3.3.1. Obličejový díl

##### Ruční čištění

A. Opláchněte obličejový díl v čisté vodě.

B. Díly umývejte v teplé vodě o teplotě max. 65 °C (150 °F) za použití jemného čistícího prostředku.

C. Důkladně opláchněte v čisté vodě a odstraňte všechny zbytky čistícího prostředku.

##### Praní v pračce

Obličejové díly lze prát v běžné pračce. Aplikujte normální dávku čistícího prostředku a zvolte mycí program s maximální teplotou 70 °C (158°F).

##### Dezinfekce

A. Umístěte díly do roztoku chlornanu sodného s koncentrací alespoň 500 ppm volného chloru (1/4 hrnku tekutého domácího bělidla v jednom galonu (asi 4 litry) vody z vodovodu po dobu 10 minut). Tento roztok musí být čerstvý a po použití musí být zlikvidován.

B. Umístěte díly do 70 % alkoholového roztoku chlorhexidinu na dobu 2 minut (70 % ethylalkoholu a 0,5 % chlorhexidinu).

C. Chemickou dezinfekci lze provést také pomocí schváleného dezinfekčního roztoku vhodného pro použití v kombinaci s polyvinylchloridem (PVC). Pokyny dodavatele týkající se dávkování a doby dezinfekce je nutné důsledně dodržovat.

D. Po dezinfekci vždy opláchněte díly čistou vodou a nechte před uložením uschnout.

**POZNÁMKA:** Obličejový díl nevystavujte působení vroucí vody. Nelze jej ani autoklávkovat nebo sterilizovat plynem.

#### 3.3.2. Čištění hlavy a těla

Otřete hlavu a tělo hadříkem navlhčeným v čisté vodě.