

fungovala s průtokem mezi 5 a 10 LPM a dodávala průtoky kyslíku mezi 40 % a 60 %.

OXYGENTHERAPICKÁ MASKA S PROMĚNLIVOU KONCENTRACÍ

U pevných adaptérů/ředidel vzduch-O2 (sedm různých barev) připojte vybrané ředidlo k vlnité hadici; v případě jednoduchého ředidla vzduch-O2 zvolte koncentraci a ujistěte se, že je pohyblivá část regulátoru zcela zasunuta do sedla a připojte adaptér/ředidlo k vlnité hadici.


Připojte kelímek k řediči. Připojte k řediči hadičku s funkcí proti stlačení. Připojte druhý konec k plastovému výstupu masky. Doporučené průtoky a relativní procenta dodávaného kyslíku jsou vytištěny na řediči nebo na štítku.

MASKA S VYSOKOU KONCENTRACÍ OXYGENTHERAPIE

Vyrovnejte plastový sáček. Připojte konektor hadičky ke zdroji kyslíku. Připojte druhý konec k plastovému výstupu masky. Upravte kapacitu tak, aby se sáček během nádechu nevyfoukl o více než polovinu. Tok dodávaného kyslíku se pohybuje mezi 90 % a 100%.

OXYGENTHERAPICKÁ MASKA PRO AEROSOL

Odšroubujte uzávěr ze základny a přidejte předepsané léky. Znovu sestavte. Připevněte masku k horní části nebulizátoru na připraveném otvoru. Připojte jeden konec hadičky k výstupu nebulizátoru a druhý konec ke zdroji kyslíku nebo stlačeného vzduchu. Ověřte, zda je připojení správné (jak je uvedeno níže).

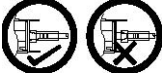

Doba podávání se řídí lékařským předpisem. Pro optimální nebulizaci je doporučený průtok mezi 6 a 9 LPM při tlaku 3,44 bar (344 kPa, ekvivalent 50 PSI). Účinná nebulizace je zaručena až do tlaku 1,73 bar (173 kPa, což odpovídá 25 PSI).

VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ MODELÝ: NASTAVENÍ PRŮTOKU KYSLÍKU A NASAZENÍ MASKY

Zkontrolujte, zda jsou hadičky bezpečně připojeny ke zdroji kyslíku. Dodávejte kyslík a regulujte průtok podle pokynů lékaře. Položte masku na obličej pacienta zakrývající ústa i nos. Přetáhněte elastický pásek přes hlavu a uši pacienta na krk. Upravte napnutí pásku tahem tak, aby maska držela na místě. Upravte kovový nosní díl na pacientovu tvář.

OXYGENTHERAPICKÁ MASKA PRO TRACHEOSTOMII

KYSLÍKOVÁ TERAPEUTICKÁ MASKA PRO TRACHEOSTOMII S PROMĚNLIVOU KONCENTRACÍ

Oxygenoterapeutická maska pro tracheostomii: Připojte aerosolovou hadičku (není součástí tohoto balení) mezi masku a zdroj plynu. Zvolte správný průtok v litrech u zdroje plynu a zkontrolujte průtok plynu maskou.

Kyslíková terapeutická maska pro tracheostomii s proměnlivou koncentrací: Připojte předepsaný ředič k vlnité hadičce. Připojte kelímek k řediči. Připojte k řediči hadičku s funkcí proti stlačení. Připojte druhý konec k plastovému výstupu masky. Doporučené průtoky a relativní procenta dodaného kyslíku jsou vytištěny na řediči.

Oxygenoterapeutická maska pro tracheostomii / Kyslíková terapeutická maska pro tracheostomii s proměnlivou koncentrací: Umístěte elastický pásek za krk a jemně zatáhněte za konec pásku, dokud se maska nezajistí. Vstup masky je otočný o 360°, aby se hadička mohla umístit do polohy jak pro pacienty vleže, tak i ve stoje. Při použití odsávání uvolněte masku (zatažením za pásek v opačném směru nebo odepnutím jedné strany pásku) a sejměte masku z oblasti sání. Vyměňte masku, jak bylo uvedeno výše. Varování: Ujistěte se, že jsou všechna připojení bezpečná.

KONTRAINDIKACE

U oxygenoterapie nejsou popsány žádné kontraindikace. Informace o podávání léku naleznete v pokynech dodávaných s lékem.

VAROVÁNÍ

Pokud je produkt znovu použit v rozporu s těmito pokyny, může to znamenat:

1. nečistotu produktu a možný výskyt biologických zbytků, které by mohly způsobit křížové infekce;
2. změnu materiálů;
3. ztrátu původních funkčních vlastností produktu.

- Před připojením ke zdroji kyslíku ověřte jeho funkci.
- Náhodné zmáčknutí nebo zalomení spojovací hadičky neumožní správné proudění kyslíku a může způsobit odpojení konektoru. Proto se doporučuje pečlivá kontrola uživatelem.
- Průtok kyslíku vyšší než 10 litrů za minutu může způsobit rušivý hluk v systému. Do směsi, která přitéká pacientovi, může také vtéct kapalina vycházející ze zvlhčovače.
- Všechny výše uvedené modely jsou jednorázové a nelze je používat nepřetržitě déle než 30 dní.
- Koncentrovaný kyslík může zapálit hořlavé materiály. Abyste se vyhnuli riziku požáru nebo výbuchu, držte se mimo dosah možných zdrojů vznícení a prostudujte si bezpečnostní opatření pro použití produktu používaného pro dodávku kyslíku.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

S odpady pocházejícími ze zdravotnických struktur musí být nakládáno podle platných předpisů.

OBEČNÉ POZNÁMKY

Pokud během používání tohoto zařízení nebo v důsledku jeho používání dojde k nežádoucí příhodě, nahlase to výrobci a vaší národní autoritě. V případě jakékoliv poruchy nebo závady zařízení se obraťte Servis Kvality Výrobce.

CS

**MASKY PRO KYSLÍKOVOU TERAPII
NÁVOD K POUŽITÍ**

INDIKACE

Terapeutické podávání kyslíku.

Poznámka: Výrobek na jedno použití - nepoužívejte opakovaně.

Zdroj kyslíku musí být v souladu s platnými předpisy.

Produkty musí používat kvalifikovaný zdravotnický personál.

PŘÍPRAVA A PŘIPOJENÍ

OXYGENTHERAPICKÁ MASKA STŘEDNÍ KONCENTRACE

Připojte konektor hadičky ke zdroji kyslíku. Připojte druhý konec k plastovému výstupu masky. Masku byla navržena tak, aby

	BG	CS	HR	HU	LT	LV	RO	SR
	Съответства на действащото европейско законодателство относно медицинските изделия	Vyhovuje současně evropské legislativě o zdravotnických prostředcích	U skladu s važečím evropskim zakonodavstvom o medicinskim proizvodima	Megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó hatályos európai jogszabályoknak	Atitinka galiojančius Europos teisės aktus dėl medicinos priemonių	Atbilst pašreizējiem Eiropas tiesību aktiem par medicīnas ierīcēm	Conform cu legislația europeană în vigoare privind dispozitivele medicale	Usaglašeno sa tekućim evropskim propisima o medicinskim sredstvima
	Направете справка с инструкциите за употреба	Čtěte uživatelskou příručku	Proučite upute prije korištenja	Consult használati utasítás	Žr. naudojimo instrukcijas	Skatīt lietošanas instrukciju	Consultați instrucțiunile de utilizare	Konsultujte instrukcije za upotrebu
	Дата на производство	Datum výroby	Datum proizvodnje	Gyártás dátuma	Pagaminimo data	Ražošanas datums	Data de fabricație	Datum proizvodnje
	Производител	Výrobce	Proizvođač	Gyártó	Gamintojas	Ražotājs	Producător	Proizvođač
	Дистрибутор	Distributor	Distributer	Forgalmazó	Platintojas	Izplatītājs	Distribuitor	Distributer
	Каталожен номер	Katalogové číslo	Kataloški broj	Katalógusszám	Katalogo numeris	Kataloga numurs	Număr de catalog	Kataloški broj
	Партиден номер	Číslo šarže	LOT	Tételszám	Partijos kodas	Partijas kods	Numar de lot	Serijski broj
	Използвай при	Spotřebujte do	Lejáratí dátum	Lejáratí dátum	Tinka iki	Izmantošanai	Data limită de utilizare	Rok upotrebe
	Darabszám	Počet kusů	Količina komada	Darabszám	Dalių kiekis	Vienumu daudzums	Număr de bucăți	Količina komada
	Не се допуска повторна употреба	Nepoužívat opakovaně	Nemojte ponovno koristiti	Ne használja több alkalommal	Pakartotinai nenaudoti	Nelietot atkārtoti	A nu se reutiliza	Zabranjena ponovna upotreba
	Не съдържа естествен гумен латекс	Neobsahuje přírodní latex	Ne sadrži prirodnu gumu i lateks	Nem tartalmaz természetes latexgumit	Sudėtyje nėra latekso	Nesatur dabīgās gumijas lateksu	Nu conține cauciuc natural (latex)	Ne sadrži prirodnu gumu lateks
	Пазете от пряка слънчева светлина	Nevystavujte slunečnému záření	Štititi od direktnog sunčevog svjetla	Tartsa távol a napfénytől	Saugoti nuo saulės spindulių	Nepakļaut produkta atrašanos tiešā saules gaismā	A se feri de razele soarelui	Držati dalje od sunčeve svetlosti
	Не съдържа фталати: БЕЗ DEHP	Neobsahuje ftaláty: DEHP FREE	Ne sadrži ftalate: DEHP FREE	Nem tartalmaz ftalátokat: DEHP MENTES	Nesatur ftalátus: BEZ DEHP	Nesatur ftalátus: BEZ DEHP	Nu conține ftalați: FĂRĂ DEHP	Ne sadrži ftalate: BEZ DEHP
	Температурни ограничения	Omezení teploty	Temperaturni raspon	Hőmérséklet-határértékek	Temperatūros apribojimas	Temperatūras ierobežojums	Limite de temperatură	Ograničenje temperature
	Ограничения на влажността	Omezení vlhkosti	Raspon vlažnosti zraka	Páratartalom-határértékek	Drėgnio apribojimas	Mitruma ierobežojumi	Limite de umiditate	Ograničenje vlažnosti vazduha
	Медицинско изделие	Zdravotnický prostředek	Medicinski proizvod	Orvostechnikai eszköz	Medicinos priemonė	Medicīniska ierīce	Dispozitiv medical	Medicinsko sredstvo
	Уникален идентификатор на изделията	Jedinečným identifikátorem prostředku	Jedinstvena identifikacija proizvoda	Egyedi eszközazonosító	Unikalusis priemonės identifikatorius	Ierīces unikālais identifikators	Identificatorul unic al dispozitivului medical	Jedinstveni identifikator uređaja

