



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**MEDICAL TROLLEY
CARRELLO CLINICO
CHARIOT CLINIQUE
CARRO DE ANESTESIA
CARRINHO CLÍNICO
KLINIKWAGEN
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
КЛИНИЧНА КОЛИЧКА
ZDRAVOTNICKÝ VOZÍK
KLINIKKAVAUNU
KLINIČKA KOLICA
KLINIKAI KEREEKES KOCSI
MEDICININIS VEŽIMĖLIS
MEDISCHE KAR
WÓZEK MEDYCZNY
CĂRUCIOR PENTRU
INSTRUMENTAR MEDICAL
CLINICAL TROLLEY**



MANUALE D'USO – USER MANUAL – MODE D'EMPLOI – MANUAL DE USO - MANUAL DO USUÁRIO - BENUTZERHANDBUCH - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ - INSTRUKCJA OBSŁUGI - MANUAL DE UTILIZARE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ANVÄNDARMANUAL - HANDLEIDING - KORISNIČKI PRIRUČNIK - HASZNÁLATI UTASÍTÁS - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА - ΟΗΓΕΚΙΡΙΑ - VARTOTOJO VADOVAS

Gima 45715

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Producent / Výrobce / Tillverkare / Fabrikant / Proizvođači / Gyártó / производител / Valmistaja / Gamintojas:
Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China
export@saikangmedical.com
Made in China

REF SKR-CT625-1


Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Geïmporteerd door / Uvezao / Importálja / Внесен от / Maahantuoja / Importavo / :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

1. Montáž koleček

Zarovnejte šroub kolečka s montážním otvorem na spodní straně vozíku a nasadte kolečko. Zasuňte šroub do montážního otvoru a utáhněte ho ve směru hodinových ručiček.

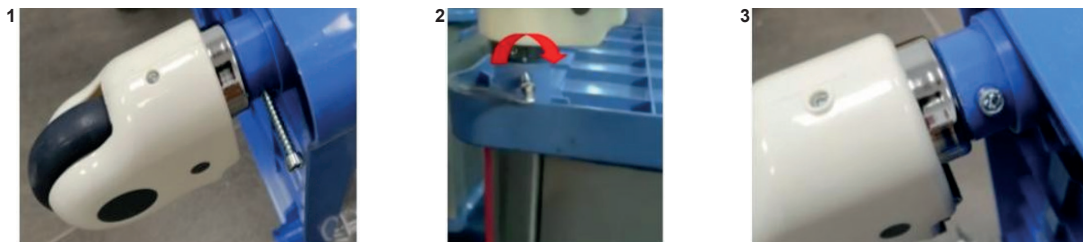

2. Způsob použití koleček

Zajištění kolečka: Po posunutí anesteziologického vozíku do požadované polohy stiskněte nohou tlačítko ON a poté, co uslyšíte „zacvaknutí“, zajištěte kolečko, jak je znázorněno na obrázku níže.

Odjištění koleček: Stiskněte nohou tlačítko OFF a odjistěte kolečko zároveň se „zacvaknutím“.



3. Vyloučení poruch

Časté poruchy	Pravděpodobné příčiny	Metody vyloučení
Nesnadné pohybování s vozíkem	1. Kolečko je zajištěno bez uvolnění brzdy 2. Kolečko je poškozeno	1. Uvolněte brzdu, viz 2.1 2. Vyměňte kolečko, viz 1.2

4. Údržba

1. Aby bylo možné anesteziologický vozík bezpečně používat, je nutné u něj provádět pravidelné bezpečnostní kontroly. Doporučujeme ho kontrolovat každých šest měsíců, aby se zajistilo, že spoje nejsou uvolněné a všechny činnosti probíhají normálně.
2. Když rám anesteziologického vozíku zestárne a dosáhne určité doby servisu, lze kovové části anesteziologického vozíku a plastové části rámu vozíku recyklovat.
3. Během používání se vyhněte poškrábání desky ostrými předměty nebo noži a často ji čistěte, aby byla čistá a suchá.
4. Pokud se deska znečistí, doporučujeme ji vyčistit. K čištění anesteziologického vozíku nepoužívejte alkalické nebo žíravé chemikálie, které mohou zkorodovat povrch z nerezové oceli.
5. Pravidelně kontrolujte kolečka, aby nedošlo k jejich nárazu nebo přetížení, které by mohlo způsobit jejich poškození.
6. Je zakázáno vynucovat brzdění koleček během brzdění, mohlo by dojít k poškození brzdového systému.
7. Opořebení povrchu kolečka lze zjistit vizuální kontrolou. Kolem kolečka se mohou namotat nitě a jiné nečistoty. Odstraňte šrouby a matice kolečka, očistěte nečistoty a zkontrolujte, zda není poškozeno ložisko kolečka. Pokud nejsou součásti poškozené, lze je znovu smontovat a použít.
8. Podle opotřebení a doby používání můžete posoudit, zda je třeba vyměnit kolečko, a v případě potřeby kolečka vyměnit a zkontrolovat, zda jsou osy a matice správně namontovány a spojeny. Pokud je to možné, použijte k tomuto účelu pojistné podložky nebo pojistné matice.
9. U koleček vybavených brzdami je nutné pravidelně kontrolovat, zda brzdy správně fungují. Brzdy kontrolujte jednou denně nebo před každým použitím. U anesteziologického vozíku vybaveného více brzdními kolečky lze najednou zajišťit pouze jedno brzdné kolečko, což vám umožní zatlačením vozíku zkusit a zkontrolovat, zda je brzdná funkce každého kolečka v pořádku. Pokud dojde k selhání funkce brzdy v důsledku opotřebení nebo poškození koleček, okamžitě kolečka vyměňte a poté znovu otestujte brzdový systém.
10. Pokud je poškozen mechanismus brzdového systému kolečka a je třeba brzdu opravit nebo vyměnit, obraťte se na naše oddělení poprodejněho servisu nebo na autorizovaného prodejce naší společnosti. Při každé výměně brzd je nutné znovu otestovat brzdovou účinnost koleček.

5. Balení, přeprava, skladování

1. Balení vozíku se provádí podle smlouvy nebo normy pro daný výrobek.
2. Při přepravě vozíku se vyhněte náhlým pohybům, silným vibracím a chraňte ho před slunečním zářením a deštěm.
3. Vozík by měl být skladován:
 - a) Teplota prostředí: +5 °C ~ +40 °C.
 - b) Relativní vlhkost: ≤ 85 %.
 - c) Atmosférický tlak: 70 kPa ~ 106 kPa.

6. Poprodejně servis

1. Uchovejte si prosím soubory dodané se zařízením a faktury za tento výrobek a předložte je společnosti při provádění záručního servisu a údržby výrobku.
2. Pokud se při používání vyskytne jakýkoli problém, kontaktujte včas naši společnost, aby vám mohla včas poskytnout přesnou a rychlou technickou podporu a servisní služby.
3. Od data prodeje, pokud se výrobek rozbije nebo poškodí v případě správné instalace a používání podle specifikace, bude na výrobek poskytována jednoletá bezplatná záruka a doživotní servisní služba po předložení „certifikátu“ nebo faktury.
4. Pokud je výrobek od data zakoupení skutečně poškozený nebo nefunguje správně z důvodu kvalitativních problémů, společnost poskytne uživateli bezplatnou opravu výrobku.

Doživotní servis od výrobce: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD