



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## STANDARD EINWEGKITTEL SMMS

### DEUTSCH

**Produktname** Standard Einwegkittel SMMS

**Produktcode** FGS-SG-SM50-L, FGS-SG-SM50-XL, FGS-SG-SM50-XXL

**Produktgröße** Maßeinheit: cm

GIMA-CODE	21046	21047	21048	21049
FULL GUARD-CODE	FGS-SG-SM50-M	FGS-SG-SM50-L	FGS-SG-SM50-XL	FGS-SG-SM50-XXL
Größen	120x140 (M)	120x150 (L)	130x150 (XL)	140x160 (XXL)
Länge (Von der Schulter bis zum Saum)	120	120	130	140
Breite (Monolage)	140	150	150	160
Gürtellänge	65	65	65	69
Ärmellänge	58	59	59	61
Abweichung	±2	±2	±2	±2

**Produktmodell** Kitteltyp. M/L/XL/XXL

**Textur und Zusammensetzung** Das Produkt verwendet 50g SMMS Vliesstoff. Es besteht aus einer Vorderseite, Rückseite, Ärmel, Band und Bündchen. Die Verarbeitungstechnik beinhaltet Schneiden, Ultraschallschweißen, Bänder, Trikot, Bündchen, Falten, Verschweißen.

**Bestimmungsgemäße Verwendung** Diese Artikel sind mit der EO-Methode sterilisiert und schützen vor dem Durchdringen von Flüssigkeiten und die Übertragung von Keimen zwischen Patient und OP-Saal, anderen chirurgischen Geräten und dem OP-Personal.

**Gegenanzeigen** Die Produkte können nur einmal und sollten sofort nach dem Öffnen der Verpackung verwendet werden. Die Verpackung ist beschädigt ist oder das Produkt ist feucht oder verschimmelt. Das Produkt darf in diesem Fall nicht verwendet werden.

**Verwendung** Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie den Produkt heraus. Schütteln Sie den Kittel leicht, heben Sie die Seiten des Kragens an, fahren Sie mit den Händen in die Ärmel, strecken Sie die Arme nach vorne und binden Sie die Bänder zu.

**Lagerung** Sie sollte in einem sauberen Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80 %, ohne korrosive Gase, an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort gelagert werden.

### **Warnung**

1. Das Produkt ist ein Einwegprodukt, verwenden Sie es nicht wieder.
2. Das Produkt ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt, teilen Sie es niemals mit jemand anderem.
3. Es ist verboten, das Produkt zu gebrauchen, wenn die Verpackung oder das Produkt beschädigt sind.

**Hinweis Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Anwender oder Patient ansässig ist.**

















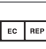



**Gültigkeit** 3 Jahre.

**Produktionsdatum** Siehe Datum auf der Verpackung

**Ablaufdatum** Siehe Datum auf der Verpackung

### GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

	Erzeugniscode		Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern		An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	Chargennummer		Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745		Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen
	Hersteller		Herstellungsdatum		Medizinprodukt
	Sterilisiert mit Ethylenoxid		Ablaufdatum		Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist
	Feuchtigkeitsgrenzwert		Gebrauchsanweisung beachten		Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden
	Temperaturgrenzwert		Autorisierter Vertreter in der EG		Zerbrechlich - Vorsichtig behandeln
	Diese Seite (nach) oben!		Unique Device Identifier (Eindeutige Kennung des Geräts)		

M21046-M-Rev.5-04.25

**GIMA 21046**  
**GIMA 21047**  
**GIMA 21048**  
**GIMA 21049**



Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd  
Yongan East Road Wenquan Economic  
Development Zone, Xianning City, Hubei  
Province, China  
Made in China



**FGS-SG-SM50-M**  
**FGS-SG-SM50-L**  
**FGS-SG-SM50-XL**  
**FGS-SG-SM50-XXL**



**ZOUSTECH S.L.**  
Pso. Castellana, 141 - Planta 19,  
28046 - Madrid, Spain

Eingeführt von / Importado por:

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



**STERILE EO**

**MD**



**0123**