

BIOPSY PUNCH




(DE) Packungsbeilage vor der Anwendung sorgfältig lesen.




(DE) Steril. Nur zum einmaligen Gebrauch.
Sind bei einem Patienten mehrere Biopsien oder die Entnahme mehrerer Proben notwendig, muss jeweils eine neue Biopsie Stanze verwendet werden.
→ Wegen Infektionsgefahr nicht erneut sterilisieren und nicht wiederverwenden.
→ Verwenden Sie die Biopsie Stanze nicht, wenn die Sterilverpackung beschädigt ist.

(DE) Verfügbare Größen: 2; 3; 3.5; 4; 5; 6 & 8 mm


1.
(DE) Die Stanzbiopsie ist ein standardisiertes Verfahren zur Gewinnung von Hautbiopsien.

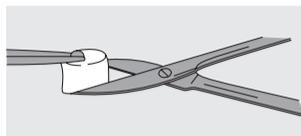


c.
(DE) Die Hautprobe mit einer kleinen anatomischen Pinzette sanft fassen und herausziehen, ohne zu quetschen. Wenn nötig mit einer Schere oder einem Skalpell von der Basis trennen.

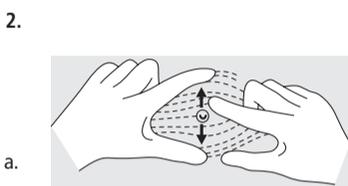

a.
(DE) Haut dehnen, um die Hautspannungslinien zu entspannen.

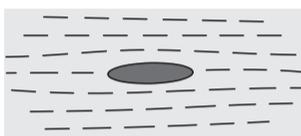

d.
(DE) Wunden ≤ 4 mm vorsichtig zusammendrücken oder mit einem Hydrocolloid-Pflaster verschließen. Wunden ≥ 4 mm mit Naht, Clips oder adhesiven Streifen klinisch angemessen verschließen.

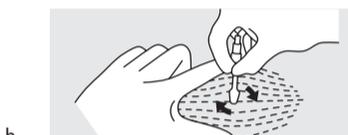

(DE) Die Biopsie Stanze zwischen Daumen und Zeigefinger halten. An der Hautoberfläche ansetzen und mit mäßigem Druck und im Uhrzeigersinn drehender Bewegung hinunterdrücken.

3.



(DE) Sterilisiert mit Ethylenoxid durch:
sfm medical devices GmbH, Brückenstrasse 5, D-63607 Wächtersbach.



GSK Consumer Healthcare (GMDT)
Clocherane, Youghal Road,
Dungarvan,
Co. Waterford,
Ireland



4.
(DE) Siehe Packung oder Karton für:



5.
(DE) GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG,
80700 München, GERMANY.