



PROFESSIONELLES STADIOMETER FÜR SÄUGLINGE MOD. WH80



Vor der Verwendung des Instruments das vorliegende Handbuch aufmerksam lesen

INHALTSVERZEICHNIS

1. TECHNISCHE DATEN UND VERWENDUNG	2
2. MONTAGE der GRÖSSEN- UND GEWICHTSWAAGE BABYTWO	2
3. MESSUNGEN.....	3



ACHTUNG!

Die Bediener müssen das vorliegende Handbuch aufmerksam lesen, die darin enthaltenen Anweisungen befolgen und sich mit den korrekten Vorgehensweisen für den Gebrauch und die Wartung des Instruments vertraut machen.

- Das vorliegende Handbuch zum Nachschlagen und zur Unterstützung während der Schulung des Personals aufbewahren.
- Für eine bessere Funktionsweise und eine verlängerte Lebensdauer in regelmäßigen Abständen eine sorgfältige Generalreinigung durchführen.
- Die Reinigung des Geräts muss mithilfe eines weichen, mit Wasser oder mit einem Neutralreiniger befeuchteten Tuches erfolgen, wobei die Verwendung von Lösungsmitteln oder scheuernden Substanzen zu vermeiden ist.
- Falls das Instrument längere Zeit nicht benutzt werden sollte, die Batterien aus dem Gerät heraus nehmen.
- Während des Transports darauf achten, das Gerät keinen Stößen oder übermäßigen mechanischen Schwingungen auszusetzen.
- Im Fall einer Reparatur oder eines Service wenden Sie sich an Ihren Händler oder an ein autorisiertes Kundendienstzentrum, indem Sie folgende Adressen kontaktieren: **service2@wunder.it** oder **sales@wunder.it**

1. TECHNISCHE DATEN UND VERWENDUNG

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


MESSBEREICH	35~80cm
ZIFFERNSCHRITT	1mm
MASSEINHEIT	W87 x L30 x H7cm
GEWICHT	700g
BETRIEBSTEMPERATUR	10°C~40°C

2. MONTAGE DER GRÖSSEN- UND GEWICHTSWAAGE BABYTWO


Gehen Sie zur Installation des Stadiometers zum Messen der Körpergröße wie folgt vor:

A) Befestigen Sie die Halterung des Stadiometers mit den 2 mitgelieferten Kreuzschrauben an der Wiegefläche (Abb. a)	Fig.A	
B) Setzen Sie das Stadiometer auf die Halterung, die zuvor an der Wiegefläche befestigt wurde (Abb.b)	Fig.B	
C) Die Installation ist nun abgeschlossen (Abb.c)	Fig.C	

3. MESSUNGEN

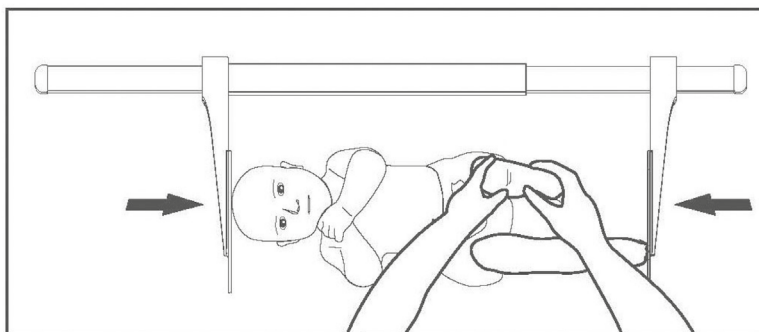

1. Legen Sie den Kopf des Kindes leicht auf den Schieber links
2. Die Füße des Kindes strecken

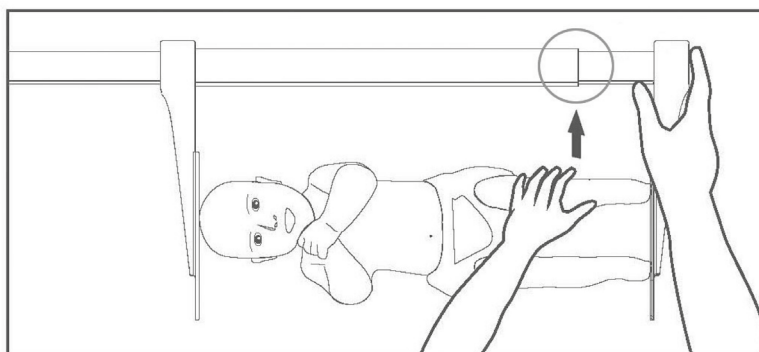

3. Bewegen Sie den rechten Schieber, bis er die Füße des Kindes berührt
4. Die Größe des Kindes wird an der roten Linie des Stadiometers abgelesen



Wunder Sa.Bi. S.r.l.
Via Vecchia per Monza, 20
20056 Trezzo sull'Adda (MI)
Tel. +39 02 90964566
www.wunder.it