

LACCIO EMOSTATICO JETPULL

JETPULL TOURNIQUET

GARROT JETPULL

TORNIQUETE JETPULL

VENENSTAUER JETPULL

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

GIMA 25722 - 25723 - 25724



HOLTSCHE Medizinprodukte GmbH

In den Faltern 13
65232 Taunusstein
Made in Germany




25722 - 25723 - 25724




Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com




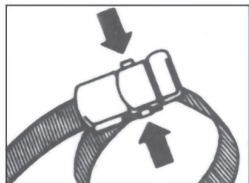


- IT** Aprire
- GB** Open
- FR** Ouvrir
- ES** Abrir
- DE** Öffnen

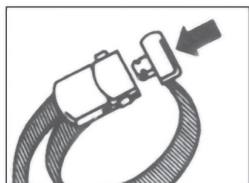

- IT** Chiudere
- GB** Close
- FR** Fermer
- ES** Cerrar
- DE** Anlegen

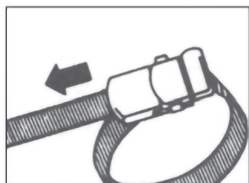

- IT** Stringere
- GB** Tighten
- FR** Tirer
- ES** Apretar
- DE** Festziehen

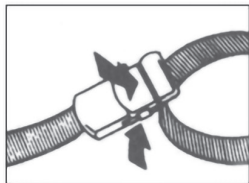

- IT** Rilasciare lentamente
- GB** Slow release
- FR** Desserrer légèrement
- ES** Lenta liberación
- DE** Langsam lösen/

DEUTSCH

Der Venenstauer hat einen speziellen 2-Schritt-Sicherheitsverschluss:









1. Lösen der Spannung des Bandes durch das Herunterdrücken der geriffelten Taste.
2. Zusammendrücken der beiden seitlich gegenüberliegenden Druckknöpfe.

Der Verschluss öffnet automatisch.

Unsere Venenstauer sind bei 90°C waschbar oder mit geeigneten nicht alkoholischen Desinfektionslösungen zu behandeln.

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

	<p>IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit ES Código producto DE Erzeugniscode</p>
	<p>IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot ES Número de lote DE Chargennummer</p>
	<p>IT Fabbricante GB Manufacturer FR Fabricant ES Fabricante DE Hersteller</p>
	<p>IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación DE Herstellungsdatum</p>
	<p>IT Distributore GB Distributor FR Distributeur ES Distribuidor DE Verteiler</p>
	<p>IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745 DE Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745</p>
	<p>IT Dispositivo medico GB Medical Device FR Dispositif médical ES Producto sanitario DE Medizinprodukt</p>
	<p>IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso DE Gebrauchsanweisung beachten</p>