



Temperature Bracelet Instructions

体温スマートウォッチ説明書


Manual de instrucciones de la pulsera de salud y actividad física

VORBEREITUNG VOR DEM GEBRACH

Starten Sie das Gerät erst, wenn der Strom ausreichend ist. Da das Gerät über den USB-Kontaktanschluss aufgeladen wird, schließen Sie bitte das Armband an den USB-Anschluss, wie z.B. den USB-Anschluss des Ladegerät oder des Notebooks, an.



Ziehen Sie zuerst das Handgelenkband heraus und nehmen Sie das Hauptgerät des Armbands heraus.

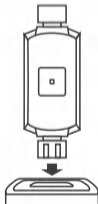


Zum Laden ein USB-Ladegerät anschließen

Bei der ersten Verwendung nehmen Sie bitte das Armband heraus und laden Sie das Gerät mit dem entsprechenden Ladegerät auf. Beim Aufladen schaltet sich das Armband automatisch ein (Ladeverfahren ist in der folgenden Abbildung dargestellt: Nehmen Sie das Hauptgerät des Armbandes vom Handgelenkband ab und schließen Sie den Ladeanschluss zum Aufladen an die Standard-USB-Schnittstelle an.)

TRAGEFORMEN

1. Das Armband wird am besten hinter dem Processus styloideus der Elle getragen.
2. Passen Sie die Größe des Handgelenks entsprechend der Einstellungsbohrung an; Schnallen Sie das Armband an.
3. Der Sensor sollte nahe an der Haut sein, um Bewegungen zu vermeiden.

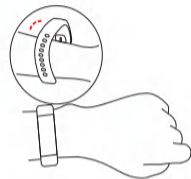

EIN-/AUSSCHALTUNG

1. Im Abschaltzustand die Funktionstaste länger als 3 Sekunden drücken, und das Gerät starten mit Vibrationen.
2. Wenn der Armband eingeschaltet ist, wechseln Sie auf die Benutzeroberfläche zum Ausschalten und halten Sie die Funktionstaste länger als 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

APP-DOWNLOADS FÜR MOBILTELEFONE

Scannen Sie den QR-Code unten oder laden "DayBand" Sie herunter und installieren sie.



Google Play




iOS

Ausrüstung: IOS 8.0 und darüber, Android 4.4 und darüber

VERBINDUNG DES GERÄTS

Zum ersten Mal muss das Armband zur Kalibrierung an APP verbunden werden. Nach erfolgreicher Verbindung synchronisiert das Armband automatisch die Zeit. Andernfalls sind die Schrittzählung und die Schlafdaten ungenau.

- Mobile APP öffnen
- Auf das Icon Einstellungen klicken.
- ↓
- Mein Gerät (iOS) / Suche nach Geräten (Android)
- ↓
- Nach unten ziehen, um das Gerät zu scannen
- ↓
- Auf die Geräteverbindung klicken

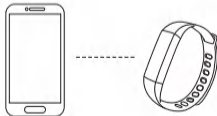

Bluetooth-Verbindung: Nach erfolgreicher Paarung speichert APP automatisch die Bluetooth-Adresse des Armbandes. Wenn APP geöffnet wird oder im Hintergrund läuft, sucht es automatisch nach dem Armband und verbindet es.

Datensynchronisation: manuelles Herunterziehen auf der APP-Homepage zur Datensynchronisation; das Armband kann Offline-Daten für 7 Tage speichern. Je mehr Daten, desto länger die Synchronisationszeit, bis zu etwa 2 Minuten. Nach der Synchronisation wird die Aufforderung "Synchronisation erledigt" angezeigt.

APP FUNKTIONEN UND EINSTELLUNGEN

Personal information and exercise goals

Persönliche Daten und Sportziele

Bitte geben Sie Ihre persönlichen Daten erst nach dem Öffnen des APP an.


Einstellung → Persönliche Einstellungen

Einstellbares Avatare-Geschlecht-Alter-Größe-Gewicht

Persönliche Informationen können die Genauigkeit von Daten verbessern.

Passen Sie persönliche tägliche Sportziele und vernünftige Sportarten an

Planung hilft, die körperliche Fitness zu verbessern.

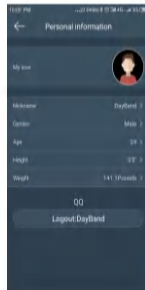

FUNKTIONEN DES ARMBANDS

Hauptschnittstelle

Wenn kein Verbindungssymbol angezeigt wird, ist das Armband nicht mit dem Mobiltelefon verbunden, und wenn das Verbindungssymbol angezeigt wird, ist die Verbindung erfolgreich. Wenn das Armband und die APP zum ersten Mal verbunden werden, synchronisiert das Armband die Uhrzeit, das Datum und die Wochenzahl des Mobiltelefons.

Oberfläche von Körpertemperatur

Bitte warten Sie in der Benutzeroberfläche zur Temperaturüberwachung, bis die Daten nach etwa zehn Sekunden erscheinen.

wenn sie bei der Messung der Körpertemperatur länger als 1 Minute kontinuierlich getragen wird.

Oberfläche von Sportdaten

Der Standard-Sportdatenmodus des Armbandes ist der Schrittzählmodus. Das Armband wird am Handgelenk getragen. Wenn der Benutzer geht und seinen Arm schwingt, wird das Armband als Schrittdaten, Kalorienverbrauch und Gehstrecke entsprechend der Anzahl der Schwünge aufgezeichnet.

Oberfläche von Herzfrequenz

Bitte warten Sie in der Benutzeroberfläche zur Herzfrequenzüberwachung, bis die Daten nach etwa zehn Sekunden erscheinen.

Oberfläche von Blutdruck

Bitte warten Sie in der Benutzeroberfläche zur Blutdrucküberwachung, bis die Daten nach etwa zehn Sekunden erscheinen.

Oberfläche von Sauerstoffsättigung

Bitte warten Sie in der Benutzeroberfläche zur Sauerstoffsättigungüberwachung, bis die Daten nach etwa zehn Sekunden erscheinen.

- Während des Tests blinkt das Icon und die Herzfrequenz-LED-Lampe auf der Rückseite des Armbandes leuchtet auf.
- Während des Tests sollte der Sensor fest an der Haut angebracht werden, um zu vermeiden, dass Außenlicht die Genauigkeit des Tests beeinträchtigt.
- Halten Sie den Testbereich sauber, Schweiß oder Flecken beeinträchtigen die Testergebnisse.

Sportoberfläche

Drücken Sie in der Sportoberfläche drei Sekunden lang, um die spezifische Sportoberfläche aufzurufen, die mehrere Sportarten umfasst. Klicken Sie zum Wechseln. In der Sportoberfläche drücken Sie drei Sekunden lang, um den Sport zu starten, drücken Sie drei Sekunden lang, um zu pausieren, und klicken Sie, um den Sportmodus zu wechseln.

Informationsoberfläche

Drücken Sie in der Informationsoberfläche drei Sekunden lang, um die Nachricht anzuzeigen, klicken Sie nach dem Anzeigen der Informationen zum Verlassen der Seite, oder drücken Sie drei Sekunden lang, um sie zu verlassen.

Oberfläche von weitere Funktionen

In Oberfläche von weitere Funktionen drücken Sie drei Sekunden lang, um die untere Menüoberfläche für weitere Funktion aufzurufen.

Oberfläche von Handysuche

Klicken Sie im verbundenen Zustand auf die Option " Handy suchen ", und das Handy vibriert oder klingelt.

Oberfläche zur Wiederherstellung von Einstellungen

Drücken Sie drei Sekunden lang in der Oberfläche zur Wiederherstellung, und das Armband nimmt seine Werkseinstellungen wieder auf.

Über

In der Oberfläche Über werden die letzten vier Ziffern der Bluetooth-Adresse und die Software-Versionsnummer angezeigt.

Oberfläche zum Ausschalten

Drücken Sie in der Oberfläche zum Ausschalten für mehr als drei Sekunden, um das

ERINNERUNGSFUNKTION

Die Erinnerungsfunktion muss den Erinnerungsschalter im Einstellzentrum von APP einschalten und Mobiltelefon und Armband erfolgreich über Bluetooth verbunden halten. Das Gerät vibriert zur Erinnerung, wenn eine Nachricht kommt.



Anruf-Erinnerung: Beim Anruf vibriert das Armband und zeigt den Namen oder die Nummer des eingehenden Anrufs an. (Wenn der Name des Anrufers bereits im Telefonbuch gespeichert ist, wird der Name angezeigt, andernfalls wird die Nummer angezeigt.)

SMS-Erinnerung: Beim Empfang einer SMS vibriert das Armband und ein SMS-Symbol wird angezeigt, um Sie daran zu erinnern: für die SMS der Kontaktperson im Telefonbuch den Namen anzeigt, für die SMS des Fremden die Nummer anzeigt.

Intelligenter Wecker: Es können drei Wecker eingestellt werden. Nach dem Einstellen wird der Wecker mit dem Armband synchronisiert. Der intelligente Wecker ist eine Art stiller Wecker. Wenn der Wecker ertönt, löst das Armband eine mäßige Vibration aus, und unterstützt die Offline-Wecker-Erinnerung.

Sesshafte Erinnerung: Das Standard-Erinnerungsintervall beträgt eine Stunde. Wenn der Benutzer im eingeschalteten Zustand nicht innerhalb einer Stunde nach der Aktivierung trainiert, vibriert das Armband, um den Benutzer an das Training zu erinnern.

PARAMETER DES ARMBANDS

Bildschirmgröße	0.96Zoll	Bluetooth	Bluetooth4.0
Batterietyp	Lithium-Polymer-Batterie	Schutzart	Ip67
Ladezeit	1.5-2 Stunden	Batteriekapazität	90mAh
Armbandgröße	245mm*16mm*11.5mm	Verpackung	Armband + Handbuch

HINWEISE

- Bitte vermeiden Sie das Armband vor starken Stößen, extremer Hitze und Sonneneinstrahlung.
- Zerlegen, reparieren oder Demontage Sie dieses Produkt nicht selbst.
- Die Betriebsumgebung dieser Geräte beträgt 0 ~ 45 Grad. Es ist verboten, es ins Feuer zu werfen, um eine Explosion zu vermeiden.
- Bitte wischen Sie das Armband vor dem Aufladen mit einem weichen Tuch ab, da es sonst den Aufladepunkt korrodiert und zu einem Ladefehler führt.
- Das Gerät darf nicht mit Chemikalien wie Benzin, Reinigungsmitteln, Propanol, Alkohol oder Insektenschutzmitteln in Berührung kommen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Hochspannung und stark magnetischer Umgebung.
- Wenn Ihre Haut empfindlich ist oder Ihr Armband zu eng getragen wird, können Sie sich unangenehm fühlen.
- Bitte wischen Sie die Schweißtropfen auf Ihrem Handgelenk rechtzeitig ab. Wenn das Armband längere Zeit mit Seife, Schweiß, Allergenen oder kontaminierten Inhaltsstoffen in Kontakt kommt, kann es zu Hautallergien und Juckreiz kommen.
- Bei häufigem Gebrauch wird empfohlen, das Armband jede Woche zu reinigen. Wischen Sie mit einem feuchten Tuch ab und reinigen Sie Ölflecken oder Staub mit milder Seife.
- Tragen Sie kein Armband beim Baden.
- Bitte wischen Sie das Armband nach dem Schwimmen rechtzeitig ab, um es trocken zu halten.