



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA VETERINARIA - MEDIA
DIGITAL VET SCALE - MEDIUM
BALANCE VÉTÉRINAIRE DIGITALE - MOYENNE
BÁSCULA VETERINARIA - MEDIA
ESCALA VETERINÁRIA - MÉDIA
VETERINÄRSKALA – DURCHSCHNITT
ΒΕΤΕΡΙΝΑΡΕΗ ΚΑΙΤΑΡ - ΣΡΕΔΕΗ
VETERINÁRNÍ MĚŘÍTKO - PRŮMĚR
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ELÄINLÄÄKINVÄLINEN ASAKA - KESKIMÄÄRIN
ÁLLATORVOSI MÉRLEG - ÁTLAGOS
SKALA WETERYNARYJNA - ŚREDNIA
SCALA VETERINARĂ – MEDIE
VETERINÁRNA STUPEŇ - PRIEMER

REF 6680 (Gima 27258) - 6681 (Gima 27259)

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/ Hersteller/ производител/
Výrobce/ Κατασκευαστής/ Valmistaja/ Gyártó/ Producent/ Producător

Výrobca:

Momert Zrt.

2400 Dunaújváros - HUNGARY, Papírgyári út 12-14

Made in Hungary


Distribuito da/Distributed by/Distribué par/Distruido por/ Vertrieben von/ Разпространява се от/
Distribuovaný/Διανέμονται από/ Jakelija/Forgalmazza/ Dystrybuowane przez/ Distribuit de/ Distribuovaný

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

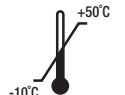

Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Vergewissern Sie sich, dass auch andere Personen, die das Produkt benutzen, mit dieser Anleitung vertraut sind.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

- Achten Sie beim Einsetzen und Auswechseln der Batterie auf die gekennzeichnete Polarität der Batterie.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Gebrauch ist.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung angegebenen Verwendungszweck.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf einer stabilen, horizontalen Fläche.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung, Montage oder Demontage der Abdeckung aus und entfernen Sie die Batterie!
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine scheuernden oder chemisch aggressiven Substanzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen, beschädigt oder mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur in ein autorisiertes Servicezentrum.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch geeignet. Es ist nicht für den gewerblichen Betrieb ausgelegt.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen usw. fern. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder Feuchtigkeit aus.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Das Produkt ist ein zerbrechliches Messgerät. Verhindern Sie, dass es zerbricht oder herunterfällt.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum.

DIE NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS KANN ZUR VERWEIGERUNG DER GARANTIEREPARATUR FÜHREN!

SPEZIFIKATION:

- Präzisionsmesssystem
- Automatische Nullrückstellung
- Automatische Abschaltung
- Anzeige bei niedriger Leistung
- Überlastanzeige

TECHNISCHE PARAMETER

Spannung: 1Stück 3V, CR2032 Lithium-Batterie (enthalten)
 Max. messbares Gewicht: 3-100 kg
 Wiege-Schritte: 100g
 Display-Größe: LCD- Durchmesser = 8,0 cm, 3,15 Zoll
 Plattform: 6680 (GIMA 27258): 635x355 mm; 6681 (GIMA 27259): 830x620 mm
 Wägeeinheiten: kg, lb, st
 Arbeits-/Lagertemperatur: 10-40°C/-10-50°C

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bevor Sie die Waage zum ersten Mal benutzen, entfernen Sie bitte die Isolierlasche von der Batterie auf der Rückseite der Waage. Stellen Sie die Waage auf eine flache, harte und ebene Oberfläche. Auf einer weichen Oberfläche (z. B. auf einem Teppich) kann die Waage ungenaue Werte anzeigen. Um die Waage zu starten, tippen Sie mit dem Fuß auf die Mitte der Plattform. Zum ersten Mal zeigt das Display eine laufende "8" an, danach erscheint "0,0" auf dem Display. Warten Sie, bis "0,0" angezeigt wird! Stellen Sie Ihr Haustier auf die Waage. Dann erscheint das Gewicht Ihres Tieres auf dem Display und blinkt zwei Mal. Das gemessene Gewicht ist etwa 10 Sekunden lang zu sehen. Wenn nach dem Einschalten der Waage kein Wiegevorgang erfolgt, schaltet sich die Waage nach 60 Sekunden automatisch aus.

BATTERIEWECHSEL

Die Batterie muss ausgetauscht werden, wenn auf dem Display Folgendes angezeigt wird:



Öffnen Sie die Batteriehalterung auf der Rückseite der Waage und nehmen Sie die Batterie vorsichtig heraus, indem Sie die schwarze Kunststoffhalterung zurückziehen. Die Befestigungslasche befindet sich an der Oberseite der Batterie. Knicken Sie die Metalllasche nicht ab. Tauschen Sie die Batterie gegen eine neue Batterie aus. Entsorgen Sie die leere Batterie an einem geeigneten Ort.

BATTERIEN SIND NICHT IN DER GARANTIE ENTHALTEN!

ÜBERLASTUNGSWARNUNG

Wenn die Waage überlastet ist, wird Folgendes angezeigt:



REINIGUNG UND PFLEGE

Die Oberfläche des Geräts darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder harten Gegenstände, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können! Reinigen Sie das Gerät niemals unter fließendem Wasser, spülen Sie es nicht ab und tauchen Sie es nicht in Wasser ein!

REPARATUR UND WARTUNG

Jede umfassende Wartung oder Reparatur, die den Zugang zu den inneren Teilen des Geräts erfordert, muss von einem fachkundigen Servicecenter durchgeführt werden.

UMWELTSCHUTZ

- Verpackungsmaterial und Altgeräte sind zu recyceln.
- Die Transportverpackung kann als sortierter Abfall entsorgt werden.
- Polyethylenbeutel sind dem Recycling zuzuführen.



Entsorgung: Das Produkt darf nicht gemeinsam mit anderem Hausmüll entsorgt werden. Die Benutzer müssen dieses Gerät entsorgen, indem sie es zu einer speziellen Recyclingstelle für Elektro- und Elektronikgeräte bringen.

GIMA GARANTIEBEDINGUNGEN

Für das Produkt gilt die 12-monatige Standardgarantie B2B von Gima.