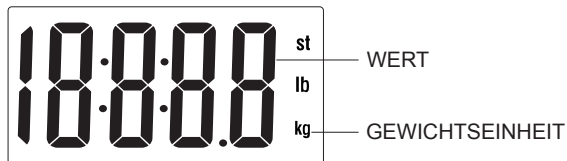


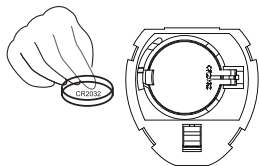
**BILANCIA IN PLASTICA ULTRASOTTILE
ULTRA SLIM PLASTIC BODY SCALE
BALANCE EN PLASTIQUE ULTRA MINCE
ULTRADÜNNE PERSONENWAAGE
BÁSCULA DE PLÁSTICO ULTRA FINA
BALANÇA DE PLÁSTICO SUPER FINA
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΗ
WAGA PLASTIKOWA ULTRACIENKA**

ميزان من البلاستيك رقيق جدا

**MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI I KONSERWACJI
دليل الإستعمال والرعاية****ATTENZIONE:** Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.**ATTENTION:** The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.**AVIS:** Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.**ACHTUNG:** Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden haben, bevor sie das Produkt benutzen.**ATENCIÓN:** Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.**ATENÇÃO:** Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.**UWAGA:** przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu operatorzy muszą przeczytać podręcznik i upewnić się, iż wszystko to, co jest w nim napisane jest dla nich jasne i zrozumiałe**الحذر:** على العمال قراءة وفهم هذا الدليل بكامله قبل البدء باستعمال المنتج.**REF** 27262Teme l'umidità
Keep away from humidityConservare al riparo della luce solare diretta
Protect against direct sunlightFabbricante
ManufacturerGima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Made in P.R.C.

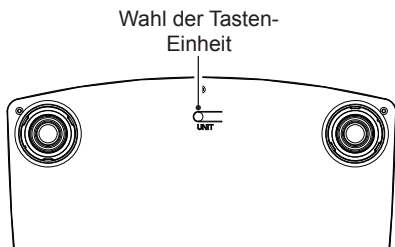
DISPLAY LCD FULL**EIGENSCHAFTEN & BESCHREIBUNG**

- Auto ON
- LCD Extra Large 74x38mm
- Gewichtseinheiten: kg, lb, st:lb
- Tragfähigkeit: 150kg/330lb/23st:8lb
- Skala: 0.1kg/0.2lb/0.2lb(1lb, ≥ 20 st)
- Überlastungsmeldung: “ — — — — ”
- Meldung Batterie leer “Lo”
- Batterie: 1 x CR2032

BATTERIEAUSWECHSLUNG

- Sicherstellen, dass die Batteriepole +/- korrekt sind.
- Um die Entnahme der Batterie aus dem Fach zu erleichtern, soll ein geeignetes Werkzeug benutzt werden.

Vor dem Gebrauch den Isolierstreifen entfernen.

FUNKTIONSTASTEN**GEBRAUCHSANWEISUNG**

- 1) Das Gerät durch Andrücken der Taste **UNIT** einschalten und die Einheit wählen.
- 2) Die Waage auf einer festen und flachen Fläche stellen und abwarten, dass sie automatisch ausgeht.
- 3) Dann direkt auf die Waage steigen. Das Display blinkt, bis das Gewicht hergestellt wird. Nach 10 Sekunden geht sie automatisch aus.
- 4) Wenn sie nicht mehr benutzt wird, schaltet sie sich automatisch aus.
- 5) Wird sie nicht benutzt muss sie horizontal abgestellt werden und es dürfen keine Gegenstände darauf gestellt werden.

**Hinweise:**

- Die Waage nicht auf einen Teppich benutzen
- Um ein genaues Gewicht zu gewährleisten, wenn sie sie zum Wiegen verschieben, empfehlen wir sie einzuschalten (bzw. zu berühren) und abwarten, bis sie ausgeht. Dann können Sie sich auf die Waage stellen und Ihr Gewicht messen. Andernfalls könnte ein höheres Gewicht ermittelt werden.



Entsorgung: Das Produkt darf nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer muss sich um die Entsorgung der zu vernichtenden Geräte kümmern, indem er sie zu einem gekennzeichneten Recyclinghof von elektrischen und elektronischen Geräten bringt. Für weitere Informationen bezüglich der Sammelpunkte, bitten wir Sie, Ihre zuständige Gemeinde, oder den lokalen Müllentsorgungsservice oder das Fachgeschäft, bei dem Sie das Gerät erworben haben zu kontaktieren. Bei falscher Entsorgung könnten Strafen, in Bezug auf die gültigen Landesgesetze erhoben werden.

GARANTIEBEDINGUNGEN GIMA

Wir beglückwünschen Sie zu dem Erwerb unseres Produktes. Dieses Produkt entspricht dem höchsten qualitativen Standard sowohl bezüglich des Materials als auch der Verarbeitung. Die Garantiezeit beträgt 12 Monate ab der Lieferung durch die GIMA. Während dem Gültigkeitszeitraum der Garantie wird kostenlos für den Ersatz bzw. die Reparatur aller defekten Teile aufgrund von geprüften Herstellungsfehlern gesorgt. Ausgenommen sind Arbeitskosten oder eventuelle Transport oder Verpackungskosten. Ausgeschlossen von der Garantie sind alle dem Verschleiß unterliegenden Teile. Die Reparatur bzw. der Ersatz hat keinerlei Auswirkung auf eine Verlängerung der Garantiezeit. Die Garantie ist nicht gültig im Falle von: Reparaturen, die durch nicht befugtes Personal ausgeführt wurden oder ohne Originalersatzteile, Schäden, die durch Nachlässigkeit, Stöße oder nicht zulässigen Gebrauch hervorgerufen werden.

GIMA übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen von elektronischen Geräten oder Software, die durch äußere Einwirkungen wie Temperaturschwankungen, elektromagnetische Felder, Radiointerferenzen usw. auftreten können. Die Garantie verfällt, wenn das oben genannte nicht beachtet wird, bzw. wenn die Matrikelnummer entfernt oder verändert wurde.

Die als schadhaft angesehenen Produkte dürfen ausschließlich dem Vertragshändler übergeben werden, bei dem sie erworben wurden. Speditionen direkt an die Firma GIMA werden abgelehnt.