



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CARRELLO TRIS

TRIS TROLLEY

CHARIOT TRIS

WAGEN TRIS

CARRO TRIS

CARRINHO TRIS

REF 27438



Distribuito da / distributed by / distribué par / distribuido por / vertrieben von /
distribuido por:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in Italy

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fa-
bricante / Hersteller:

SCROSATI ARREDAMENTI METALLICI SRL

Via Vittorio Veneto 95, 21015 Lonate Pozzolo (VA)
scrosati@scrosati.com

ACHTUNG! Vor Gebrauch des Produktes müssen die Bediener die Betriebsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben.

EINLEITUNG

Vor dem Gebrauch muss das vorliegende Handbuch sorgfältig gelesen werden.

BESCHREIBUNG

Der Wagen New Tris ist ein praktischer Wagen mit drei Einlegeböden aus lackiertem Blech, 4 Nylonrädern und zwei praktischen Seitengriffen zum Tragen und / oder Transportieren kleiner medizinischer Geräte.

KOMPONENTEN:

- Nr. 3 Einlegeböden aus Blech 15/10
- Nr. 2 Strukturen aus ovalen Rohrteilen 40 x 20 x 1,5
- Nr. 2 Griffe (bereits am ersten Einlegeboden befestigt)
- Nr. 4 Räder Ø 50 mm

Tüte mit Montagematerial

- Nr. 12 Knopfkopfschrauben mit Innensechskant 8 x 16 + Unterlegscheiben



- Nr. 4 Stifte, die in den Rädern eingesetzt sind




- Nr. 2 Inbusschlüssel mit 5 mm




MONTAGEANWEISUNGEN:

Die Montage beginnen, indem alle Teile auf einer horizontalen und stabilen Arbeitsfläche ausgebreitet werden.

1. Eine Struktur in die Hand nehmen und beim ersten Einlegeboden beginnen. Danach die anderen Einlegeböden immer von der gleichen Seite montieren.

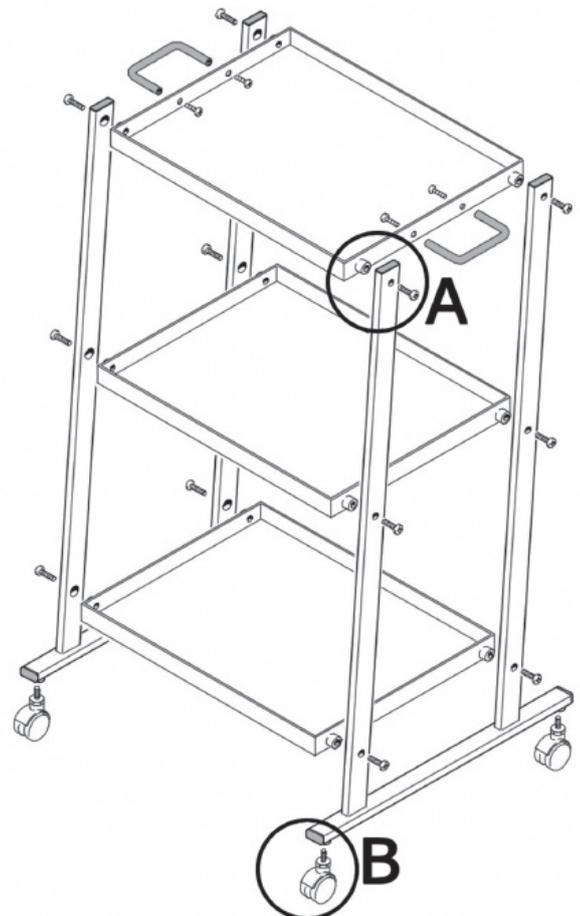


DETAIL A

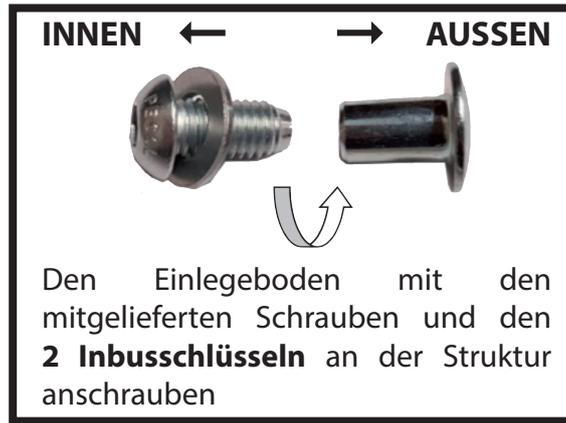

2. Sobald die drei Einlegeböden auf derselben Seite befestigt sind, mit der anderen Seite fortfahren.
3. Sobald die Einlegeböden eingebaut sind, den Wagen umdrehen, indem der erste Einlegeboden und die schwarzen Gummis auf die Arbeitsfläche gelegt werden, und die Räder befestigen.
4. Die Stifte in den Rahmen schrauben und die Räder mithilfe eines leichten Schlags mit dem Hammer auf die Stifte setzen.

DETAIL B

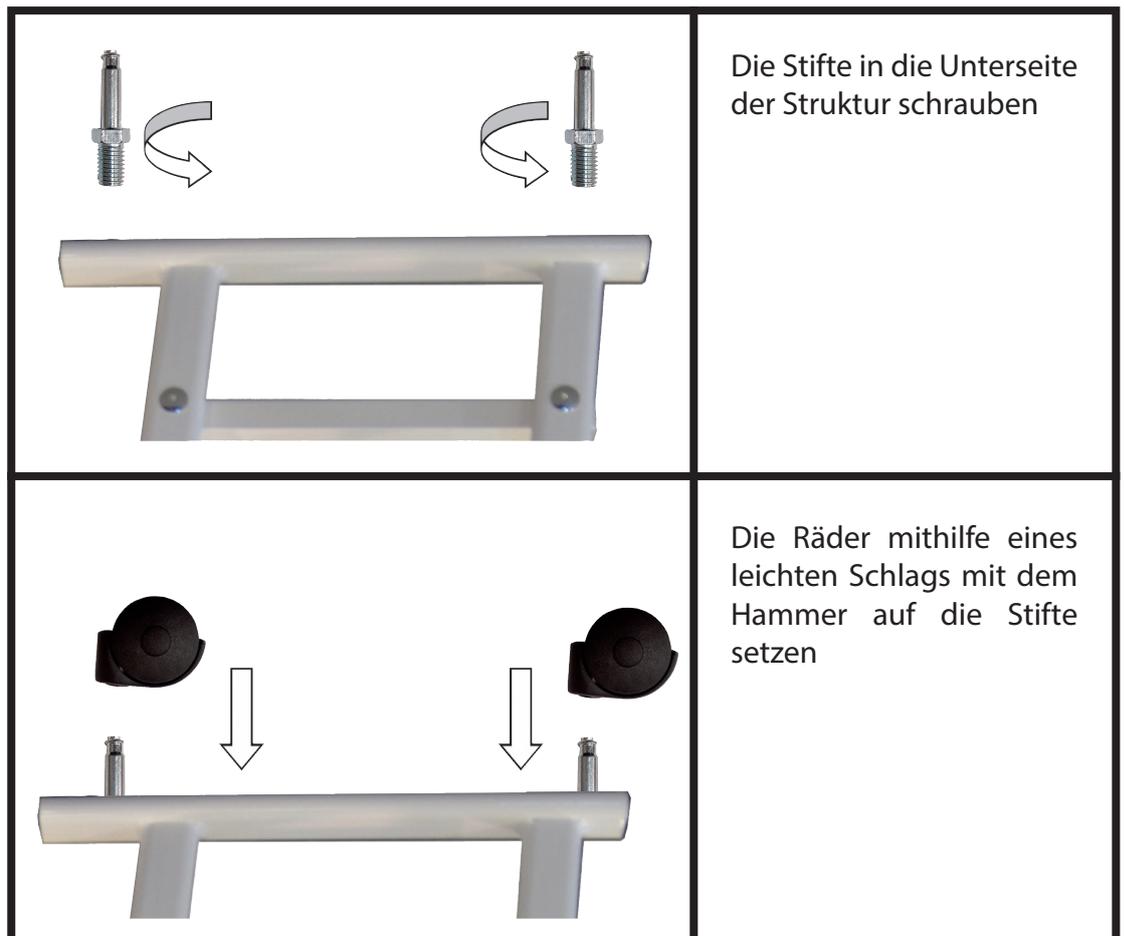

TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen	Wagen: 47 x 41 h 83 cm Einlegeboden: 40 x 30 cm (schachtel: 94,5 x 10 x 46)
Gewicht	11,3 kg (12,5 mit Schachtel)
Max. Tragfähigkeit	40 kg

WARNHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

- Sicherstellen, dass die Spannmuttern ordnungsgemäß angezogen sind.
- Die max. Tragfähigkeit laut technischem Datenblatt muss eingehalten werden.
- Direkten Kontakt mit offenen Wunden vermeiden.
- Nicht für den Gebrauch im Freien geeignet.

WARTUNG UND REINIGUNG

- Nur originale Ersatzteile verwenden.
- Alle Befestigungspunkte müssen regelmäßig kontrolliert werden.
- Für eine längere Lebensdauer sollte das Bett direkter Sonneneinstrahlung sowie salzhaltigen und sehr feuchten Umgebungen nicht ausgesetzt werden.
- Die Edelstahloberflächen mit Seifenwasser und speziellen Desinfektionsmitteln reinigen.
- Mit einem feuchten Tuch nachwischen und sorgfältig trocknen.
- Keine Reinigungsmittel auf Chlor- oder Ammoniakbasis sowie keine fettigen und öligen Substanzen auf die Oberflächen gießen.
- Zur Reinigung keine Werkzeuge aus Eisen verwenden. Zur Desinfektion nur geeignete, nicht korrosive Mittel verwenden.

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.