


ELEKTRODEN

Selbstklebende Elektrode
für die elektrische Stimulation

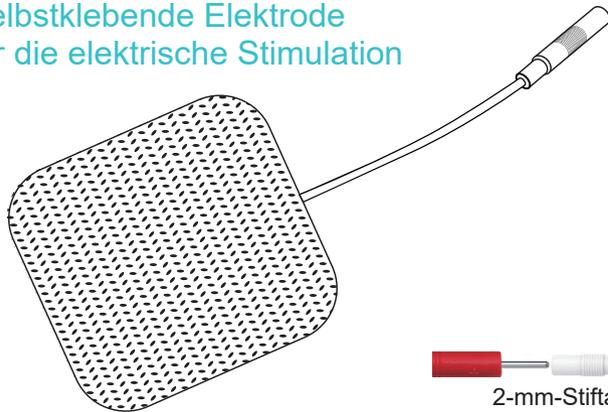

2-mm-Stiftanschluss

Vorgesehener Gebrauch

Die selbstklebende Elektrode ist für die Verwendung als wiederverwendbare, leitfähige Klebeschnittstelle zwischen der Haut des Patienten und den vermarkteten Elektrostimulatoren, d. h. TENS (Transkutane Elektrische Nervenstimulation), EMS (Elektrische Muskelstimulation), IF oder OFC (Interferenzstrom) oder PGF (Gepulste Galvanische Stimulation) zur Übertragung von elektrischem Strom, für den rezeptfreien (OTC) oder verschreibungspflichtigen Gebrauch bestimmt



Gebrauchsanweisung

Anwendung

1. Reinigen Sie die Haut vor jeder Anwendung der Elektroden gründlich. Die Elektroden haften nicht gut, wenn sich Lotionen, Öl, Make-up, Schmutz usw. auf der Haut befinden.
2. Schalten Sie den Stimulator aus, bevor Sie die Elektroden auf Ihrer Haut anbringen.
3. Stecken Sie die Stifte des Zuleitungsdrahtes vom Gerät in die Elektrodenanschlüsse.
4. Nehmen Sie die Elektroden aus der Schutzhülle und legen Sie sie fest auf die Haut.

Entfernen

1. Schalten Sie den Stimulator aus, bevor Sie die Elektroden von der Haut entfernen.
2. Heben Sie eine Ecke der Elektrode an und ziehen Sie die Elektrode von der Schutzhülle ab. Ziehen Sie die Elektrode nicht am Draht ab.
3. Legen Sie die Elektroden auf die Schutzfolie und trennen Sie den Anschlussdraht durch Drehen und Ziehen an den Anschlüssen der Elektrodenkabel.

Pflege und Aufbewahrung

1. Bewahren Sie die Elektroden zwischen den Einsätzen in dem wiederverschließbaren Beutel an einem kühlen, trockenen Ort auf.
2. Die Lebensdauer der Elektroden hängt von der Hautbeschaffenheit, der Lagerung, der Häufigkeit der Anwendung, der Art der Stimulation und der Stimulationsstelle ab. Sie können die Lebensdauer der Elektroden verlängern, indem Sie die Anwendungshinweise oben und unten sorgfältig befolgen.
3. Vermeiden Sie, dass die Elektroden direktem Sonnenlicht oder extremer Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Empfohlene Lagerungsbedingungen: 5°C - 27°C, Relative Luftfeuchtigkeit: 40%-70%
4. Lassen Sie die Elektroden NICHT ungeschützt an der Luft liegen, da dies die Viskosität und die Leistung des Produkts beeinträchtigt.

Warnung

1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
2. Die Elektroden sind nur für den Gebrauch bei einem einzigen Patienten bestimmt.
3. Wenden Sie sie NICHT auf verletzter Haut an. Sollte ein Hautausschlag auftreten, brechen Sie die Anwendung ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt. Verwenden Sie das Gerät NICHT beim Führen eines motorisierten Fahrzeugs oder beim Bedienen von Maschinen.
4. Nehmen Sie die Elektroden NICHT auseinander und verändern Sie sie nicht.
5. Nur zur Verwendung mit Geräten zur elektrischen Stimulation.
6. Verwenden Sie sie NICHT bei Kindern oder Säuglingen. Diese Elektroden wurden nicht für die Verwendung bei Kindern getestet.



EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



LOT

LATEX
FREI



Shenzhen Roundwhale Technology Co., Ltd.
202,2/F, Building 27, Dafa Industrial park, Longxi
Community, Longgang District, Shenzhen, China
Made in China