

(D)

CANNULA RIGIDA CURVA

Starre, gerade/gewinkelte Kanüle zur intrauterinen aspiration und für den schwangerschaftsabbruch

Ausschließlich für den fachärztlichen Gebrauch

Dieses Produkt ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt. Die mögliche Wiederverwendung birgt das Risiko von Kreuzinfektionen und/oder keiner Sterilität oder keiner Sauberkeit. • Vor Wärmequellen schützen; • Unmittelbar vor dem Gebrauch aus der Verpackung nehmen; • Vor dem Gebrauch durch Sichtkontrolle auf Unversehrtheit überprüfen


Vorgesehener gebrauch: Die Kanüle dient zur intrauterinen Aspiration und zum Schwangerschaftsabbruch.

Anwendungsgebiete: Für die intrauterine Aspiration und den Schwangerschaftsabbruch.

Gegenanzeigen: Vom Gebrauch bei schwerer vaginal – Zervikal – und/oder Beckenrauminfektion ist abzuraten.

Anwendung: ▪Patienten anästhesieren, ▪Zervixkanal weiten, ▪Kanüle mit dem geeigneten Durchmesser wählen, ▪Kanüle aus der Verpackung nehmen, ▪Kanüle am Handstück befestigen ▪Kanüle in die Gebärmutterhöhle einführen, ▪Aspiration vornehmen.

(I)	Caratteristiche che deve avere il manipolo della pompa aspirante per ottenere una combinazione sicura tra il raccordo della cannula e il manipolo della pompa aspirante:
(GB)	Characteristics the suction pump handpiece must have to obtain a secure fitting between the cannula connector and the suction pump handpiece:
(F)	Caractéristiques que la pièce à main de la pompe aspirante doit présenter pour obtenir un ensemble fiable entre le raccord de la canule et la pièce à main.
(D)	Erforderliche Merkmale des Handstücks der Absaugpumpe für eine sichere Verbindung zwischen dem Anschluß der Kanüle und Handstück der Absaugpumpe.
(E)	Características que debe presentar la pieza manual de la bomba aspirante para obtener una una combinación segura entre la misma y la conexión de la cánula
(P)	Características que deve ter o manípulo da bomba de aspiração para haver combinação segura entre o conector da cânula e o manípulo da bomba de aspiração
(CZ)	Charakteristiky, které musí splňovat násadec aspirační pumpy, pro zaručení bezpečného spojení spojky kanyly a násadce aspirační pumpy

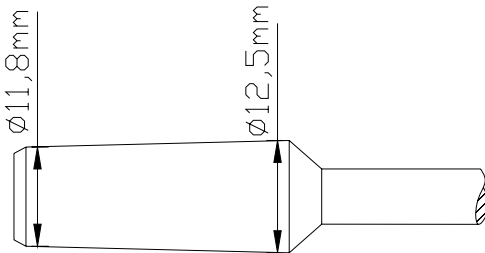

CANNULA RIGIDA CURVA

REF	Ø
CRC 07 S01	7 mm
CRC 08 S01	8 mm
CRC 09 S01	9 mm
CRC 10 S01	10 mm
CRC 11 S01	11 mm
CRC 12 S01	12 mm



Biogyn s.n.c

Via A. Volta, 14 41037
Mirandola (MO) - Italy



Distributore:

GIMA S.P.A.

Via Marconi, 1

I-20060 Gessate (MI) – Italy

www.gimaitaly.com

