


LIGHTED FORCEPS FOR FOREIGN BODY REMOVAL - USER INSTRUCTIONS  
BELEUCHTETE PINZETTE ZUR FREMDKÖRPERENTFERNUNG - GEBRAUCHSANWEISUNG  
FÓRCEPS ILUMINADOS PARA EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS - INSTRUCCIONES DE USO  
PINCE ÉCLAIRÉE POUR L'ÉLIMINATION DE CORPS ÉTRANGERS - MODE D'EMPLOI  
PINZA CON LUCE PER LA RIMOZIONE DI CORPI ESTRANEI - ISTRUZIONI PER L'USO  
PINÇA COM LUZ PARA A REMOÇÃO DE CORPOS ESTRANHOS - INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR

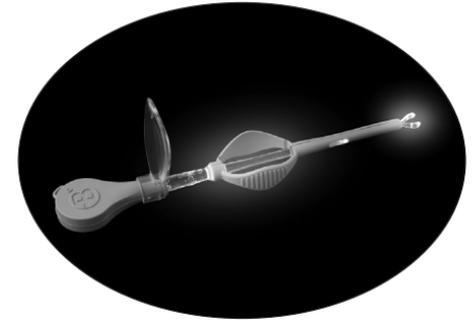

**B** **BIONIX**<sup>®</sup>

**+1 419 727 8997**

**www.Bionix.com**

©2016 Bionix Development Corp.  
Rev. 12/5/2016 • RM95-XXXX • Patent Pending



EC REP

Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53  
1030 Brussels, BELGIUM • Tel: +(32) 2.732.59.54  
Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: mail@obelis.net

Bionix Development Corp. • 5154 Enterprise Blvd.  
Toledo, OH, 43612 • U.S.A. • Phone: 800-551-7096  
Fax: 800-455-5678 • www.Bionix.com

## **BELEUCHTETE PINZETTE ZUR FREMDKÖRPERENTFERNUNG - GEBRAUCHSANWEISUNG**

Montage/Demontage:

1. Zur Montage der beleuchteten Pinzette zur Fremdkörperentfernung das Ende der Pinzette in die Lichtquelle einstecken, indem man die Stifte am Pinzettenende an den Einkerbungen in der Lichtquelle ausrichtet. Herunterdrücken und FEST im Uhrzeigersinn drehen, bis die Rotation stoppt. Hierdurch rastet die Pinzette ein und das Licht wird aktiviert. HINWEIS: Dieses Produkt ist ein gefedertes Gerät, unsachgemäße Montage kann zum Auswurf der Pinzettenspitze führen.
2. Zur Befestigung der Vergrößerungslinse die Linse am Hals der Lichtquelle einrasten, sodass das Oberteil der Linse in Richtung Pinzettenspitze abgewinkelt ist.
3. Zur Demontage die Pinzette herunterdrücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Pinzette von der Lichtquelle zu entfernen. Das Licht erlischt, sobald die Pinzette entfernt ist.

Anleitung zur Fremdkörperentfernung

1. Das Ohr oder die Nase untersuchen, um die Lage des Fremdkörpers festzustellen.
2. Die beleuchtete Pinzette zur Fremdkörperentfernung gemäß Gebrauchsanweisung montieren.
3. Die Spitze der beleuchteten Pinzette einführen, bis diese den Fremdkörper erreicht. Dort den gefederten Griff zusammendrücken, um das Objekt zu greifen und vorsichtig aus der Öffnung zu ziehen.
4. Die Untersuchung wiederholen und die Lage eines eventuell verbleibenden Teils des Fremdkörpers ermitteln.
5. Den Vorgang wiederholen, bis der Fremdkörper entfernt ist.
6. Die Pinzette für den Einmalgebrauch entfernen und entsorgen.

Die Spitze der beleuchteten Pinzette zur Fremdkörperentfernung ist zur Verwendung bei nur einem Patienten vorgesehen.

Die Lichtquelle und die Vergrößerungslinse sind zum Mehrfachgebrauch konzipiert. Die Lichtquelle oder Vergrößerungslinse nicht entsorgen. Lichtquelle und Linse werden in jeder Produktverpackung mitgeliefert.