


THE LIGHTED EAR CURETTE™ WITH MAGNIFICATION - USER INSTRUCTIONS
DIE LIGHTED EAR CURETTE™ MIT VERGRÖSSERUNG - GEBRAUCHSANWEISUNG
LIGHTED EAR CURETTE™ CON AUMENTO - INSTRUCCIONES DE USO
LIGHTED EAR CURETTE™ AVEC GROSSISSEMENT - MODE D'EMPLOI
LA LIGHTED EAR CURETTE™ CON INGRANDIMENTO - ISTRUZIONI PER L'USO
A LIGHTED EAR CURETTE™ COM AMPLIAÇÃO - INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR

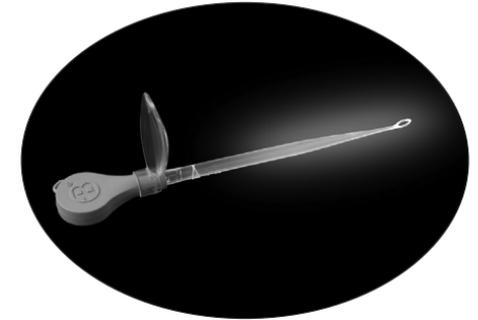

B **BIONIX**®

+1 419 727 8997

www.Bionix.com

©2016 Bionix Development Corp.
Rev. 12/5/2016 • RM95-XXXX • Patented



EC REP

Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM • Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: mail@obelis.net



Bionix Development Corp. • 5154 Enterprise Blvd.
Toledo, OH, 43612 • U.S.A. • Phone: 800-551-7096
Fax: 800-455-5678 • www.Bionix.com

DIE LIGHTED EAR CURETTE™ MIT VERGRÖSSERUNG - GEBRAUCHSANWEISUNG

Montage/Demontage:

1. Zur Montage der Lighted Ear Curette das Ende der Kürette in die Lichtquelle einstecken, indem man die Stifte am Kürettenende an den Einkerbungen in der Lichtquelle ausrichtet. Herunterdrücken und FEST im Uhrzeigersinn drehen, bis die Rotation stoppt. Hierdurch rastet die Kürette ein und das Licht wird aktiviert. HINWEIS: Dieses Produkt ist ein gefedertes Gerät, unsachgemäße Montage kann zum Auswurf der Ohrkürette führen.
2. Zur Befestigung der Vergrößerungslinse die Linse am Hals der Lichtquelle einrasten, sodass das Oberteil der Linse in Richtung Küretten spitze abgewinkelt ist.
3. Zur Demontage die Kürette herunterdrücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Kürette von der Lichtquelle zu entfernen. Das Licht erlischt, sobald die Kürette entfernt ist.

Anleitung für die Cerumentfernung

Der Verwendungszweck der Lighted Ear Curette ist die Entfernung von Cerumen aus dem Gehörgang.

1. Zur Untersuchung des Gehörgangs und zur Ermittlung der Lage des Cerumens ein Otoskop verwenden.
2. Die zum Patiententypen und der Cerumenokklusion passende Form der Lighted Ear Curette auswählen. Entsprechend der Anleitung montieren.
3. Verwenden Sie die Lighted Ear Curette zur Entfernung von Cerumen aus dem Gehörgang. VORSICHT: Das Gerät NICHT an der Lichtquelle festhalten, da bei nicht ordnungsgemäßer Montage die Kürette versehentlich ausgeworfen werden kann.
4. Die Otoskopuntersuchung wiederholen. Ermitteln Sie die Lage des eventuell verbleibenden Cerumens.
5. Die Kürettage wiederholen, bis ausreichend Cerumen entfernt wurde, um eine adäquate Darstellung des Trommelfells zu ermöglichen.
6. Die Lighted Ear Curette demontieren und die benutzte Kürette auf die übliche Weise entsorgen. Die Lichtquelle für die nächste Kürettage aufbewahren. Die LEC-Spitzen sind nur zum einmaligen Gebrauch vorgesehen.