



Littmann® CORE Stethoscope

Connects to Eko Software

Eko

3M

(en)	English	pp. 1	(sl)	Slovenski	pp. 33
(fr)	Français	pp. 3	(et)	Eesti	pp. 35
(de)	Deutsch	pp. 5	(lv)	Latviesu	pp. 37
(it)	Italiano	pp. 7	(lt)	Lietuviškai	pp. 39
(es)	Español	pp. 9	(ro)	Romana	pp. 41
(nl)	Nederlands	pp. 11	(hr)	Hrvatski	pp. 43
(sv)	Svenska	pp. 13	(bg)	Български	pp. 45
(da)	Dansk	pp. 15			
(no)	Norsk	pp. 17			
(fi)	Suomi	pp. 19			
(pt)	Português	pp. 21			
(el)	Ελληνικά	pp. 23			
(pl)	Polski	pp. 25			
(hu)	Magyar	pp. 27			
(cs)	Čeština	pp. 29			
(sk)	Slovensky	pp. 31			

3M™ Littmann® CORE Digital-Stethoskop

Anleitung zum Schnellstart

Laden Sie die Eko-App aus dem Apple App Store® oder dem Google Play Store® herunter.

Schalten Sie das Bluetooth® auf Ihrem Mobiltelefon oder Tablet ein, öffnen Sie die App und schalten Sie das CORE-stethoskop ein.


Eko

Im Lieferumfang enthalten

- Eko CORE Digital Attachment und 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Stethoskop
- Zusätzliches Set von 3M Littmann Snap Tight Soft-Ohrlöwen (klein)
- Kälteschutzring
- USB-Ladekabel
- Anleitung zum Schnellstart

Ohrlöwen

Die Ohrlöwen müssen beim Einsetzen in die Ohren nach vorn – in Richtung der Gehörgänge – zeigen.

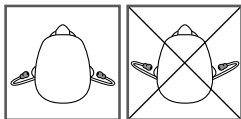

Lautstärke

Verwenden Sie die (+)- und (-)-Tasten, um die Lautstärke anzupassen. Es gibt sieben Lautstärkestufen.

Ein- und Ausschalten

Ausgeschaltet kann das CORE-Stethoskop als unverstärktes Stethoskop verwendet werden.

Drücken Sie den Ein-Aus-Schalter, um das CORE-Stethoskop einzuschalten. Die Anzeige fängt an zu blinken. Sie können nun durch die Ohrlöwen verstärkte und gefilterte Geräusche hören.

Telemedizin und KI-Funktionen

Eko bietet Telemedizin- und KI-Funktionen, für die Sie ein zusätzliches Abonnement benötigen (wo verfügbar, separat verkauft).

Sie können dieses online unter ekohealth.com abschließen.

Aktive Geräuschunterdrückung

Das CORE-Stethoskop umfasst eine aktive Geräuschunterdrückung, um Außengeräusche aus der Umgebung zu reduzieren. Die aktive Geräuschunterdrückung kann mithilfe der Eko-App ein- oder ausgeschaltet werden.



Benachrichtigungen

(🔊) (blinkend)

Ihr CORE ist eingeschaltet und sucht das Gerät

● (gelb)

Ihr CORE ist ausgeschaltet und lädt

(🔴) (gelb)

Ihr CORE hat einen niedrigen Akkustand

○

Ihr CORE ist eingeschaltet und verbunden

● (grün)


Ihr CORE ist vollständig aufgeladen

(🔵) (blau)

Ihr CORE nimmt Geräusche auf

Aufnahme

Drücken Sie auf die (o)-Taste, wenn Sie mit der Eko-App verbunden sind, um Geräusche aufzunehmen.

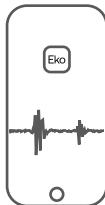

Aufladen

Verbinden Sie das Mikro-USB-Kabel mit dem CORE-Stethoskop und verwenden Sie ein UL-zertifiziertes oder CE-gekennzeichnetes 5 V USB Ladegerät. Das CORE benötigt ungefähr 2 Stunden bis zur vollständigen Aufladung. Die Leuchte leuchtet grün auf, wenn es vollständig aufgeladen ist.

Gebrauchsanweisung

Ziehen Sie die Gebrauchsanweisung zu Rate, bevor Sie Ihr Litmann CORE-Stethoskop verwenden. Besuchen Sie folgende Seite, um die Gebrauchsanweisung zu lesen: ekohealth.com/getstarted
Weitere Informationen zu 3M-Produkten finden Sie unter HCBRegulatory.3M.com

Service und Support

Wenn Sie sich in den USA befinden, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.littmann.com/service oder rufen Sie die Nummer 1-800-228-3957 an. Wenn Sie sich außerhalb der USA befinden, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.littmann.com, um Kontaktinformationen Ihrer örtlichen 3M-Geschäftsstelle zu erhalten.

Apple App Store ist ein Warenzeichen von Apple Inc.
Google Play und das Google Play-Logo sind Warenzeichen von Google LLC.
Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Bluetooth SIG
LBL 143 Rev B

System assembled by 3M Company



3M Deutschland GmbH
Health Care Business

www.littmann.com



Made in USA with
Globally Sourced Materials

3M Company
2510 Conway Ave.
St. Paul, MN 55144 USA

MD

CE

EC REP **3M Deutschland GmbH**
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss, Germany



Made in Malaysia

Eko Devices, Inc.
1212 Broadway, Suite 100
Oakland, CA 94612 USA

MD

CE

0537

EC REP **Emergo Europe**
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

©2020 3M; Eko Devices Inc. All rights reserved.

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L, and Cardiology IV are marks and/or registered marks of 3M.
Unauthorized use prohibited.

Eko trademarks, including CORE, are marks and/or registered marks of Eko Devices Inc.

Issue Date: 2020-11
34-8726-3344-0