



## DEUTSCH

### BETT FÜHRUNGSGÜRTEL

#### WARNUNGEN

Überprüfen Sie vor jeder Verwendung visuell die Unversehrtheit des Produkts. Wenn das Produkt Auffälligkeiten aufweist, wenden Sie sich sofort an das Geschäft, in dem der Kauf getätigt wurde.

Erregi sas übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Produkts. Im Falle eines schweren Unfalls im Zusammenhang mit der Verwendung des Geräts melden Sie den Vorfall bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer und/oder Patient ansässig ist.

#### BESCHREIBUNG

**Art 24/07:** Doppelter Bettgurt aus 100 % Baumwolle, bestehend aus zwei Bändern. Der innere Gurt wird um die Taille des Patienten geführt und mit einem Verschlussknopf befestigt, der äußere Gurt wird mit den Bändern und Verschlussknöpfen an den Bettschienen befestigt. Das Verschlusssystem besteht aus Verschlussknöpfen zur Öffnung mit einem Magnetschlüssel. 1 Verschlussknopf dient dazu, den oberen Gurt an der Taille des Patienten zu befestigen, die beiden anderen Verschlussknöpfe dienen zur Verankerung der Gurte an den Bettschienen.

Das Produkt wird zur Sicherung von unkooperativen, therapiebedürftigen Patienten verwendet. **Der Gurt ermöglicht es dem Patienten, in Rücken- und Seitenlage zu liegen.**

**Art 24/07/01:** Einfacher Bettgurt aus 100% Baumwolle, bestehend aus einem Gurt, der um die Taille des Patienten geführt und mit einem Verschlussknopf befestigt wird, sowie zwei Bändern, die mit einem Klettverschluss an den Bettschienen befestigt werden.

Das Verschlusssystem besteht aus einem Verschlussknopf zur Öffnung mit einem Magnetschlüssel. Der Verschlussknopf dient dazu, den oberen Gurt an der Taille des Patienten zu befestigen, die beiden Bänder mit Haken dienen zur Verankerung des Gurts an den Bettschienen. Das Produkt wird zur Sicherung von unkooperativen, therapiebedürftigen Patienten verwendet. **Der Gurt erlaubt nur die Rückenlage des Patienten**

**REF** 24/07/01 L-XL (Gima 43185)  
24/07 S-M (Gima 43186)  
24/07 L-XL (Gima 43187)

 **Erregi S.a.s.**  
Via Adua 40  
21040 Vedano Olona (Va)  
commerciale@erregiasilimedi.it  
www.erregiasilimedi.it  
MADE IN ITALY

#### HINWEISE

Geräte zur Fixierung von bettlägerigen Patienten.

#### KONTRAINDIKATIONEN

Es wurden keine Kontraindikationen gefunden, außer bei festgestellter Empfindlichkeit gegenüber den Komponentenmaterialien.


#### VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

Die Vorrichtung darf nur von medizinischem und paramedizinischem Personal angewendet werden. Der Gurt sollte nicht am Becken oder Brustkorb verwendet werden. **Produkte mit magnetischem Verschlusssystem dürfen nicht bei Patienten verwendet werden, denen ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde, da bei ihnen Tachykardie auftreten kann.** Der Gurt ist dann am Patienten richtig angelegt, wenn eine flache Hand zwischen Patient und Gurt passt. Überprüfen Sie immer, ob die Verschlüsse sicher eingerastet sind; ist dies nicht der Fall, kann die Sicherheit des Patienten gefährdet sein. Wenn sich die Verschlüsse nicht öffnen lassen, können die Gurte mit einem Cutter oder einer Schere durchtrennt werden. Verwenden Sie das Produkt immer mit persönlicher Schutzkleidung. Nicht flammenhemmendes Produkt.

#### KOMPOSITION

100 % BAUMWOLLE.

#### WASCHMETHODE

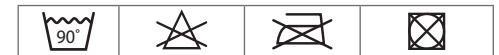

Achtung: Schlüssel und Verschlüsse vor dem Waschen entfernen, da ihre Funktionstüchtigkeit bei Kontakt mit Flüssigkeiten beeinträchtigt werden kann. Der Hersteller haftet nicht für Veränderungen der technischen Eigenschaften des Geräts bei Nichtbeachtung der Waschverfahren.

#### DESINFEKTION







Ausschließlich Medizinprodukte verwenden.

#### AUFBEWAHRUNG

Geschützt vor Licht-, Wärme- und Feuchtigkeitsquellen lagern.

#### ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden Vorschriften zum Umweltschutz und zur getrennten Abfallsammlung.

<b>REF</b>	Erzeugniscode		Hersteller
<b>LOT</b>	Chargennummer	<b>MD</b>	Medizinprodukt
<b>CE</b>	Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745		Gebrauchsanweisung beachten
	Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern		An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	Herstellungsdatum		Ohne Naturkautschuk hergestellt
<b>UDI</b>	Eindeutiger Bezeichner		

Entfernen Sie das Etikett NICHT vom Medizinprodukt, da es die Rückverfolgbarkeit des gelieferten Produkts ermöglicht (Hersteller, UDI, Chargennummer, Produktcode).

#### GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

