


REF **KDB-697 (GIMA 43196)**
KDB-698 (GIMA 43198) Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China**EC** **REP** SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam,
Netherlands **Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

DEUTSCH

NAME:

Toilettenstuhl

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

VORGESEHENER GEBRAUCH:

Der Toilettenstuhl wird für die Ausscheidung für Personen gebraucht, die krank, verletzt oder behindert sind, und kann zu Hause oder im Krankenhaus verwendet werden.

BEDIENER

Das Produkt kann vom Benutzer selbst oder vom medizinischen oder häuslichen Pflegepersonal bedient werden.

PATIENTENPOPULATIONEN

Personen mit Behinderungen, Patienten und ältere Menschen.

KONTRAINDIKATIONEN

Kinder müssen beim Gebrauch des Toilettenstuhls beaufsichtigt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Stellen Sie den Toilettenstuhl auf die gewünschte Höhe ein, indem Sie die Kugel am Beinrohr drücken. Die Kugeln der vier Beine sollten beim Einstellen der Höhe auf demselben Ritzel positioniert sein. Bei Produkten mit abnehmbaren Füßen, können Sie die abnehmbaren Füße einhängen (wie in der Abbildung unten), die Positionierlöcher der Beinhalterungen auf Höhe der Positionierstifte am Gestell einstellen und dann den Griff leicht nach innen schwenken, bis er automatisch einklinkt. Dann stellen Sie für einen höheren Benutzerkomfort die Fußstütze herunter. Bei Produkten mit klappbarem Gestell ohne Höheneinstellung, müssen Sie das Gestell nur auseinanderklappen und die notwendigen Teile wie Räder montieren und den Eimer und die Sitzfläche vor dem Gebrauch befestigen.
2. Heben Sie die Sitzfläche hoch und hängen Sie die Pfanne direkt am Pfannenbord ein, dann klappen Sie den Sitz für den Gebrauch wieder herunter.
3. Beim Gebrauch kann der Sitzdeckel als Rückenlehne benutzt werden.
4. Nach dem Gebrauch schließen Sie den Pfannendeckel und heben Sie sie hoch oder nehmen Sie sie direkt aus dem Pfannenhalter.
5. Der Toilettenstuhl kann nach dem Gebrauch zusammengeklappt werden, sodass er leichter wegzustellen ist und weniger Platz einnimmt.
6. Nehmen Sie die Rückenlehne und die Toilettenschüssel ab und legen Sie sie auf die Toilette, um sie als Schutzgitter für ältere Personen, Schwangere und Babies zu benutzen.
7. Setzen Sie einen spritzfesten Eimer auf die Toilette als Sitzerhöhung und als Schutzgitter. Besonders für Schwangere. Diese Methode wird für ältere Personen mit Beinproblemen und anderen Personen, die Schwierigkeiten beim Hinsetzen haben, empfohlen.

WARTUNG

1. Die Produktoberfläche darf nicht mit harten Gegenständen zerkratzt werden.
2. Benutzen Sie für die tägliche Reinigung und Pflege ein neutrales synthetisches Reinigungsmittel. Wischen Sie das Produkt erst mit einem feuchten Lappen ab und danach mit einem trockenen Lappen trocken.
3. Reinigen und desinfizieren Sie den Toilettenstuhl routinemäßig einmal am Tag und desinfizieren Sie ihn gründlich, wenn der Benutzer wechselt.
4. Vermeiden Sie den Kontakt der Oberflächen mit starken Säuren oder Alkali, um Korrosion zu vermeiden.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE:

1. Stellen Sie den Toilettenstuhl bitte an einem trockenen, gut belüfteten Ort, fern von

direktem Sonnenlicht auf und vermeiden sie ätzende Chemikalien wie Öle, Säuren und Alkali.

2. Halten Sie den Toilettenstuhl sauber. Er kann mit normalen Neutralreinigern abgewischt werden. Nach dem Abwischen mit einem feuchten Lappen, bitte sofort mit einem trockenen Lappen trockenwischen.
3. Der Toilettenstuhl sollte nicht direkt in die Sonne oder den Regen gestellt werden und er sollte sofort nach Gebrauch trockengewischt werden.
4. Die beweglichen Teile können mit Qualitätsschmiermitteln geschmiert werden, um den Gebrauch zu verbessern.
5. Kontrollieren Sie regelmäßig die Verbindungen am Toilettenstuhl, um Unfälle durch Lösen oder Abfallen von Teilen zu verhindern.
6. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob am Toilettenstuhl Bruchstellen oder andere Fehler zu sehen sind, die den Gebrauch beeinträchtigen können.
7. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob das Sitzgestell und die Sitzfläche fest sitzen.
8. Das Produkt sollte fest und sicher stehen und nicht zu stark geschüttelt werden, um Schäden an der Struktur zu vermeiden.
9. Die normale Nutzdauer des Produkts beträgt 3 Jahre an dem Datum der Werkauslieferung.
10. Toilettenstühle mit Rädern dürfen nur für kurze Entfernungen als Rollstuhl, aber nie als Rollstuhlersatz benutzt werden.
11. Stellen Sie sich nicht auf den Stuhl mit demontierten Füßen, es besteht die Gefahr, dass der Stuhl umfällt.
12. Verwenden Sie das Gerät nicht in direktem Kontakt mit der Haut.
13. Maximale Kapazität 125 kg.

LAGERUNG

Der Rollstuhl sollte verpackt an einem gut belüfteten und trockenen Ort, in einem sauberen Raum ohne korrosive Gase gelagert werden. Um Feuchtigkeit und starkes Licht zu vermeiden, während des Transports fern von Hitzequellen halten.

GARANTIE

Das Produkt hat eine Garantie für 1 Jahr bei normalem Gebrauch unter Einhaltung der Bedienungsanleitung.




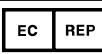









HALTBARKEIT

3 Jahre.

ENTSORGUNG

Entsorgungsbeschränkungen hängen von der Kontamination während des Gebrauchs ab und werden von den nationalen oder lokalen Vorschriften geregelt.

ETIKETTEN, VERPACKUNGSLOGODESIGN:

Symbol	Empfehlungen	Symbol	Empfehlungen
	Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745		Medizinprodukt
	Hersteller		Autorisierter Vertreter in der EG
	Herstellungsdatum		Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern
	Chargennummer		Nicht steril
	Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen		Erzeugniscode
	Gebrauchsanweisung beachten		An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	Eingeführt von		

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten