

REF **KDB-699 (GIMA 43202)** Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands **Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

4. Vermeiden Sie den Kontakt der Oberflächen mit starken Säuren oder Alkali, um Korrosion zu vermeiden.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE:

1. Stellen Sie den Toilettenstuhl bitte an einem trockenen, gut belüfteten Ort, fern von direktem Sonnenlicht auf und vermeiden sie ätzende Chemikalien wie Öle, Säuren und Alkali.
2. Der Toilettenstuhl sollte nicht direkt in die Sonne oder den Regen gestellt werden und er sollte sofort nach Gebrauch trockengewischt werden.
3. Die beweglichen Teile können mit Qualitätsschmiermitteln geschmiert werden, um den Gebrauch zu verbessern.
4. Kontrollieren Sie regelmäßig die Verbindungen am Toilettenstuhl, um Unfälle durch Lösen oder Abfallen von Teilen zu verhindern.
5. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob am Toilettenstuhl Bruchstellen oder andere Fehler zu sehen sind, die den Gebrauch beeinträchtigen können.
6. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob das Sitzgestell und die Sitzfläche fest sitzen.
7. Das Produkt sollte fest und sicher stehen und nicht zu stark geschüttelt werden, um Schäden an der Struktur zu vermeiden. Toilettenstühle mit Rädern dürfen nur für kurze Entfernungen als Rollstuhl, aber nie als Rollstuhlersatz benutzt werden.
8. Stellen Sie sich nicht auf den Stuhl mit demontierten Füßen, es besteht die Gefahr, dass der Stuhl umfällt.

LAGERUNG

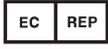
Der verpackte Toilettenstuhl sollte an einem belüfteten und trockenen Ort ohne korrosive Gase und in einem gut belüfteten und sauberen Raum gelagert werden. Um Feuchtigkeit und starkes Licht zu vermeiden, während des Transports fern von Hitzequellen halten.

ENTSORGUNG

Entsorgungsbeschränkungen hängen von der Kontamination während des Gebrauchs ab und werden von den nationalen oder lokalen Vorschriften geregelt.

Alle schweren Vorfälle hinsichtlich des von uns gelieferten Medizinprodukts müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem Sie Ihren Firmensitz haben, gemeldet werden.

ETIKETTEN, VERPACKUNG LOGO-DESIGN:

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Medizinprodukt gemäß Verordnung (EU) 2017/745		Medizinisches Gerät
	Hersteller		Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft
	Herstellungsdatum		Vor Sonnenlicht schützen
	Chargennummer		Nicht steril
	Warnung: Lesen und befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen (Warnhinweise) sorgfältig		Produktcode
	Lesen Sie die Gebrauchsanweisung		An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren
	Importiert von		

DEUTSCH

NAME

Toilettenstuhl

Modell: KDB-699

Gewichtskapazität: 125 Kg.

VORGESEHENER GEBRAUCH:

Der Toilettenstuhl wird für die Ausscheidung für Personen gebraucht, die krank, verletzt oder behindert sind, und kann zu Hause oder im Krankenhaus verwendet werden.

BEDIENER

Das Produkt kann vom Benutzer selbst oder vom medizinischen oder häuslichen Pflegepersonal bedient werden.

PATIENTENPOPULATIONEN

Personen mit Behinderungen, Patienten und ältere Menschen.

KONTRAINDIKATIONEN

Kinder müssen beim Gebrauch des Toilettenstuhls beaufsichtigt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Dieses Produkt ist faltbar. Sie müssen nur den Rahmen aufklappen und die erforderlichen Teile wie Räder, Eimer und Sitzfläche vor der Verwendung anbringen.
2. Heben Sie die Sitzplatte an, setzen Sie den Eimer richtig auf den Eimerrahmen und senken Sie die Sitzplatte dann für den Gebrauch ab.
3. Schließen Sie nach Gebrauch den Deckel des Eimers und nehmen Sie ihn aus dem Eimerrahmen.
4. Der Toilettenstuhl kann nach dem Gebrauch zusammengeklappt werden, sodass er leichter wegzustellen ist und weniger Platz einnimmt.

WARTUNG

1. Die Produktoberfläche darf nicht mit harten Gegenständen zerkratzt werden.
2. Benutzen Sie für die tägliche Reinigung und Pflege ein neutrales synthetisches Reinigungsmittel. Wischen Sie das Produkt erst mit einem feuchten Lappen ab und danach mit einem trockenen Lappen trocken.
3. Reinigen und desinfizieren Sie den Toilettenstuhl routinemäßig einmal am Tag und desinfizieren Sie ihn gründlich, wenn der Benutzer wechselt.

GIMA GARANTIEBEDINGUNGEN

Für das Produkt gilt die 12-monatige Standardgarantie B2B von Gima.