

EN

FR

DE

ES

IT

NL

NO

JA

KO

ZH

# Little Baby QCPR

Important Product Information

重要产品信息

[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)




**Laerdal**

helping save lives



Diese wichtigen Produktinformationen gelten für Little Baby Q CPR. Sofern nicht anders angegeben, gilt diese Information für sämtliche Produktkonfigurationen.

 Warn- und Sicherheitshinweise

Ein Warnhinweis macht auf einen Zustand, eine Gefahrensituation oder eine unsichere Praxis aufmerksam, die zu schwerwiegenden personenbezogenen Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Ein Sicherheitshinweis macht auf einen Zustand, eine Gefahrensituation oder eine unsichere Praxis aufmerksam, die zu leichten personenbezogenen Verletzungen oder zur Beschädigung des Produktes führen kann.

 Hinweise

Ein Hinweis nennt wichtige Informationen über das Produkt oder dessen Betriebsweise.

## Pflege, Instandhaltung und Reinigung

Das Trainingsmodell sauber und in hygienischem Zustand halten. Die Intubationseinheit nach jedem Seminar auswechseln, vor allem dann, wenn Mund-zu-Mund-Beatmung durchgeführt wurde.

Wir empfehlen, für jeden Übungsteilnehmer ein separates Gesichtsteil für das Laerdal-Trainingsmodell zu verwenden.

Wenn mehrere Übungsteilnehmer ein und dasselbe Gesichtsteil verwenden, muss dieses nach jedem Gebrauch gründlich desinfiziert werden. Alle Hautteile sind regelmäßig zu reinigen. Warmes Seifenwasser oder Laerdal-Reinigungstücher verwenden.

Übungsbeatmungstücher schaffen eine hygienische Barriere zwischen Ihren Lippen und dem Gesicht des Trainingsmodells.

Folgende Materialien können zu Verfärbungen des Trainingsmodells führen:

- Farbstoffe von Stiften und Lippenstiften
- Latexhandschuhe
- Verwenden von Kleidungsstücken, die nicht ursprünglich mit dem Produkt geliefert wurden.

 Sicherheitshinweise

- *Verwenden Sie keine Flüssigkeiten, um das Innere des Trainingsmodells zu reinigen.*
- *Tauchen Sie keine Teile des Trainingsmodells unter.*

## Batterie

Verwenden Sie nur herkömmliche, nicht wiederaufladbare Zink-Kohle- oder Alkali-Batterien (LR6 1,5 V AA). Batterien müssen durch die korrekte Batterieart ersetzt werden. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

# Deutsch

## Little Baby QCPR

### EU

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie des Rates 2014/53/EU über Funkanlagen (RED) sowie der Richtlinie des Rates 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS).

### Umgang mit Abfallprodukten

Der QCPR-Sensor enthält elektronische Bauteile. Entsorgen Sie ihn in einer geeigneten Recyclinganlage gemäß den örtlichen Vorschriften.

Europäische Richtlinie 2012/19/EU (WEEE): Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung auftreten können.

Das Symbol auf dem Produkt oder den ihm beiliegenden Dokumenten weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen ist es bei der zuständigen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben. Die Entsorgung ist gemäß den örtlichen Umweltschutzvorschriften zur Abfallentsorgung vorzunehmen. Detaillierte Informationen zur Behandlung, Verwertung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder dem Laerdal-Vertreter, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

### Garantie

Informationen zu den Gewährleistungsbedingungen finden Sie in der Broschüre über die weltweite Garantie von Laerdal. Weitere Informationen finden Sie unter [www.laerdal.com](http://www.laerdal.com).

### Glossar der Symbole

	CE-Zeichen
	UKCA-Zeichen
	Australische Kennzeichnung der Übereinstimmung mit den EMV-Anforderungen
	KC (Korea-Zertifikat) Prüfzeichen
	Japanische MIC-Zertifizierung
	WEEE-Zeichen
	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Referenzbestellnummer
	Chargennummer

### Technische Daten

Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C Wenn das Produkt bei niedrigen Temperaturen (< 15 °C) verwendet wird, kann sich die Produktleistung verschlechtern.
Lagerung Temperatur	-10 °C bis 50 °C
Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Gewicht	1,8 kg (± 0,2 kg)
Abmessungen	65 x 26 x 14 cm



© 2022 Laerdal Medical AS. All rights reserved.



Manufactured in China for:  
Laerdal Medical AS  
P.O. Box 377  
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway  
T: (+47) 51 51 17 00

Printed in China

20-15510 Rev D


---


[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)



**Laerdal**  
helping save lives

# Little Baby QCPR

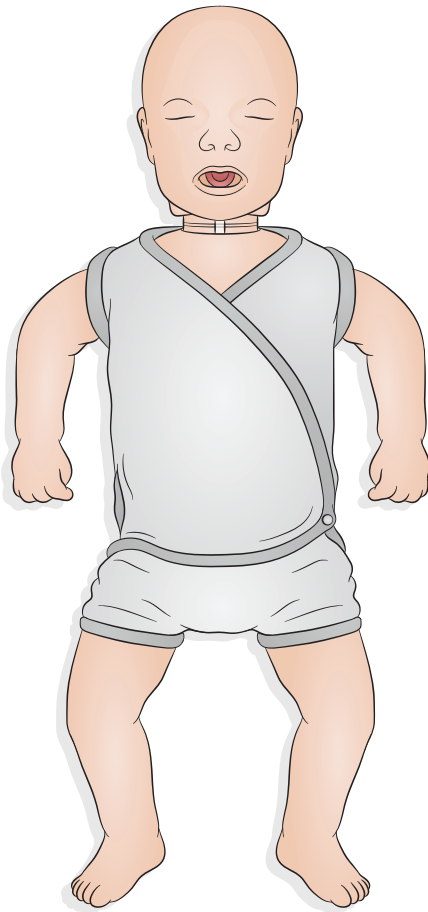

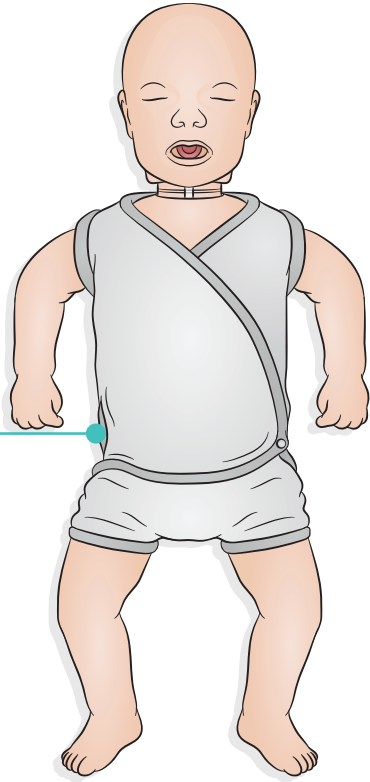




A control panel area with a light beige background. On the left is a large dark grey power button and a blue starburst icon. To the right is a white speech bubble containing six icons arranged in two rows. The top row shows a blue starburst with a dashed line below it, a blue power button, a red starburst with a dashed line below it, and a red battery icon with a plus sign. The bottom row shows a blue starburst with a solid line below it, a blue Wi-Fi signal icon, a red starburst with a solid line below it, and a red warning triangle icon.








QCPR Instructor  
QCPR Learner

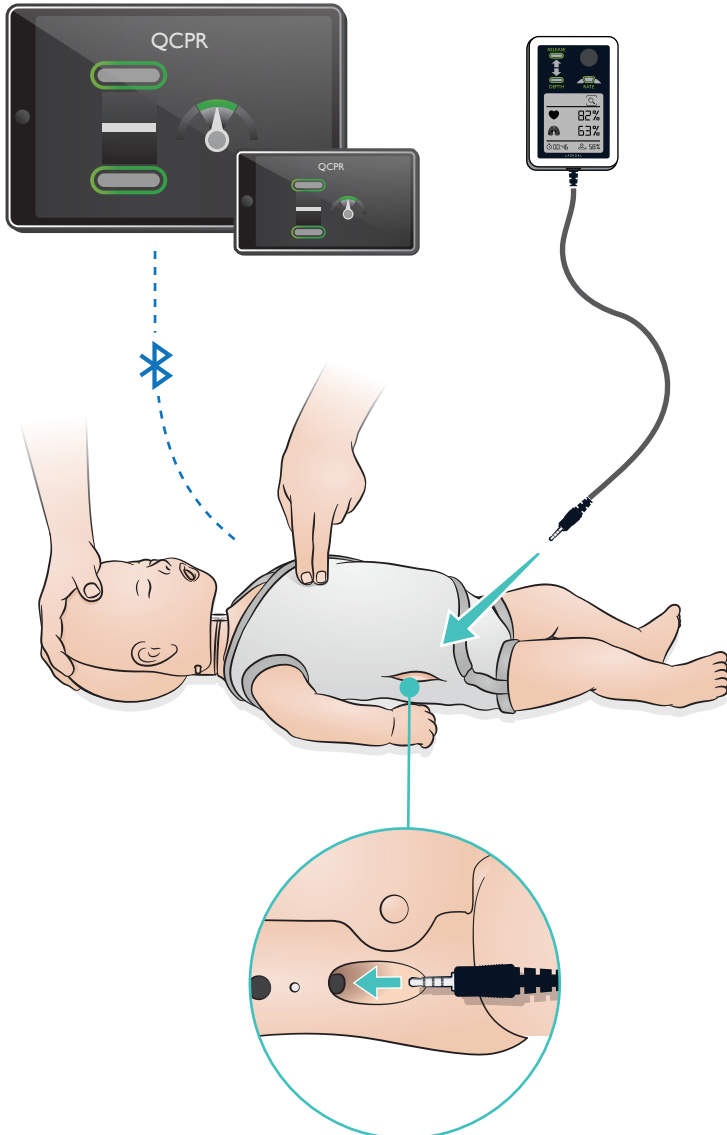


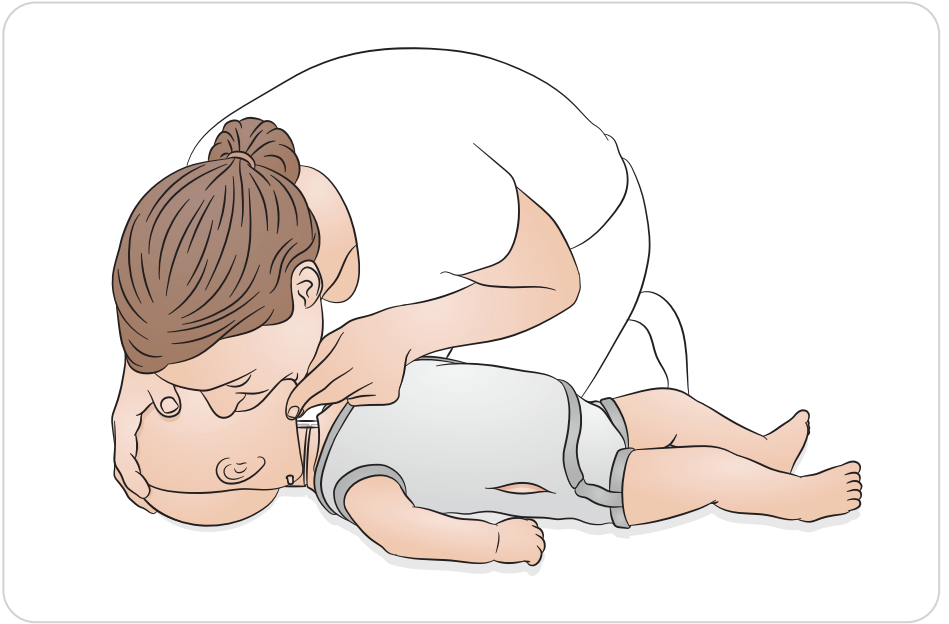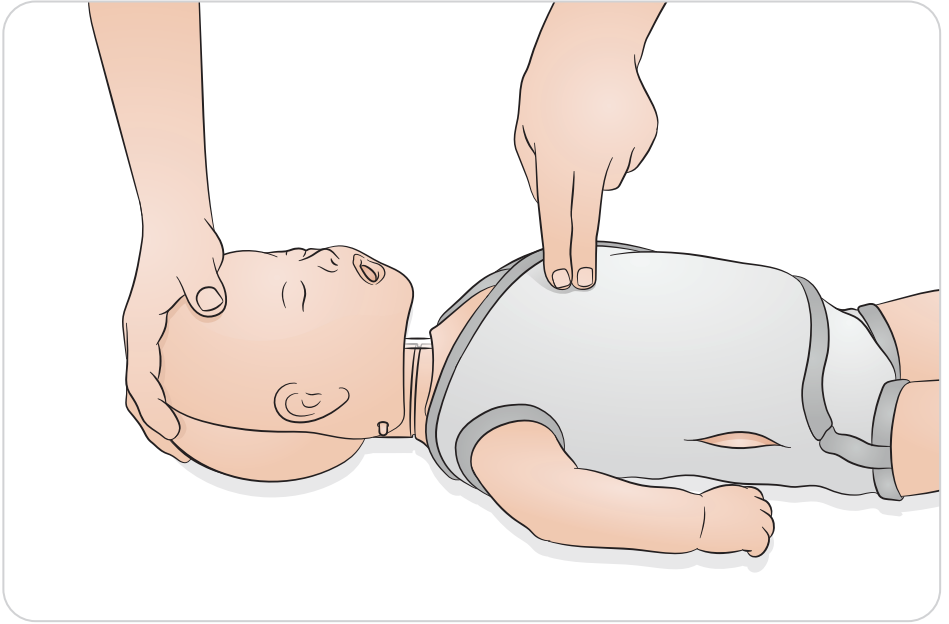

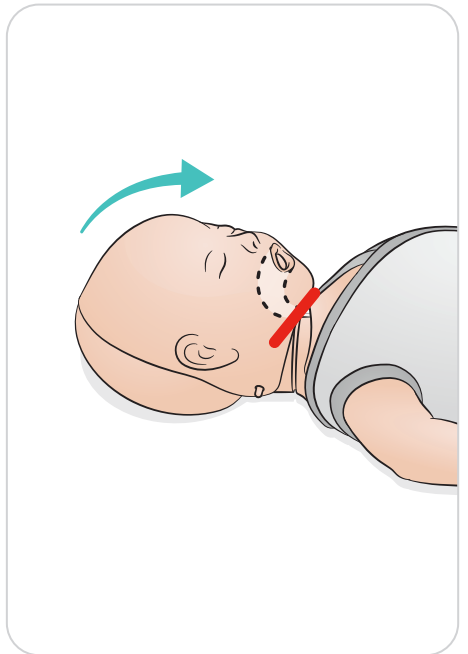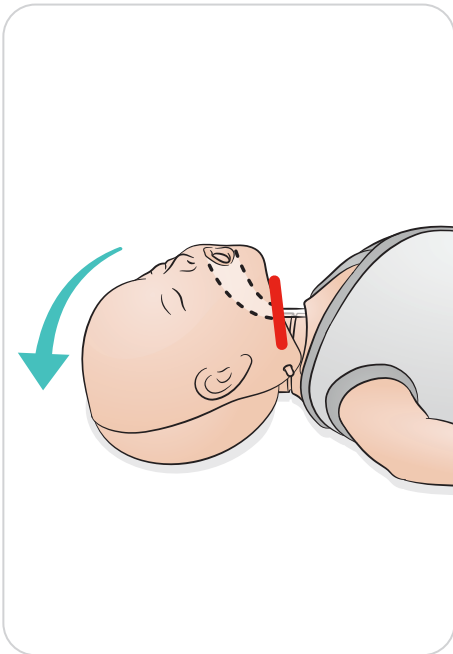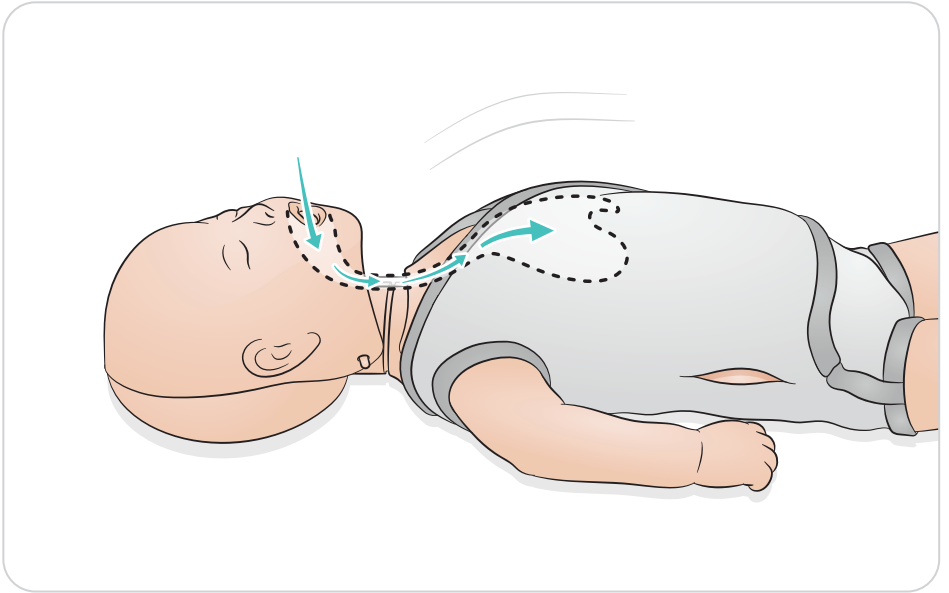





1

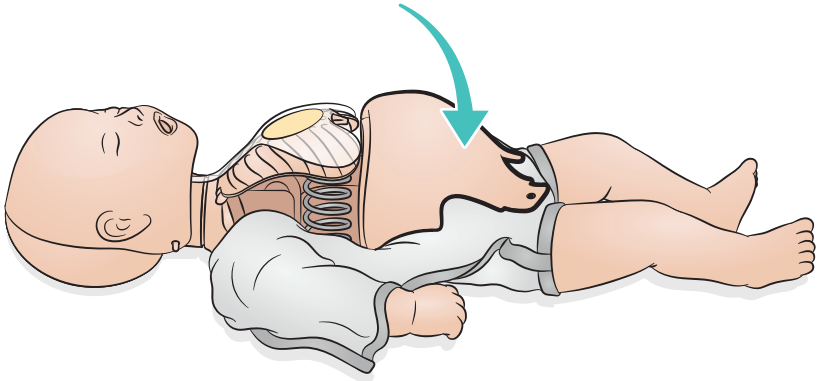

2

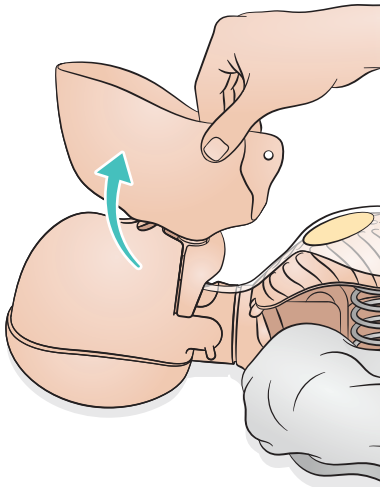


3

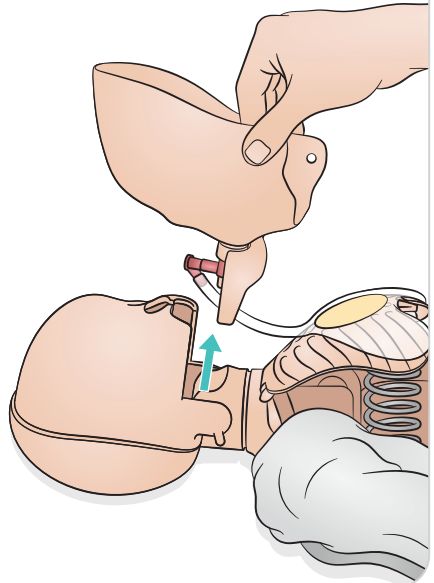





4

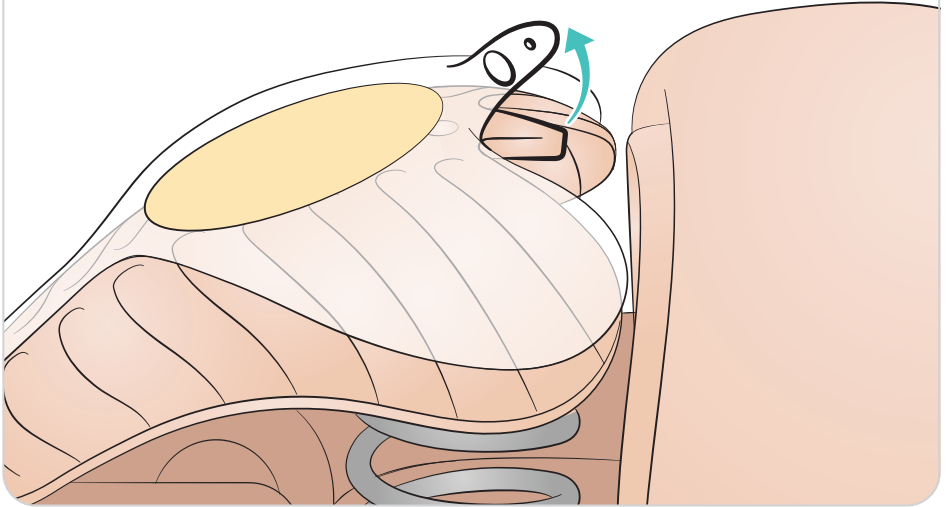

5

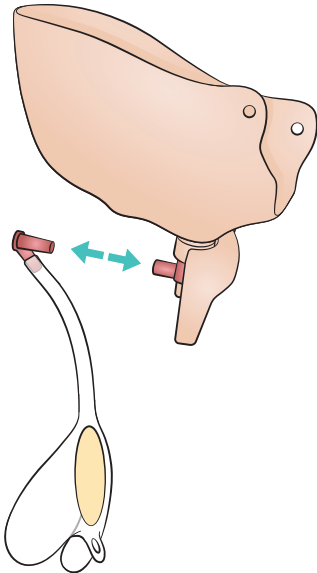


6

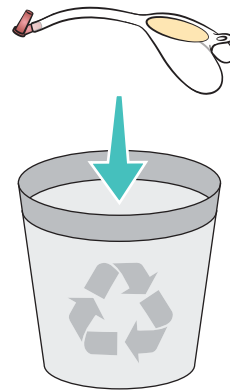





1

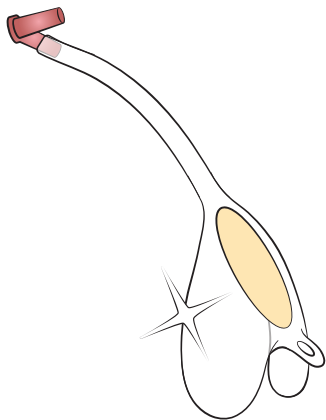


2

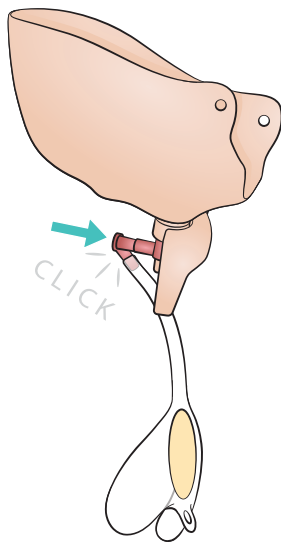

3

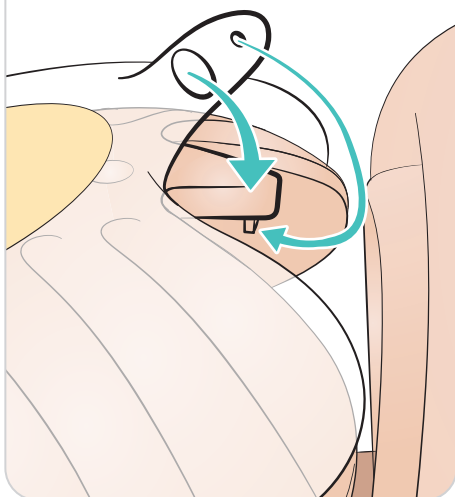


4

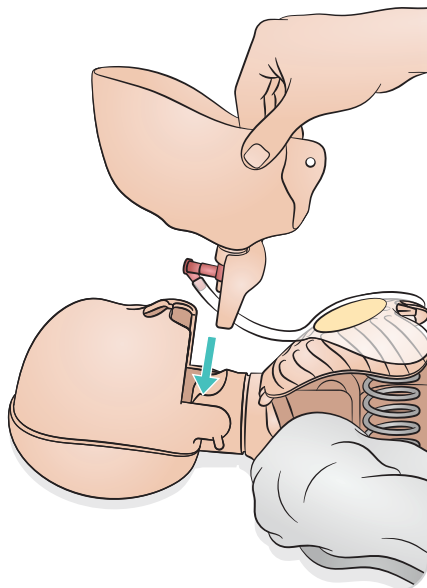





5

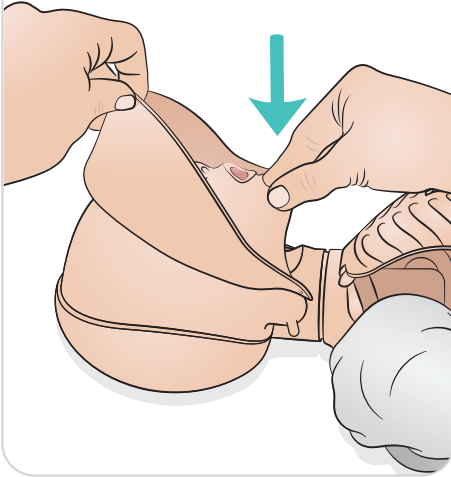


6

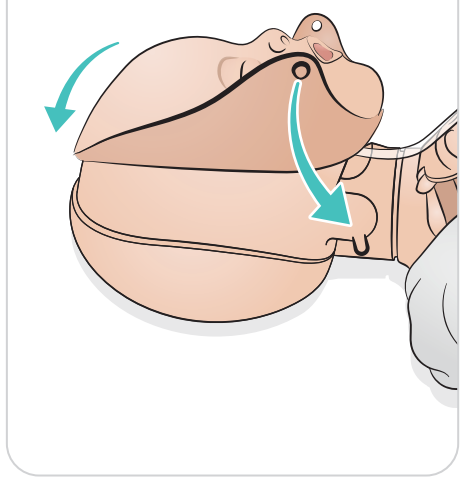


7

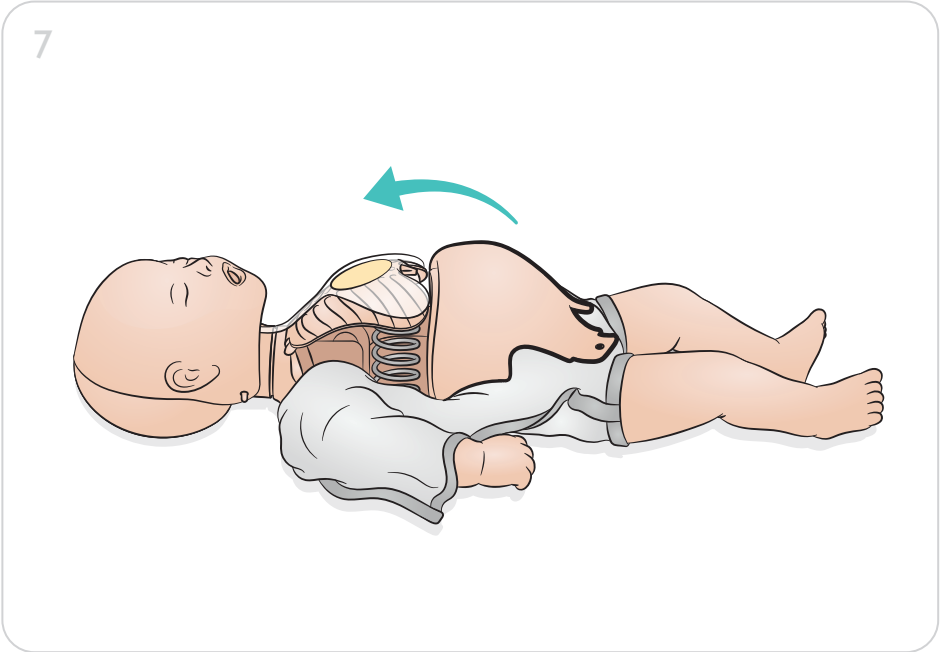


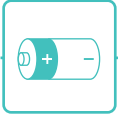


1

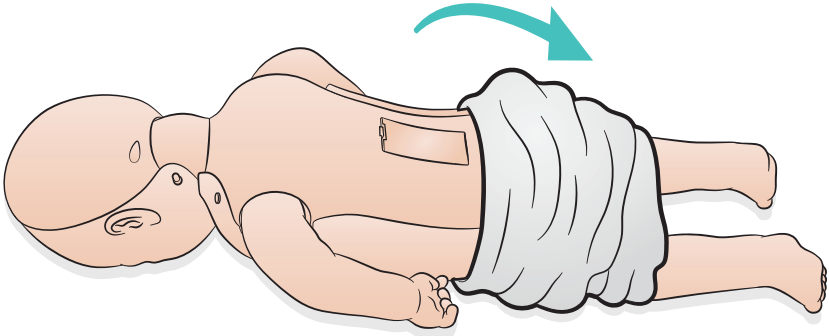

2

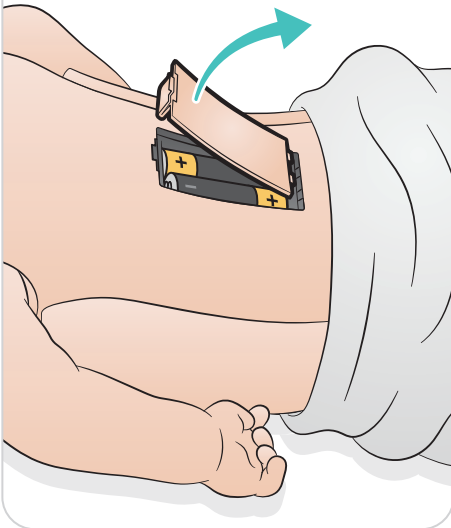

3

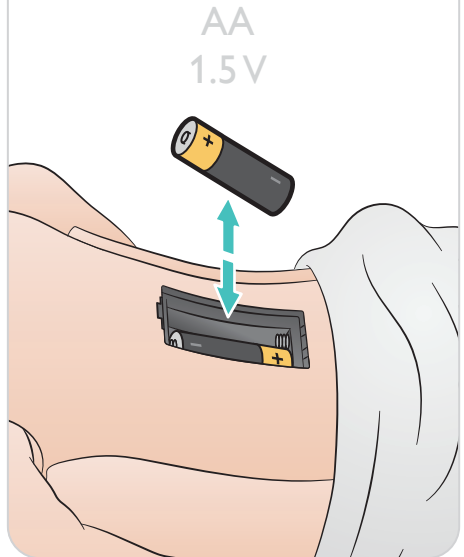







[www.laerdal.com/support](http://www.laerdal.com/support)

© 2019 Laerdal Medical AS. All rights reserved.

Laerdal Medical AS  
P.O. Box 377,  
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway  
T: (+47) 51 51 17 00

Printed in China

20-15511 Rev A

[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)



**Laerdal**  
helping save lives