

# Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ (Straight)

da BRUGSANVISNING

CE 0086

Manufacturer:  
**Smiths Medical International Ltd.**  
St. Crispin Way, Haslingden,  
Rossendale, Lancashire, BB4 4PW, UK.  
Tel: +44 (0)1706 233800

Distributed by:  
**Smiths Medical ASD, Inc.**  
201 West Queen St,  
Southington, CT 06489, USA.  
Tel: +1 860 621 9111

Australian Representative:  
**Smiths Medical Australasia Pty. Ltd.**  
61 Brandl Street, Eight Mile Plains,  
Brisbane, QLD 4113, Australia.  
Tel: +61 (0)7 3340 1300

www.smiths-medical.com smiths medical

CCN.004/008/015 REV.001 06/12



da Dansk

Forsigtig

Må ikke genanvendes

Må ikke resteriliseres

Katalognummer

Batchkode

Fremstillingsdato

Anvendes inden

Fabrikant

Indeholder ikke naturgummilætex

Antal

Steriliseret med etylenoxid

Væskebanens komponenter er ikke-pyrogene

Temperaturbegrænsning

Denne vej op

Forsigtig

Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget

Opbevares tørt

Må ikke udsættes for sollys

Dansk

## Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ (Lige)

BRUGSANVISNING

Disse anvisninger gælder for brugen af følgende Jelco®-produkter:

7130 til 7138 og 7188 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ FEP 14G til 24G


7260 til 7269 og 7288 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ PUR 14G til 24G

Disse anvisninger indeholder vigtige oplysninger om sikker brug af produktet. Læs hele indholdet af denne brugsanvisning, også advarsler og forholdsregler, før ibrugtagning af dette produkt. Hvis advarsler, forholdsregler og anvisninger ikke følges nøje, er det forbundet med livsfare eller risiko for alvorlige personskader for patienten og/eller kliniker.

BEMÆRK: DISTRIBUTUÉR DENNE INDLÆGSSEDEL TIL ALLE PRODUKTETS ANVENDELSES- OG OPBEVARINGSSTEDER.

### 1. BESKRIVELSE:

Hvert Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ består af en introducerkanyle og en integreret nålebeskytter. Hovedkomponenterne er: (1) kanylfacet, (2) kanyle, (3) kateter, (4) katetermuffe, (5) nålebeskytter, (6) flash back kammer, (7) prop til flash back kammer, (8) hylster, (9) kanylemuffehus.

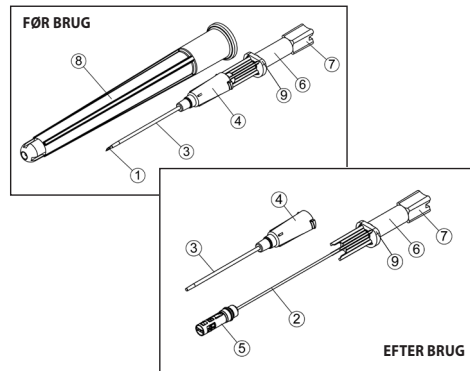

### STØRRELSES- OG REFERENCEOVERSIGT FOR KATETER

Størrelse	14G	16G	18G	20G	22G	24G
Farve	Orange	Grå	Grøn	Pink	Blå	Gul

Denne anordning er kun beregnet til engangsbrug og leveres steril og ikke-pyrogen. Materiale i dette røntgenfaste IV-kateter indeholder ikke latex og er fri for PVC og DEHP.

### 2. INDIKATIONER:

2.1 Et korrekt placeret Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ giver adgang til en vene eller arterie til udtagning af blodprøver, monitorering af blodtryk eller indgift af væsker.

2.2 Nålebeskytteren, der låses fast over kanylen, når den trækkes ud, reducerer risikoen for stikskader.

2.3 Disse katetre kan anvendes til alle patientgrupper under hensyntagen til patientstørrelse, egnethed til den opløsning, der skal indgives, og behandlingens varighed.

2.4 14 til 24 gauge katetre kan anvendes sammen med el-sprøjtelpumper på op til 300 psi.

### 3. KONTRAIKATIONER:

Ingen kendte

### 4. ADVARSLER:

4.1 For at sikre korrekt brug SKAL LÆGEN VÆRE ØVET I UDFØRELSE AF VENEPUNKTUR og følge brugsanvisningen. Hvis disse anvisninger ikke følges, er det forbundet med livsfare eller risiko for alvorlige personskader for patienten og/eller lægen.

### 4.2 Undgå risikoen for emboli:

• SKÆR IKKE I KATETERET og brug ikke skarpe instrumenter i nærheden af kateteret.

• Sæt aldrig introducernålen tilbage i kateteret, da den kan skære det over.

### 4.3 Undgå nålestikskader:

• UNDLAD AT BØJE KANYLEN under indføring, anlægning eller udtagning af kateteret.

• Hvis venepunkturen ikke lykkes, aktiveres sikkerhedsmekanismen, og både kanyle og kateter skal kasseres.

• Hvis enheden mod forventning ikke kommer ud, bortskaffes skarpe dele straks i en godkendt kanylebøtte.

• Kanylen er ikke beregnet til brug med en guidewire – den vil forhindre aktiveringen af nålens sikkerhedsanordning

Undlad at manipulere nålebeskytteren før eller efter brug.

### 5. FORHOLDSREGLER:

5.1 Produktet er sterilt, ikke-toksisk og ikke-pyrogen, medmindre pakken er åbnet, våd eller beskadiget. Kassér pakken, hvis den er åbnet, våd eller beskadiget

5.2 Der skal være åbent gennemløb, før el-sprøjtelpumper tages i brug. Anvendelse med el-sprøjtelpumper med et tryk over 300 psi kan forårsage lækager og/eller andre skader på produktet. Kateteret må ikke klemmes eller blokeres under brug med en el-sprøjtelpumpe. Kontroller, at sprøjtelpumpen er korrekt kalibreret og automatisk standser, hvis trykket overstiger 300 psi.

### 6. FØRSIGTIGHEDSREGLER:

6.1 Denne anordning er beregnet som hjælp til at undgå nålestikskader. Foruden denne brugsanvisning anbefales det, at den sundhedsprofessionelle følger de anbefalinger, der gives i standarderne fra CDC og OSHA (USA) eller tilsvarende lokale standarder for blodbårne patogener ved anlæggelse, vedligeholdelse eller bortskaffelse af IV-katetre for at undgå risikoen for kontakt med blod.

førekomme, før kateteret er helt inde i blodkarret. Før om nødvendigt kateteret og kanylen lidt frem sammen for at sikre, at kateteret er helt inde i blodkarrets lumen. Undgå utilsigtet punktur af blodkarrets posteriore væg ved at sænke kanylen, til den er parallel med huden.

6.4 Sørg for at, væskeadministrations-/muffeforbindelsen sidder fast for at undgå lækager.

6.5 Kontroller stabilisering af kateteret på patienten. Forkert stabilisering kan medføre tab af adgang til blodkarret.

7. BRUGSANVISNING: PÅ GRUND AF RISIKOEN FOR KONTAKT MED BLODBÅRNE PATOGENER FØLGES STANDARDFORHOLDSREGLERNE UNDER PLACERING, BRUG OG UDTAGNING AF ET IV-KATETER.

7.1 Vælg og klargør indstikstedet efter stedets regler. Anlæg en årepreps.

7.2 Aftag hylsteret i en lige bevægelse udad, og efterse anordningen. Kontroller, at den farvekodede katetermuffe er sat helt i, og kontroller, at kanylens facet vender opad.

7.3 Hold anordningen i det gennemsigtige, cylinderformede flash back kammer. Kontroller, at den flade del af kanylemuffehuset og kanylens facet vender opad.

7.4 Fasthold blodkarret med et forsigtigt træk i huden, og før kanylen ind i huden og blodkarret i en korrekt vinkel.

7.5 Blod, der løber tilbage i flash back kammeret, bekræfter, at kanylen er inde i blodkarret.

7.6 Gør vinklen mindre, og indfør enheden et lille stykke for at sikre, at katetret går ind i blodkarret.

7.7 Aftag åreprepsen.

7.8 For kanylen tages ud, anlægges et let tryk med fingrene mod blodkarret distalt for kateterspidsen. Fasthold kateterets koblingsmuffe, og tag kanylen ud ved at trække den lige tilbage. Nålebeskytteren går automatisk op og dækker kanylens spidsen.

Bemærk: Der kan opstå en let modstand, når den beskyttede kanyle fjernes fra katetermuffen.

7.9 Bemærk: Nålebeskytteren må ikke sættes tilbage i muffen, når den er udtaget.

7.10 Tilslut IV-infusionsslangen, og forbind indstikstedet i henhold til stedets regler.

7.11 Bortskaf straks enheden i en punkturnfast, lækagesikker engangsbeholder til skarpe genstande.

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter, designmærkerne Jelco og Smiths Medical er varemærker tilhørende Smiths Medical. Symbolet © angiver, at varemærket er registreret hos det amerikanske patent- og varemærkekontor og i visse andre lande. Alle andre navne og mærker, som er nævnt, er handelsnavne, varemærker eller servicemærker tilhørende de respektive ejere. Der er ingen forbindelse mellem Smiths Medical og Intuitive Surgical.

© 2012 Smiths Medical. Alle rettigheder forbeholdes.

da

Til engangsbrug.

Må ikke genanvendes: Medicinsk udstyr kræver specifikke materialeegenskaber for at fungere som tilsigtet. Disse egenskaber er kun kontrolleret til engangsbrug. Ethvert forsøg på at behandle udstyret til efterfølgende genbrug kan påvirke perfekt tilstand af udstyret negativt eller medføre forringet funktionsevne.

Steril med mindre enhedens beholder åbnes eller beskadiges.

Bortskaf efter engangsbrug.

Må ikke steriliseres igen.