

**seca 210**

**seca**  
Precision for health

## Hjertelig tillykke

Med målemåtten seca 210 har De købt et præcist og samtidig holdbart længdemåleapparat til spædbørn.

Målemåtten seca 210 er specielt beregnet til brug hos børnelæger, på børnehospitaler eller til jordemødres eller børnelægers besøg i hjemmene.

Målemåtten kan rulles sammen og optager derfor kun lidt plads.

Desuden er der huller i måtten ved hovedstopanslaget, som kan bruges til at hænge måtten op på væggen.

## Sikkerhed

Inden De tager den nye målemåtte i brug, bedes De bruge lidt tid på at læse de nedenstående sikkerhedshenvisninger igennem.

Overhold henvisningerne i brugsanvisningen.

- Lad aldrig spædbarnet ligge på målemåtten uden opsyn.
- Gennemfør altid kun målingen på et underlag, spædbarnet ikke kan falde ned fra.
- Sørg for, at målemåtten regelmæssigt bliver renset og desinficeret for at undgå en overføring af smitsomme sygdomme.
- Det er bedst at være to personer om målingen, for at den kan blive præcis.


## Betjening

### Måling:

1. Spædbarnet lægges på målemåtten. Spædbarnets hoved skal ligge mod målemåttens hovedstopanslag (1).
2. Med højre hånd skubber man fodstopanslaget (2) hen i retning af spædbarnets fødder. Med venstre hånd holdes barnet fast.

3. Stræk benene ved forsigtigt at trykke spædbarnets knæ lidt ned på måttens bund med venstre hånd.
4. Med højre hånd lægges fodstopanslaget (2) i en ret vinkel mod barnets fodsåler.
5. Aflæs kropslængden på markeringen på bunden af målemåtten (3).

Hvis den ovennævnte fremgangsmåde overholdes, opnår man en nøjagtighed, som er bedre end +/- 5 mm.

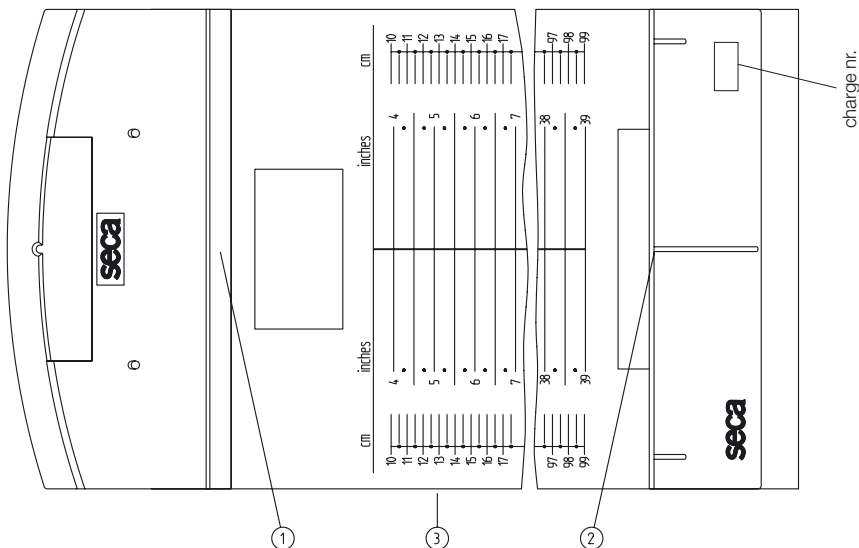

## Rensning

Rens målemåttan efter behov med et hus-holdningsrensningemiddel eller et almindeligt desinfektionsmiddel. Overhold producentens henvisning.

## Tekniske data

Måleområde: 100 - 990 mm / 4 - 39 inch  
Inddeling: 5 mm / 1/4 inch  
Nøjagtighed: bedre end  $\pm 5$  mm  
Mål (B x H x D): 300 mm x 140 mm x 1340 mm  
Egenvægt: ca. 500 g  
Temperatur-område: +10° C til +40° C  
Medicinsk produkt iht. direktiv 93/42/EØF: Klasse I med målefunktion

## Bortskaffelse

Når målemåttan en gang ikke skal bruges mere, kan det ansvarlige affaldsselskab give oplysning om de nødvendige forholdsregler til en faglig korrekt bortskaffelse.

## Garanti

For mangler, som skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, gælder en to års garantifrist fra dagen for leveringen. Alle bevægelige dele, f.eks. batterier, kabler, netenheder, akkuer osv., er udelukket herfra. Mangler, som dækkes af garantien, udbedres gratis for kunden mod fremlæggelse af salgskvitteringen. Der kan ikke tages hensyn til andre krav. Udgifter for transporten frem og tilbage debiteres kunden, hvis apparatet befinder sig på et andet sted end kundens adresse. Ved transportskader kan garantikrav kun gøres gældende, hvis hele den originale emballage er blevet benyttet til transporter, og varen har været sikret og befæstet deri på tilsvarende måde som originale emballagetilstand. Opbevar derfor alle emballagedele.

Garantien bortfalder, hvis apparatet åbnes af personer, som ikke udtrykkeligt er autoriseret hertil af seca.

I garantitilfælde beder vi kunder i udlandet om at henvende sig direkte til sælgeren i det pågældende land.

## CE-overensstemmelsesattest

### Mekanisk længdemåleapparat

model seca 210

charge nr.: se målemåttan

Målemåttan opfylder de gældende krav fra direktiv 93/42/EØF.

seca gmbh & co. kg.



– Geschäftsführer Finanzen & Technik –

Hamburg

: [www.seca.com](http://www.seca.com)

## **seca** deutschland

Medical Scales and Measuring Systems

seca gmbh & co. kg.

Hammer Steindamm 9-25

22089 Hamburg • Germany

Phone • +49 (0)40 20 00 00 0

Fax • +49 (0)40 20 00 00 50

E-mail • [info@seca.com](mailto:info@seca.com)

All contact data under [www.seca.com](http://www.seca.com)

17-10-02-222 h/08 L

**seca**  
group

**seca** deutschland

**seca** france

**seca** united kingdom

**seca** north america

**seca** schweiz

**seca** zhong guo

**seca** nihon

**seca** mexico

**seca** austria