



# GIMA

Gima S.p.A.


Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI) Italy

[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) – [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## TRANSABDOMINAL AMNIOCENTESIS NEEDLE

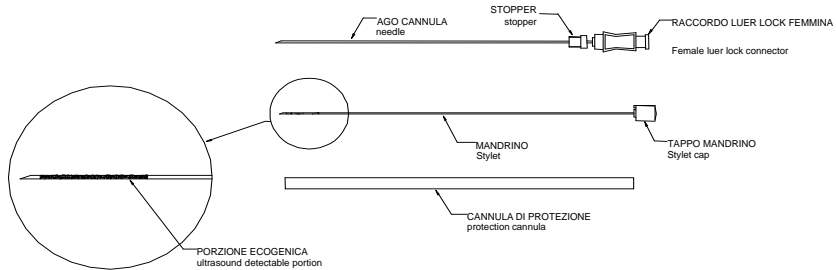

### Brugsanvisning

Vær sikker på, at mandrillen er lukket. Indfør nålen i en lodret akse for at følge ultralydssporet (tidligere identificeret) op til fostercisternen. Fjern mandrillen og påsæt en 20 cc sprøjte. Aspirer væsken ved et langsomt og moderat tryk.

Genindsæt mandrillen og fjern både nål og mandril. Overfør fostervæsken til et tørt sterilt prøveglas og opbevar det ved 37° C.

**Advarsel:** Bør kun anvendes under streng medicinsk overvågning. Anvendes umiddelbart efter åbningen. Kan indeholde spor af nikkel.

**REF** 770228 (Gima code 29636) - 770222 (Gima code 29637) -  
770201 (Gima code 29638) - 770201 (Gima code 29639) -  
770223 (Gima code 29640) - 770202 (Gima code 29641)

CE 0476

**STERILE R**



RI.MOS s.r.l.  
viale Gramsci, 29  
41037 Mirandola (MO) Italy

