



Littmann® CORE Stethoscope

Connects to Eko Software

Eko

3M

(en)	English	pp. 1	(sl)	Slovenski	pp. 33
(fr)	Français	pp. 3	(et)	Eesti	pp. 35
(de)	Deutsch	pp. 5	(lv)	Latviesu	pp. 37
(it)	Italiano	pp. 7	(lt)	Lietuviskai	pp. 39
(es)	Español	pp. 9	(ro)	Romana	pp. 41
(nl)	Nederlands	pp. 11	(hr)	Hrvatski	pp. 43
(sv)	Svenska	pp. 13	(bg)	Български	pp. 45
(da)	Dansk	pp. 15			
(no)	Norsk	pp. 17			
(fi)	Suomi	pp. 19			
(pt)	Português	pp. 21			
(el)	Ελληνικά	pp. 23			
(pl)	Polski	pp. 25			
(hu)	Magyar	pp. 27			
(cs)	Čeština	pp. 29			
(sk)	Slovensky	pp. 31			

3M™ Littmann® CORE digitalt stetoskop

Kom godt i gang

Download Eko-Appen i Apple App Store® eller Google Play Store®.

Aktivér Bluetooth® Wireless Technology på din telefon eller tablet, start appen, og tænd for CORE-stetoskopet.


Eko

I æsken

- Eko CORE digital tilføjelsesdel og 3M™ Littmann® Cardiology IV™-stetoskop
- Et ekstra sæt 3M Littmann Snap Tight Soft-Sealing øreoliven (small)
- Nonchill klok kemanchet
- USB-ladekabel
- Kom godt i gang

Øreoliven

Isæt øreoliverne i fremadvendt retning.

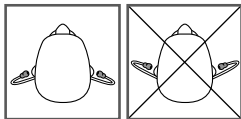

Lydstyrke

Brug knapperne (+) og (-) til at justere lydstyrken. Der er 7 lydstyrketrin.

Sådan tændes og slukkes for enheden

Når CORE-stetoskopet er slukket, fungerer det som et stetoskop uden lydforstærkning.

Tænd for CORE-stetoskopet ved at trykke på strømknappen. Indikatorlampen begynder at blinke.

Herefter kan du lytte til forstærket og filtreret lyd i øreoliverne.

Telemedicin- og AI-funktioner

Eko tilbyder telemedicin- og AI-funktioner, som kræver et softwareabonnement (sælges separat, hvor det er tilgængeligt).

Du kan tegne et abonnement online på ekohealth.com

Aktiv støjfiltrering

CORE-stetoskopet er udstyret med aktiv støjfiltrering, som fjerner støj fra det omgivende miljø. Aktiv støjfiltrering kan aktiveres og deaktiveres i Eko-appen.



Meddelelser

((••)) (blinker)

CORE-stetoskopet er tændt og søger enhed

● (gul)

CORE-stetoskopet er slukket og oplader

((••)) (gul)

CORE-stetoskopets batteriniveau er lavt

○

CORE-stetoskopet er tændt og tilsluttet

● (grøn)


CORE-stetoskopet er fuldt opladet

((••)) (blå)

CORE-stetoskopet optager

Optagelse

Når du har oprettet forbindelse til Eko-appen, skal du trykke på knappen (o) for at starte optagelsen.

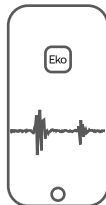

Opladning

Slut mikro-USB-kablet til CORE-stetoskopet, og brug en UL-certificeret eller CE-mærket 5V USB-vægoplader. En fuld opladning af CORE-stetoskopet varer ca. 2 timer. Indikatorlampen lyser grønt, når opladningen er afsluttet.

Brugsanvisning

Læs brugsanvisningen, før du bruger Littmann CORE-stetoskopet. Du kan se brugsanvisningen her: ekohealth.com/getstarted
Du kan finde flere oplysninger om 3M-enheder på HCBRegulatory.3M.com

Service og support

I USA: Se littmann.com/service, eller ring til 1-800-228-3957.
Uden for USA: Se kontaktoplysninger til det lokale 3M-kontor på littmann.com.

da

Apple App Store er et varemærke tilhørende Apple Inc.
Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.
Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG
LBL 143 Rev B

System assembled by 3M Company



3M Deutschland GmbH
Health Care Business

www.littmann.com



Made in USA with
Globally Sourced Materials

 **3M Company**

2510 Conway Ave.
St. Paul, MN 55144 USA



EC REP

3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss, Germany



Made in Malaysia

 **Eko Devices, Inc.**

1212 Broadway, Suite 100
Oakland, CA 94612 USA



0537

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

©2020 3M; Eko Devices Inc. All rights reserved.

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L, and Cardiology IV are marks and/or registered marks of 3M.

Unauthorized use prohibited.

Eko trademarks, including CORE, are marks and/or registered marks of Eko Devices Inc.

Issue Date: 2020-11

34-8726-3344-0