

DA - ENGANGSMUNDSTYKKE BRUGSANVISNING

TILSIGTET BRUG: Engangsmundstykker er beregnet til at blive brugt sammen med lungefunktionsundersøgelsesudstyr og giver patienten mulighed for at udføre testen uden at have direkte kontakt med udstyret. Patienten manipulerer personligt mundstykket ved at indsætte det i apparatet. Mundstykkerne må kun påføres i kontakt med intakt, ren og sund hud.

PRODUKTIDENTIFIKATION: Identifikationsdataene (kode, batch og produktionsdato) er vist på identifikationsetiketten på æsken.

ANVENDELSE:

- Følg altid brugsanvisningen til apparatet, hvor mundstykket er påsat
- Indsæt mundstykket i enhedens sensor (turbine eller pneumotachometer) uden at tvinge.
- Genbrug aldrig mundstykket for at undgå at udsætte patienten for risikoen for krydskontaminering.
- Må ikke åbnes før brug.
- Må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget.
- Enheden er ikke egnet til brug i neonatal pædiatri.
- Før brug skal den opbevares på et køligt, tørt sted.

BORTSKAFFELSE OG SIKKERHED: efter brug skal produktet bortskaffes i normale ikke-giftige faste affaldsbeholdere eller i almindeligt hospitalsaffald.



Bemærk, hvis enheden genbruges, er der risiko for krydsinfektion for den patient, der genbruger den

KONTRAINDIKATIONER: Baseret på erfaringer og resultaterne af forskellige analyser er der ingen skadelige virkninger som følge af passende brug af produktet.

OPBEVARING: Opbevares på et køligt, tørt sted.

ADVARSEL: den individuelle emballage i en varmeforseglet pose garanterer fravær af bakteriel belastning, som overvåges periodisk i henhold til producentens kvalitetssystem. Hvis enheden genbruges, er der risiko for krydsinfektion for den patient, der genbruger den.

Manuale d'uso LUMED Rev. 4.0 01/09/2023

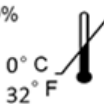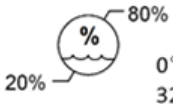

LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750