


BRUGSANVISNING TIL MINICYKEL

1. Tag minicyklen ud af kassen og håndtér den med forsigtighed. Se billede 1.
2. Læg minicyklen på gulvet i vandret position, og sæt knapskruen A på som vist på billedet. Se billede 2.
3. Drej knapskruen A, så akse B-trykket er korrekt (mod venstre for at øge trykket, mod højre for at mindske trykket). Tænd for regnemaskinens knap C og drej akslen B, så den straks begynder at køre. Se billede 3. (se brugsanvisningen til regnemaskinen for detaljer.)
4. Træk stiften D indad efter brug og fold den godt sammen som vist på billede 5.
5. Bemærk:
 - (1) Kontroller, at den er placeret stabilt og i samme niveau inden brug;
 - (2) Husk at sænke trykket til et minimum, når du begynder at bruge den, og øg det derefter til det nødvendige niveau;
 - (3) Egnet til: voksne, børn, ældre;

ADVARSEL: Forsøg ikke at stå op på mini-cyklen, da det kan beskadige maskinen.

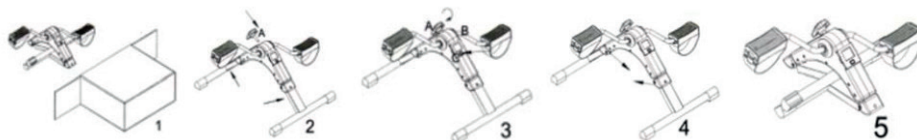

BRUGSANVISNING TIL TRÆNINGSCOMPUTER

SPECIFIKATIONER:

TIME -----00:00-99:59MIN
 COUNT-----0-9999
 REPS/MIN-----0-9999
 CALORIE -----0-9999KAL

KEY FUNCTION:

MODE: Denne tast bruges til at vælge og låse en bestemt funktion, og hold tasten nede i 4 sekunder for at nulstille alle funktionsværdier.


FUNKTIONSPROCEDURER:

AUTO TÆND/SLUK: Systemet tændes, når der trykkes på en tast, eller når det registrerer et input fra hastighedssensoren. Skærmen slukkes automatisk, hvis der ikke kommer noget signal inden for 4 minutter.

FUNKTION:

TIME Tryk på MODE-tasten indtil ">" peger på TIME. Når hastighedssensoren modtager et signal, starter den optællingen og akkumulerer automatisk træningstiden, når træningen starter. **COUNT** Når ">" peger på COUNT, viser computeren antallet af trin. Når hastighedssensoren modtager et signal, starter den optællingen og akkumulerer automatisk træningsoptællingen, når træningen starter. **REPS/MIN** Tryk på MODE-tasten indtil "<" peger på REPS/MIN. Når hastighedssensoren modtager et signal, starter den optællingen og akkumulerer automatisk træningsoptællingen, når træningen starter. **CALORIE** Tryk på MODE-tasten indtil ">" peger på CAL. Når hastighedssensoren modtager et signal, starter den optællingen og akkumulerer automatisk træningskalorier, når træningen starter. **SCAN** Når ">" peger på SCAN, viser computeren automatisk følgende funktioner i den viste rækkefølge: TIME-----COUNT-----STRIDES-----CALORIES

BEMÆRK 1. Batterispec: 1.5V, LR44 (1 stk.) - 2. Hvis displayet ikke vises korrekt på skærmen, skal du geninstallere batterierne. - 3. Procedure for installation af batterier:

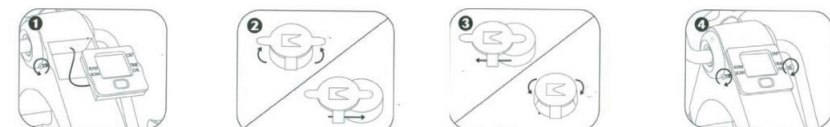

Løsn og fjern skærmen på hver side af skærmenhed-
 en, og fjern derefter forsigtigt skærmenheden fra
 dens sokket.

Løft batteritappene op på bagsiden af skærmenhed-
 en, og skub batteriet ud.

Indsæt et nyt 1.5V AG13 batteri med den positive pol
 nedad, og luk tappene.

Sæt skærmenheden tilbage i soklen og fastgør den
 med skruen

GIMA GARANTIBETINGELSER

Standard Gima B2B garanti på 12 måneder gælder.

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός:
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD
No.31th Floor, Jinmao Building, CBD Centre,
Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

REF TD001P-3

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por/ Ein-
geführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

GIMA 43151