



Littmann® CORE Stethoscope

Connects to Eko Software

Eko

3M

(en)	English	pp. 1	(sl)	Slovenski	pp. 33
(fr)	Français	pp. 3	(et)	Eesti	pp. 35
(de)	Deutsch	pp. 5	(lv)	Latviesu	pp. 37
(it)	Italiano	pp. 7	(lt)	Lietuviškai	pp. 39
(es)	Español	pp. 9	(ro)	Romana	pp. 41
(nl)	Nederlands	pp. 11	(hr)	Hrvatski	pp. 43
(sv)	Svenska	pp. 13	(bg)	Български	pp. 45
(da)	Dansk	pp. 15			
(no)	Norsk	pp. 17			
(fi)	Suomi	pp. 19			
(pt)	Português	pp. 21			
(el)	Ελληνικά	pp. 23			
(pl)	Polski	pp. 25			
(hu)	Magyar	pp. 27			
(cs)	Čeština	pp. 29			
(sk)	Slovensky	pp. 31			

3M™ Littmann® CORE'i digitaalne stetoskoop

Lühijuhend

Laadige Eko rakendus alla Apple App Store®-ist või Google Play poest®.

Lülitage sisse Bluetooth®-i juhtmeta tehnoloogia oma telefonis või tahvelarvutis, käivitage rakendus ja lülitage CORE'i stetoskoop sisse.


Eko

Karbi sisu

- Eko CORE'i digitaalne lisatarvik ja 3M™ Littmann® Cardiology IV™ stetoskoop
- Lisakomplekt 3M Littmanni hästi paigalpäisivaid, tihedaid ja pehmeid kõrvatroppe (väikesed)
- Kummirõngas
- USB-laadimiskaabel
- Lühijuhend

Kõrvatroppid

Pistke kõrvatroppid kõrva ettepoole suunatult.

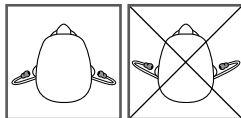

Helitugevus

Kasutage helitugevuse reguleerimiseks nuppe (+) ja (-). Helitugevuse reguleerimiseks on 7 taset.

Sisse- ja väljalülitamine

Kui CORE'i stetoskoop on välja lülitatud, töötab see võimenduseta stetoskoobina.

CORE'i stetoskoobi sisselülitamiseks vajutage toitenupp sisse. Märgutuli hakkab vilkuma. Nüüd kuulete kõrvatroppidest võimendatud ja filtreeritud heli.

Telemediitsini ja tehisintellekti funktsioonid

Eko pakub telemediitsini ja tehisintellekti funktsioone, mis nõuavad tarkvara abonementi (seal, kus saadaval, müüakse eraldi).

Saate sõlmida abonementi veebisaidil ekohealth.com

Aktiivne mürasummutus

CORE'i stetoskoop kasutab aktiivset mürasummutust ümbritseva keskkonnamüra eemaldamiseks. Aktiivne mürasummutuse saab Eko rakenduses välja või sisse lülitada.



Teated

((())) (viilub) ● (kollane) ((••)) (kollane)

CORE'i stetoskoop on sisse lülitatud ja otsib seadet

CORE'i stetoskoop on välja lülitatud ja laeb


CORE'i stetoskoobi aku hakkab tühjaks saama

○ CORE'i stetoskoop on sisse lülitatud ja ühendatud ● (roheline) CORE'i stetoskoop on täielikult laetud

((••)) (sinine) CORE'i stetoskoop salvestab

Salvestamine

Kui seade on ühendatud Eko rakendusega, vajutage salvestamise alustamiseks nuppu (o).

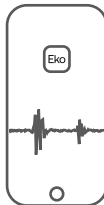

Laadimine

Ühendage Micro-USB-kaabel CORE'i stetoskoobiga ja kasutage UL-i sertifikaadiga või CE-märgistusega 5 V USB-seinalaadijat. CORE'i stetoskoobi täislaadimiseks kulub umbes 2 tundi. Kui seade on laetud, süttib roheline märgutuli.

Kasutusjuhend

Enne stetoskoobi Littmann CORE kasutamist lugege kasutusjuhend läbi. Kasutusjuhendit saate vaadata järgmiselt aadressilt: ekohealth.com/getstarted
Lisateavet 3M-i seadmete kohta vt HCBGregulatory.3M.com

Hooldus ja tugi

USA-s minge veebisaidile littmann.com/service või helistage numbrile 1-800-228-3957. Väljaspool USA-d vaadake ettevõtte 3M kohaliku esinduse kontaktandmeid veebisaidilt littmann.com.

Apple App Store on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärk.

Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.

Bluetooth® on Bluetooth SIG registreeritud kaubamärk
LBL 143 red. B

System assembled by 3M Company



3M Deutschland GmbH
Health Care Business

www.littmann.com



Made in USA with
Globally Sourced Materials

 **3M Company**

2510 Conway Ave.
St. Paul, MN 55144 USA

MD

CE

 **3M Deutschland GmbH**
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss, Germany



Made in Malaysia


 **Eko Devices, Inc.**

1212 Broadway, Suite 100
Oakland, CA 94612 USA

MD

CE

0537

 **Emergo Europe**
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

©2020 3M; Eko Devices Inc. All rights reserved.

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L, and Cardiology IV are marks and/or registered marks of 3M.

Unauthorized use prohibited.

Eko trademarks, including CORE, are marks and/or registered marks of Eko Devices Inc.

Issue Date: 2020-11

34-8726-3344-0