


KASUTUSJUHI MINIJALGRATTA JAOKS

1. Võtke minijalgratta korpus karbist välja ja käsitsege seda ettevaatlikult. Vaadake pilti 1.
2. Asetage minijalgratta korpus tasasele pinnale ja seejärel keerake sellele peaga kruvi A, nagu pildil näidatud. Vaadake pilti 2.
3. Pöörake peaga kruvi A nii, et telge B korralikult survestada. (Vasakule poole, et avaldada survet, vastupidiselt on surve vähendamine) Lülitage kalkulaatori nupp C sisse ja pöörake telge B, see hakkab kohe tööle. Vaadake pilti 3. (Üksikasju vaadake kalkulaatori juhendist).
4. Pärast kasutamist tõmmake tihvti O sissepoole ja keerake see hästi kokku, nagu pildil 5 on näidatud.
5. Märkus. (1) Kontrollige seda ja veenduge, et see oleks enne kasutamist kindlalt tasasele pinnale asetatud;
(2) Pidage meeles, et alustage miinimum survega ning seejärel suurendage survet soovitud tasemeni jõudmiseks;
(3) Sihtrühm: täiskasvanud, lapsed, eakad;

HOIATUS! Ärge proovige minijalgrattal püsti tõusta, see kahjustab seadet

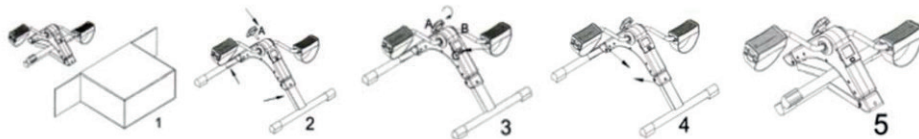

HARJUTAMISE ARVUTISÜSTEEMI KASUTUSJUHE

SPETSIFIKATSIOONID:

TIME -----00: 00-99:59MIN
COUNT-----0-9999
REPS/MIN-----0-9999
CALORIE -----0-9999KAL

NUPPUDE FUNKTSIOONID:

MODE: see nupp võimaldab teil valida ja lukustada konkreetse soovitud funktsiooni ning hoidke nuppu all 4 sekundit, et kõik funktsiooni väärtused lähtestada.

KÄSITSEMINE:


AUTOMAATNE SISSE/VÄLJA: süsteem lülitub sisse, kui vajutada mõnda nuppu või kui see tuvastab kiirusanduri sisendi. Ekraan lülitub automaatselt välja, kui 4 minuti jooksul ei tule signaali.

FUNKTSIOON:


TIME Vajutades MODE nuppu kuni ">" osutab TIME. Kui kiirusandur saab signaalisendi, alustab see loendamist ja hakkab koguma automaatselt treeningu alustamisel treeninguaega.

COUNT Kui ">" osutab COUNT, kuvab ekraan samme. Kui kiirusandur saab signaalisendi, alustab see loendamist ja hakkab koguma automaatselt treeningu alustamisel treeningute sammude arvu. **REPS/MIN** Vajutades MODE nuppu kuni "<" osutab REPS/MIN. Kui kiirusandur saab signaalisendi, alustab see loendamist ja hakkab koguma automaatselt treeningu alustamisel treeningutel loendatud arvu. **CALORIE** Vajutades MODE nuppu kuni ">" osutab CAL. Kui kiirusandur saab signaalisendi, alustab see loendamist ja hakkab koguma automaatselt treeningu alustamisel treeningul loetud kaloreid. **SCAN** Kui ">" osutab SCAN kuvab süsteem automaatselt järgmised funktsioonid selles järjekorras: TIME-----COUNT-----STRIDES-----CALORIES


MÄRKUS 1. Patarei andmed:1.5V, LR44 (1tk) - 2. Kui ekraani kuvamisel on viga, paigaldage patarei uuesti. - 3. Patarei paigaldamine:

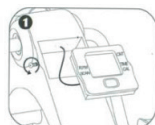


Keerake lahti ja eemaldage ekraani mõlemal küljel olevad kruvid, seejärel eemaldage ekraaniküsis ettevaatlikult patarei.

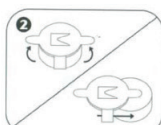

Tõstke ekraani tagaküljel olevad aku kinnituskambri üles ja libistage aku välja.

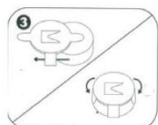

Sisestage uus 1,5 V AG13 patarei, positiivne pool allpool, ja sulgege kaht.

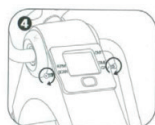

Asetage ekraaniküsis oma pesasse tagasi ja kinnitage kruviga.

GIMA GARANTII TINGIMUSED

Kehtib tavapärane Gima B2B garantii 12 kuud.

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός:
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD
No.31th Floor, Jinmao Building, CBD Centre,
Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

REF TD001P-3

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por / Eingeführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

GIMA 43151