



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**MISURATORE CORPOREO**

**BODY METER**

**RUBAN PÉRIMÉTRIQUE**

**MEDIDOR CORPORAL**

**KÖRPERFETTMESSGERÄT**

**MEDIDOR CORPORAL**

**Μεζούρα Σώματος**

**م س ج ل ا س ا ي ق م**

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.
- Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

يف قصتخ م ل ا ق ط ل س ل ا و ق ع ر ن ا ص ل ا ق م ج ل ا ي ل ا ! ه ب ا ن د و ز ي ذ ل ا ي ب ط ل ا ز ا ه ج ل ا ب ق ل ع ت ي ا م ي ف ع ق و ر ي ط خ ث د ا ح ي ا ن م ا ر و ف غ ا ل ب ا ل ا ب ج ي ا ه ي ف ع ق ي ي ت ل ا و ض ع ل ا ق ل و د ل ا

**REF G006D (Gima 27347 - 27350)**

Distribuito da/Distributed by/Distribué par/Distribuido por/Vertrieben von/Διανέμονται από/توزيع من عزوم/  
**Gima S.p.A.** - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com - [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importado por/Eingeführt von/Εισαγωγή από/عناصلا:  
**Solution Group S.r.l.** - Via Carlo Sormani, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) - Italy  
solutiongroup@legalmail.it - [www.solutiongroup.it](http://www.solutiongroup.it)

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Fabricante/Hersteller/Κατασκευαστής/عناصلا:  
Samson Innovation Corporation Ltd. - Room F, 8th Floor, Hop Hing Industrial Building, 704 Castle Peak Road,  
Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong - Made in China




Tape to measure the distribution of adipose tissue. ABS body with ergonomic grip. The tape is made of a special non-deformable plastic material, with double coloured measurement scale for separate risk indications, male and female.

It can be used on all body circumferences, thanks to its retractable button and flexible stop which allows for the data to be read easily.

The particular flexibility of its non-toxic thermoplastic arm allows for specific use in paediatric settings

Tape position for the correct measurement of the abdominal circumference

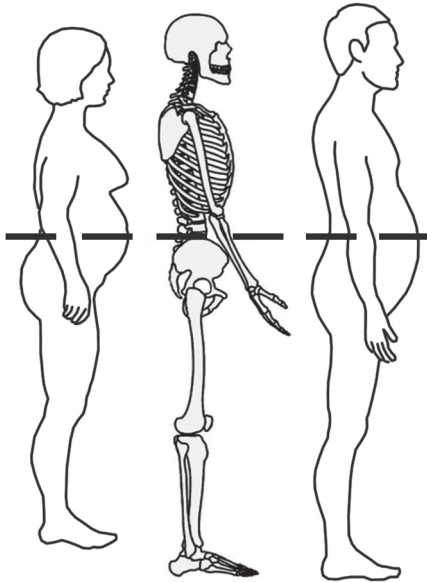

*Individual in standing position.*

*Locate the upper edge of the hip and the top of the right iliac crest.*

*Place the horizontal tape around the abdomen at the level of the edge of the iliac crest.*

*Before taking the measurement, make sure that the tap is tight but not compressing the skin and that it is parallel to the floor.*

*Take the measurement at the end of a normal exhalation.*

### **GIMA WARRANTY TERMS**

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.