



Via Dell'Artigianato 305/319
Castelbolognese – RA
Italy

Manuale istruzioni
Versione N° 00
del 08/01/2003



MANUALE ISTRUZIONI
INSTRUCTION MANUAL
Italiano/English



SPD/SPD-1/SPD-A



Leggere il presente manuale prima di utilizzare il seggiolino
Read this manual before operating the stool

VERSIONE/ VERSION N.00	REDATTO/DREW BY <i>F. Marrone</i>	DATA/DATE 08/01/2006	APPROVATO/ APPROVED BY <i>Maurilio Longo</i>	DATA/DATE 08/01/2006
Questo documento è realizzato da EUROCLINIC . È vietata la duplicazione e la divulgazione non autorizzata This document has been made by EUROCLINIC . It is prohibited to double or divulge it without authorisation.				

1. INTRODUCTION

They are stools for professional use, completely built in stainless steel, 360° pivoting self breaking casters, rubber-tyred.

The height can be comfortably adjusted by means of a gas pump; the back-rest is 180° revolving and depth-adjustable.

The seat is balanced density padded and Peltex-lined.

There are three models: SPD, SPD/1, SPD/A and they all differ in their specific base shape

2. INSTALLATION

- 1 – To insert pivot inside wheels
- 2- To insert wheels in the basement
- 3- To install the gas column on the basement
- 4- To install the mechanism for movement to the gas column
- 5- To insert the backrest's steel in its support and to tighten the knob
- 6- To fix the upholstery with screws


- SCHEMA DI MONTAGGIO E INSTALLAZIONE – INSTALLATION SCHEME



1+2



3

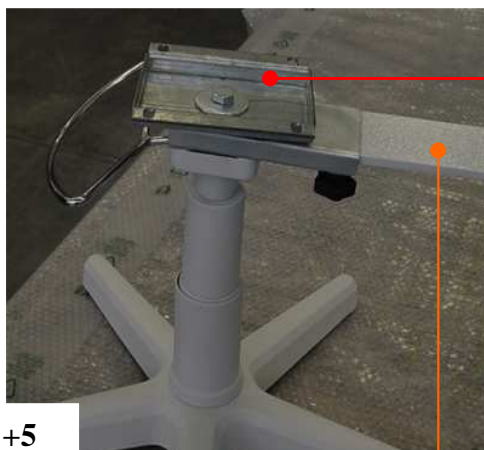

4+5



6




6

3. MOVIMENTAZIONE SEDILE

Sollevando verso l'alto la leva A si sblocca il movimento sia verso l'alto che verso il basso; per bloccare il seggiolino nella posizione desiderata e' sufficiente spingere verso il basso la stessa leva.

3. SEAT HANDLING

Lifting up the lever "A" the up/down movement is unblocked: to block the stool at the desired position it is enough to push down the same lever;

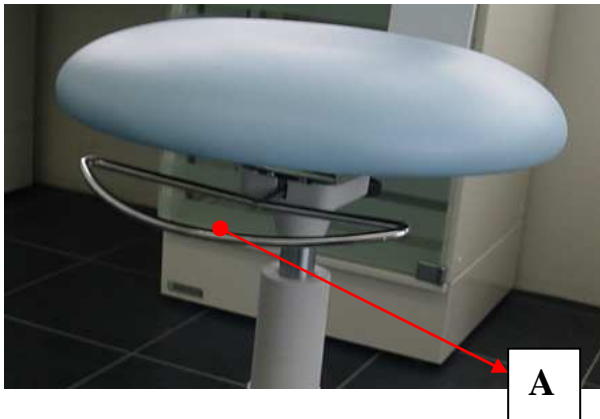


4. MOVIMENTAZIONE SCHIENALE

E' possibile spostare longitudinalmente lo schienale tramite il pomello B.

4. BACKREST HANDLING

It is possible to move longitudinally the backrest through knob B

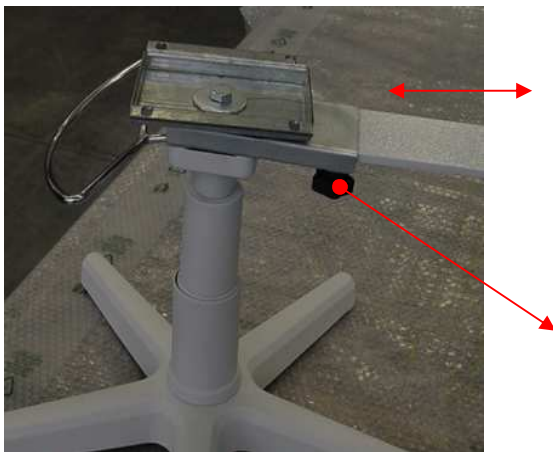

5. MAINTENANCE. CHAIR CLEANING.

All materials used to construct the equipments can support cleaning and disinfection operations due in these instructions.

The great variety of drugs chemical products, which are used on medical study can damage painted surfaces and plastic material parts.

Proofs and inquiries made substantiate that surfaces cannot be outright protected by aggression of all products which you can find on the market.

The effects of these products above all depend on time and stay on surfaces.

It is important to remove that chemicals by a damp colth from equipment surfaces immediately.

To clean, please, kindly use a damp colth; do not spray the detergents directly on the equipment.

ATTENTION!

Do not use products which contain alcohol, ammonia, abrasive substances, benzene.

The concentrations listed below are the maximum ones that are consented and they cannot be surpassed:

Quaternary Ammonium: maximum 2%


Glutaric Aldehyde: maximum 2%

**EUROCLINIC WILL NOT BE HELD
RESPONSIBLE FOR DAMAGES CAUSED BY
USE OF DISINFECTANTS WHICH CONTAIN
ACTIVE SUBSTANCES DIFFERENT FROM
THOSE ABOVE MENTIONED.**

6. SPARE PARTS LIST

Euroclinic


Tabella codici
SPD/A
codice struttura
25500702

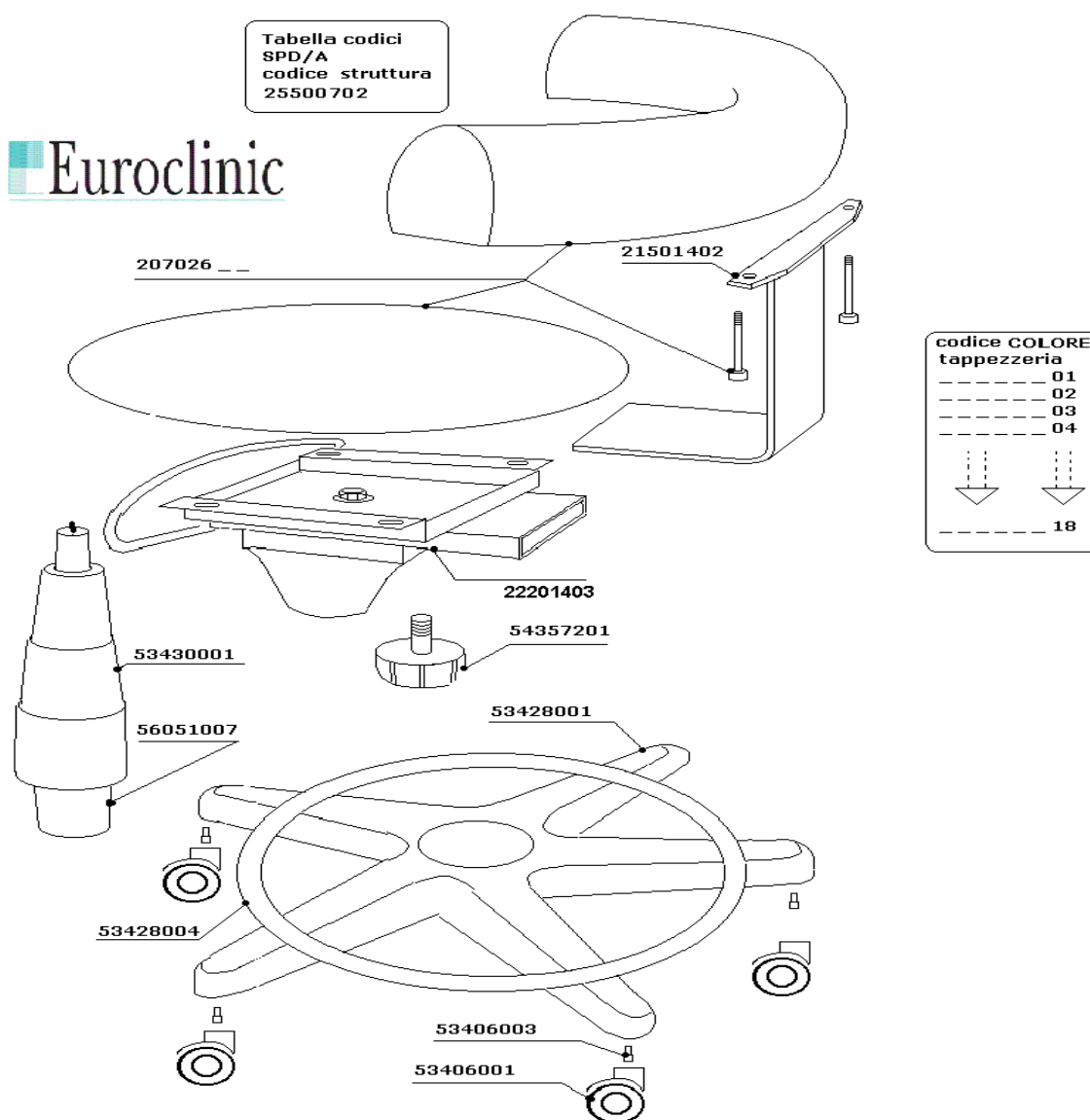

SPD

SPD/1

53428001

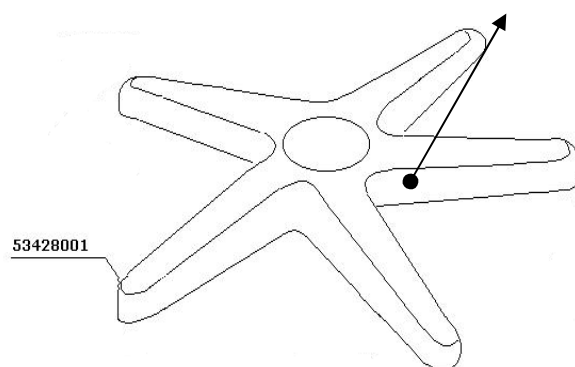

21501401

