

## SINUS A

Nasal Wash

120 ml Bottle + 12 Saline Sachets

# SINUS A

**Composition:** Sodium Chloride, Sodium Bicarbonate


**Properties:** Nasal washing alleviates symptoms caused by allergies, sinus infection, dry air, nasal congestion, Post-nasal drip and rhinitis of pregnancy. It has been clinically proven to provide effective relief for uncomfortable sinus and nasal conditions and promote better breathing. The bottle uses saline solution to wash the nasal passages. It's all natural and is safe for children up to 12 years old and adults, including pregnant and nursing mothers and people taking other medications. Simply dissolve a Sachet of the pre-mixed saline ingredients in warm water inside the bottle, shake it well, and squeeze the bottle and refresh and protect the nasal passages.

**Indications:** Helps in relieving sinus symptoms, post nasal drip, congestion, dryness, nasal allergies, nasal irritation from occupational dust, fumes, animal dander, grass, pollen, smoke, smog and house dust.

### DO NOT USE BELOW 12 YEARS OLD!

**Direction of use:** Put 1 Sachet inside the bottle (02). Fill it with water until 120 ml and shake it well (03 & 04). Place the nozzle in each nostril (05). Squeeze the bottle (06). Repeat this step until you feel the flow of the solution through the other nostril, repeat the previous two steps to decongest the nose.

See the pictures below.

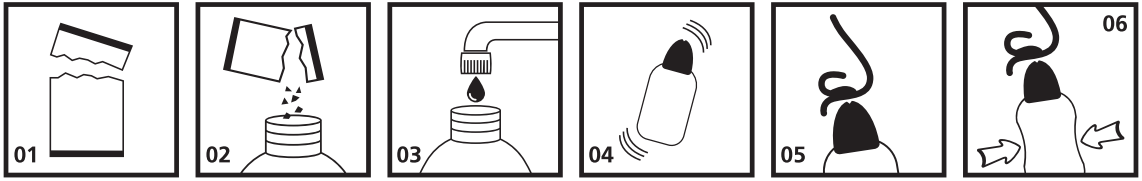

**Dosage:** Adults & Children 12 years & over: 1-2 sachets up to every 2 hours as often as needed.

**Warning:** Stop use and ask a doctor if washing is uncomfortable or symptoms are not relieved. This product is for personal use, do not use same bottle for more than one person. Wash with soap and water after each use.

**Side Effects:** There have been relatively few side effects reported with the proper use of sinus nasal wash, and they are considered minor. These include itching and slight stinging sensation inside the nose. Discontinue use and consult your doctor if you develop an allergic reaction to sinus nasal wash.

Sinus Nasal Wash is safe to be used during Pregnancy & Breast-feeding.

**Storage:** Protect Saline Sachets from excessive heat and moisture, between 5-30°C.

Use within 12 months of opening.

**Keep out of reach of children.**

**Packaging:** 120 ml Bottle + 12 Saline Sachets (3g).

In case of accidental eye exposure, immediately and thoroughly flush with fresh water, also under eyelids, for at least 15 minutes. Seek for medical attention if irritation persists.




**REF** T1015.428.0001 (GIMA 28084)



Turkuaz Sağlık Hizmetleri Medikal Temizlik Kimyasal  
Ürünler San. ve Tic. A.Ş. Akçaburgaz Mah. Muhsin  
Yazıcıoğlu Cad. No: 45/5 - 34522 Esenyurt / İstanbul / TURKEY



**Gima S.p.A.** Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com

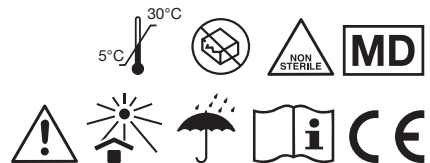

















# SINUS **A**

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

	<b>IT</b> Codice prodotto <b>GB</b> Product code <b>FR</b> Code produit <b>ES</b> Código producto		<b>IT</b> Fabbricante <b>GB</b> Manufacturer <b>FR</b> Fabricant <b>ES</b> Fabricante
	<b>IT</b> Numero di lotto <b>GB</b> Lot number <b>FR</b> Numéro de lot <b>ES</b> Número de lote		<b>IT</b> Limite di temperatura <b>GB</b> Temperature limit <b>FR</b> Limite de température <b>ES</b> Límite de temperatura
	<b>IT</b> Conservare in luogo fresco ed asciutto <b>GB</b> Keep in a cool, dry place <b>FR</b> À conserver dans un endroit frais et sec <b>ES</b> Conservar en un lugar fresco y seco		<b>IT</b> Data di fabbricazione <b>GB</b> Date of manufacture <b>FR</b> Date de fabrication <b>ES</b> Fecha de fabricación
	<b>IT</b> Conservare al riparo dalla luce solare <b>GB</b> Keep away from sunlight <b>FR</b> À conserver à l'abri de la lumière du soleil <b>ES</b> Conservar al amparo de la luz solar		<b>IT</b> Dispositivo medico <b>GB</b> Medical Device <b>FR</b> Dispositif médical <b>ES</b> Producto sanitario
	<b>IT</b> Leggere le istruzioni per l'uso <b>GB</b> Consult instructions for use <b>FR</b> Consulter les instructions d'utilisation <b>ES</b> Consultar las instrucciones de uso		<b>IT</b> Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato <b>GB</b> <b>GB</b> Don't use if package is damaged <b>FR</b> Ne pas utiliser si le colis est endommagé <b>ES</b> No usar si el paquete está dañado
	<b>IT</b> Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso <b>GB</b> Caution: read instructions (warnings) carefully <b>FR</b> Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) <b>ES</b> Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		<b>IT</b> Dispositivo monouso, non riutilizzare <b>GB</b> Disposable device, do not re-use <b>FR</b> Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser <b>ES</b> Dispositivo monouso, no reutilizable
	<b>IT</b> Data di scadenza <b>GB</b> Expiration date <b>FR</b> Date d'échéance <b>ES</b> Fecha de caducidad		<b>IT</b> Non sterile <b>GB</b> Non-sterile <b>FR</b> Pas stérile <b>ES</b> No estéril
	<b>IT</b> Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 <b>GB</b> Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 <b>FR</b> Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 <b>ES</b> Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		<b>IT</b> Distribuito da <b>GB</b> Distributed by <b>FR</b> Distribué par <b>ES</b> Distribuido por