


# **VENTOSA FETALE VACUUM**

## **FETAL VACUUM CUP**

### **Manuale d'uso - User manual**

**ATTENZIONE:** Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.  
**ATTENTION:** The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

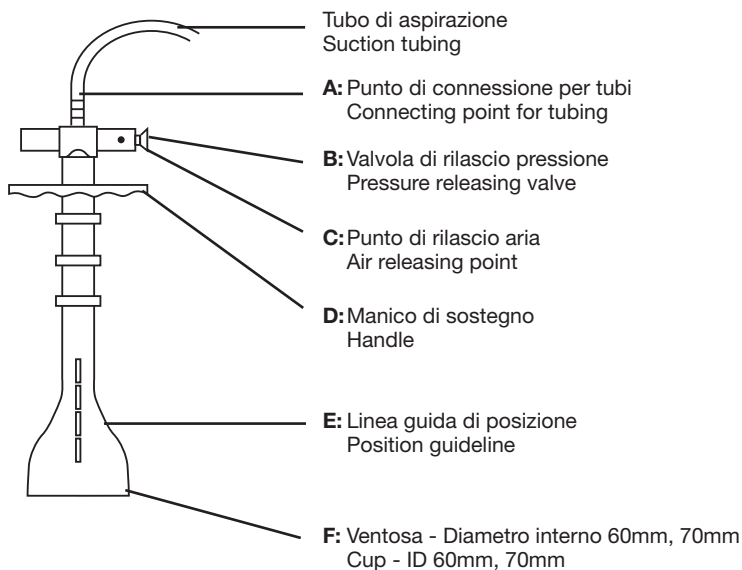

# DESCRIPTION

Fetal Vacuum Cup is for birth assistance. Available for two sizes, 60mm, and 70mm ID. Made of medical grade silicone rubber.  
Soft suction cup allow for easy insertion, and blue guideline is designed for positioning reference. Polysulfone handle for light weight and autoclavable.

# OPERATION INSTRUCTIONS

1. Connect the tubing to both the suction point of the suction machine and connecting point of the suction cup (A).
2. Turn on the suction pump.
3. Attach the cup (F) to the fetal head. The fetal head will be gripped once been attached.
4. Press pressure releasing valve (B) to release fetal head.

# CAUTIONS

1. U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician (USA only).
2. Don't apply this device for a long time after gripping the target. It may cause bruise of fetal.
3. Don't apply it on vulnerable area, such as eyes, mouths, and temples. Only apply it on area with bones.
4. After gripping the fetal head, make sure the guideline is straight when pulling it . Don't twist the cup.
5. Steam Sterilization is typically carried out in an autoclave at 121°C (250°F) for 15-75 minutes.

| Simboli - Symbols                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                     |                                           |                                                                                     |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    | IT - Prodotto conforme alla Direttiva Europea<br>GB - Product complies with European Directive                     |    | IT - Codice prodotto<br>GB - Product code |    | IT - Conservare al riparo dalla luce solare<br>GB - Keep away from sunlight   |
|   | IT - Leggere e seguire attentamente le istruzioni per l'uso<br>GB - Read instructions carefully                    |  | IT - Numero di lotto<br>GB - Lot number   |   | IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto<br>GB - Keep in a cool, dry place |
|  | IT - Leggere attentamente le istruzioni per l'uso<br>GB - Please read instructions carefully                       |  | IT - Fabbricante<br>GB - Manufacturer     |  | IT - Data di fabbricazione<br>GB - Date of manufacture                        |
|   | IT - Rappresentante autorizzato nella Comunità europea<br>GB - Authorized representative in the European community |  | IT - Data di scadenza<br>GB - Expiry date |                                                                                     |                                                                               |



29980 / VC-95200  
29981 / VC-95300



Besmed Health Business Corp.  
No. 5, Lane 116, Wu-Kong 2nd Road, Wu-Ku District,  
New Taipei City 24888, Taiwan  
Made in Taiwan



Mdi Europa GmbH - Langenhagener Str. 71  
30855 Hannover-Langenhagen - Germany

CE 2460

