



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 - fax +39 02 95380056
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

OROLOGIO DIGITALE PER INFERMIERI DIGITAL NURSE WATCH MONTRE D'INFIRMIÈRE DIGITALE RELOJ DIGITAL PARA ENFERMERA

Manuale d'uso - User manual
Manuel de l'utilisateur - Guía de uso




ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

REF 20480



Gima S.p.A.
Gessate (MI) - Italy
Made in China



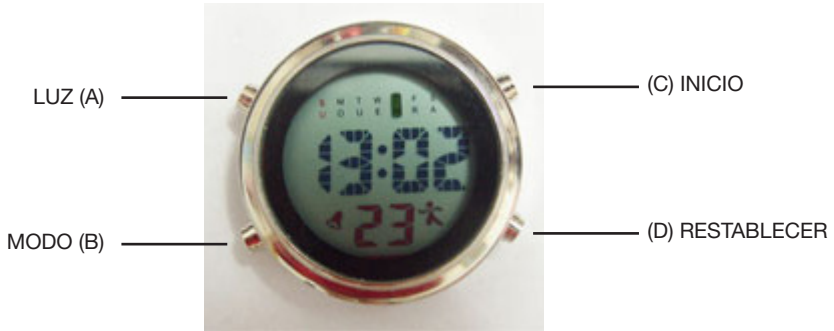

Funciones

Pantalla de 6 dígitos: Mes, fecha,
 día de la semana, horas, minutos, segundos
 Cronómetro
 12/24 horas
 Alarma
 Luz de fondo EL



Instrucciones

Configurar Hora y Fecha, día de la semana

Pulsar B 3 veces, los dígitos de los segundos parpadean, configurar la hora presionando D, C, presionar C para confirmar y regresar a la pantalla normal.

Por favor, configure la hora siguiendo los pasos.

Pulsar B 3 veces (Ejemplo: **13:02:23**)

Segundos (23) parpadean, presionar D para aumentar los segundos, presionar C para regresar a 00, presionar C para confirmar.

Minutos (02) parpadean, presionar D para aumentar los números, presionar C para confirmar.

Hora (13) parpadea, presionar D para aumentar los números, presionar C para confirmar.

La fecha parpadea, presionar D para aumentar los números, presionar C para confirmar.

El mes parpadea, presionar D para aumentar los números, presionar C para confirmar

La semana parpadea, presionar D, mover el destello al día de la semana correcto, luego presionar B para confirmar todas las configuraciones y regresar a la pantalla normal.



Cronómetro

En la pantalla normal, pulsar B una vez para entrar en el modo de cronómetro, Pulsar D una vez: Iniciar/Detener el conteo del tiempo.

Pulsar C una vez: Borrar la fecha. Pulsar B una vez: Regresar a la pantalla normal.



12/24 horas

En la pantalla normal, pulsar B 3 veces:

Entrar en el modo de configuración

de la hora, pulsar C dos veces para entrar

en el modo de conmutación 12/24: presionar D hasta que aparezca 12/24.

Pulsar B una vez: Regresar a la pantalla normal.

Luz de fondo EL

Pulsar A una vez: La luz EL se enciende durante 3 segundos.

Configurar Alarma

En la pantalla normal.

Pulsar B dos veces para entrar en el modo alarma, la hora parpadea,

presionar D para ajustar la hora, luego presionar C, los minutos parpadean,

presionar D para ajustar los minutos, presionar B para regresar a la pantalla normal.

Encender/Apagar alarma

Presionar C (no soltar), presionar D al mismo tiempo para configurar Encender/Apagar alarma. La alarma permanece encendida durante 1 minuto.

Timbre de cada hora

Presionar C (no soltar), presionar B para configurar el encendido/apagado del timbre de cada hora. Cuando el timbre de cada hora está encendido, se visualizan todos los días de la semana.

De lo contrario, significa que el timbre de cada hora está apagado.

Sustitución de la batería

En la parte posterior del reloj hay una pequeña fisura para abrir la caja y poder acceder a la batería. Levantar la parte posterior con un instrumento de punta fina. Quitar la tapa de metal y sacar la batería deslizándola lateralmente. Introducir la nueva batería teniendo en cuenta la polaridad, con el "+" hacia arriba. Colocar de nuevo la tapa de metal y cerrar la caja.

Peso: 45g

Batería: Pila al litio 3V CR2025



Eliminación: *El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos. Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desguazar llevándolos al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos. Para más información sobre los lugares de recogida, contactar el propio ayuntamiento de residencia, el servicio de eliminación de residuos local o la tienda en la que se compró el producto. En caso de eliminación equivocada podrían ser aplicadas multas, en base a las leyes nacionales*

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Enhorabuena por haber comprado un producto nuestro. Este producto cumple con elevadas normas cualitativas, tanto en el material como en la fabricación. La garantía es válida por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de suministro GIMA. Durante el periodo de vigencia de la garantía se procederá a la reparación y/o sustitución gratuita de todas las partes defectuosas por causas de fabricación bien comprobadas, con exclusión de los gastos de mano de obra o eventuales viajes, transportes y embalajes. Están excluidos de la garantía todos los componentes sujetos a desgaste. La sustitución o reparación efectuada durante el periodo de garantía no tienen el efecto de prolongar la duración de la garantía. La garantía no es válida en caso de: reparación efectuada por personal no autorizado o con piezas de recambio no originales, averías o vicios causados por negligencia, golpes o uso impropio. GIMA no responde de malfuncionamientos en aparatos electrónicos o software derivados de agentes externos como: oscilaciones de tensión, campos electromagnéticos, interferencias radio, etc. La garantía decae si no se respeta lo indicado arriba y si el número de matrícula (si está presente) se ha quitado, borrado o cambiado. Los productos considerados defectuosos tienen que devolverse solo al revendedor al que se le compró. Los envíos realizados directamente a GIMA serán rechazados.