

BIOPSY PUNCH



(ES) Leer cuidadosamente las instrucciones antes de utilizar.



(ES) Estéril. Para un solo uso.


Si se necesitan varias biopsias o muestras de un mismo paciente, debe utilizarse cada vez un nuevo dispositivo.

- No reesterilizar o reutilizar debido al riesgo de infección.
- No utilizar si el blíster de embalaje esterilizado está comprometido o dañado.




(ES) Tamaños disponibles:
2; 3; 3.5; 4; 5; 6 & 8 mm


1.
(ES) Biopsy punch es un método habitual en la realización de biopsias de piel.

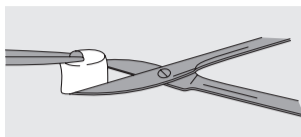


c.
(ES) Sujetar y levantar la muestra suavemente con unas pinzas anatómicas pequeñas, evitando su aplastamiento. Si fuese necesario, cortar la muestra por su base con unas tijeras o bisturí.

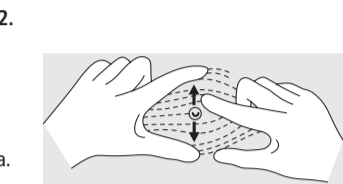

a.
(ES) Estire la piel, para evitar pliegues en la misma.

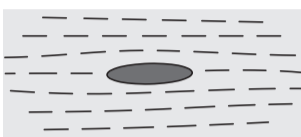

d.
(ES) Para lesiones ≤ 4 mm presionar suavemente o cubrir con un apósito hidrocoloide. Para lesiones ≥ 4 mm suturar, grapar o utilizar apósitos quirúrgicos según proceda.

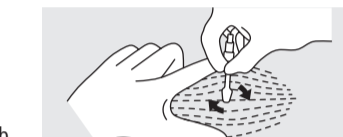

b.
(ES) Sujete el dispositivo entre los dedos pulgar e índice. Colóquelo sobre la superficie de la piel. Gírelo en sentido de las agujas del reloj mientras realiza una presión moderada.

3.



(ES) Esterilizado por óxido de etileno por:
sfm medical devices GmbH, Brückenstrasse 5, D-63607 Wächtersbach.



GSK Consumer Healthcare (GMDT)
Clocherane, Youghal Road,
Dungarvan,
Co. Waterford,
Ireland



4.

(ES) Precaución, consúltense los documentos adjuntos:



5.

(ES) Stiefel Farma, S.A., P.T.M. C/Severo Ochoa nº2, 28760 Tres Cantos, Madrid, ESPAÑA.