



iHealth[®] Edge

Motivación. Movimiento. Seguimiento.



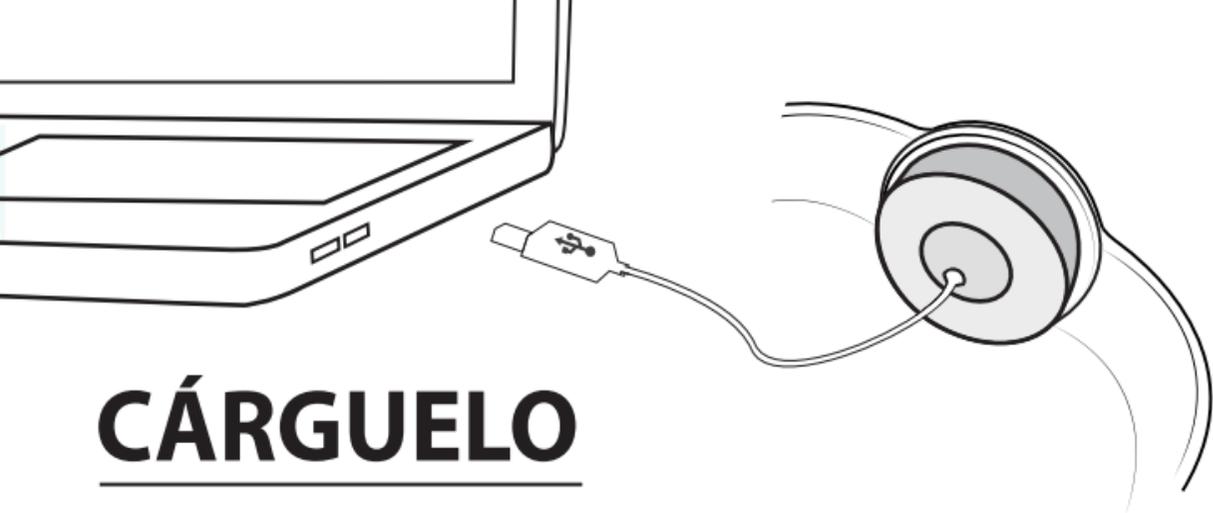


CÁRGUELO

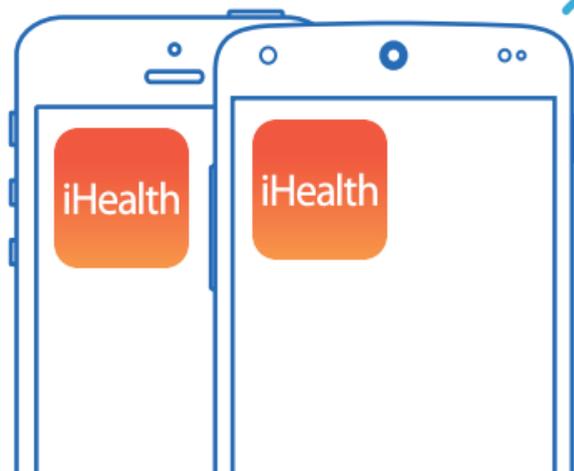


¿Dispone de un dispositivo móvil compatible?
¡Visite www.ihealthlabs.com para comprobarlo!

OBTENGA LA APLICACIÓN

1 Active el bluetooth

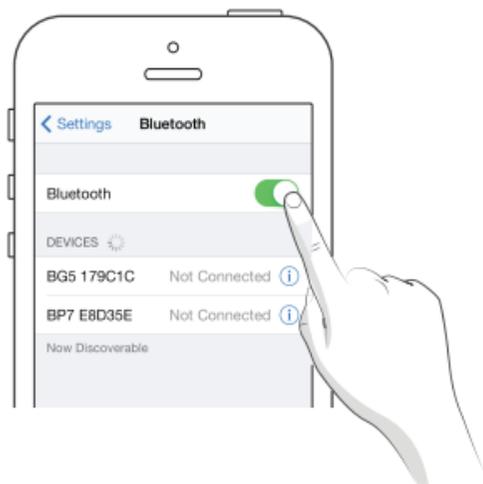


2 Abra la aplicación

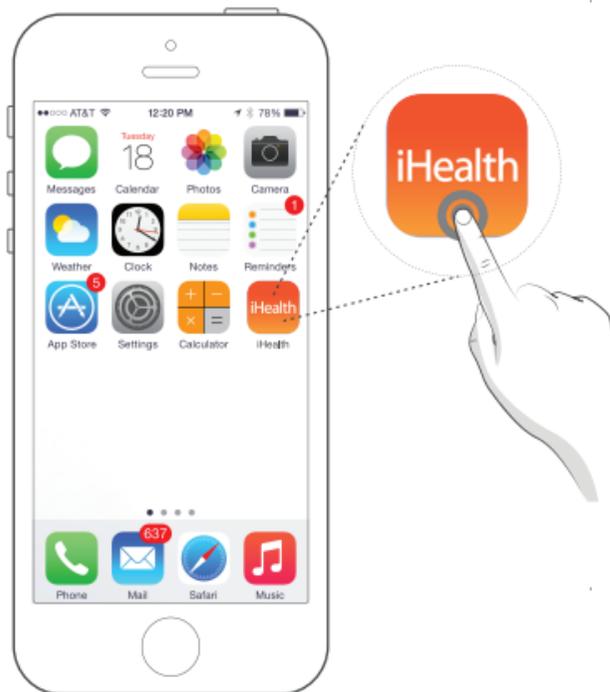


CONÉCTESE


3 Seleccione la opción Actividad en el menú


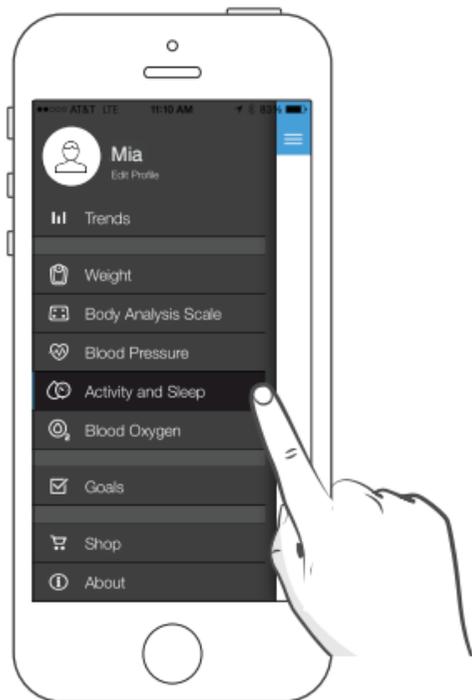


4 Haga clic en el botón “+”

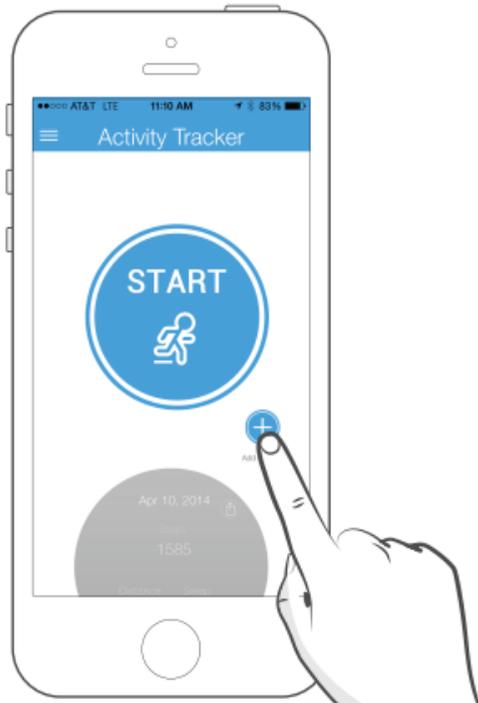


5 Selezione Edge

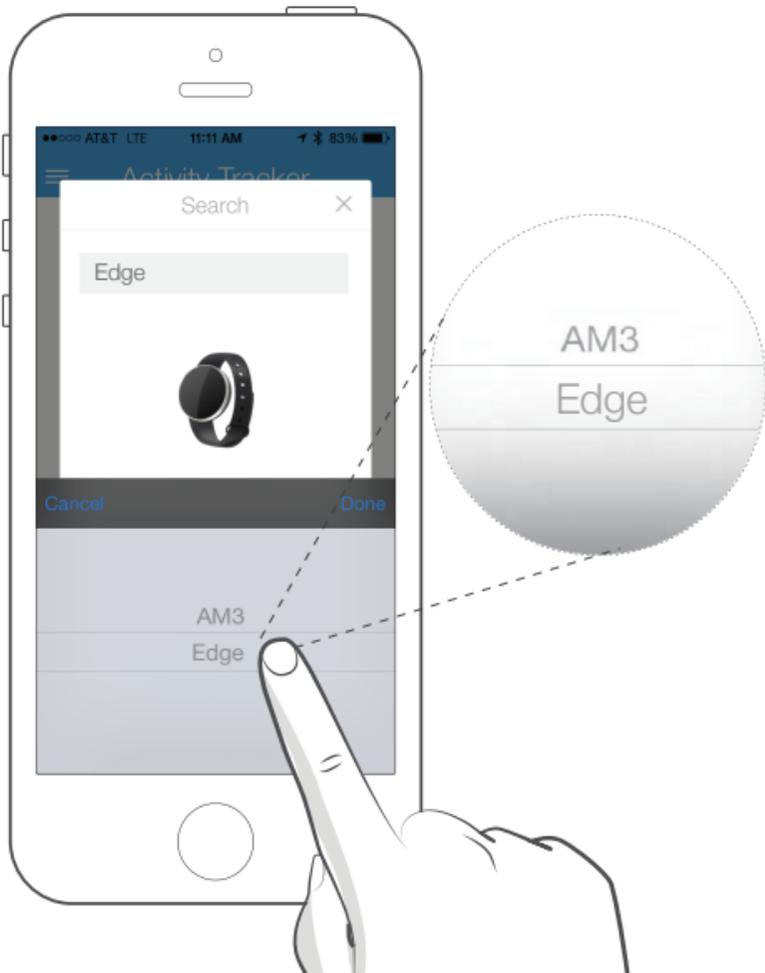

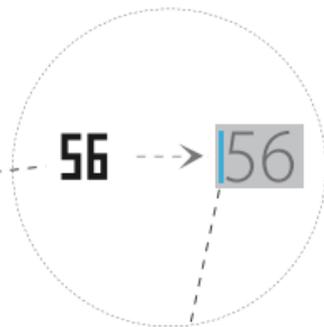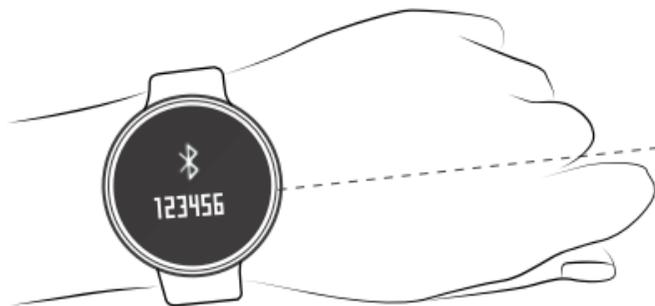


6 Introduzca los últimos 2 dígitos de la cifra de 6 dígitos que aparece en el monitor

Si no ve la cifra de 6 dígitos, desactive y active de nuevo Bluetooth o haga doble clic en el botón de Inicio (iOS) o vaya al menú de la aplicación (Android) y deslice el dedo sobre la aplicación para cerrarla totalmente. Repita de nuevo los pasos desde el paso 2.

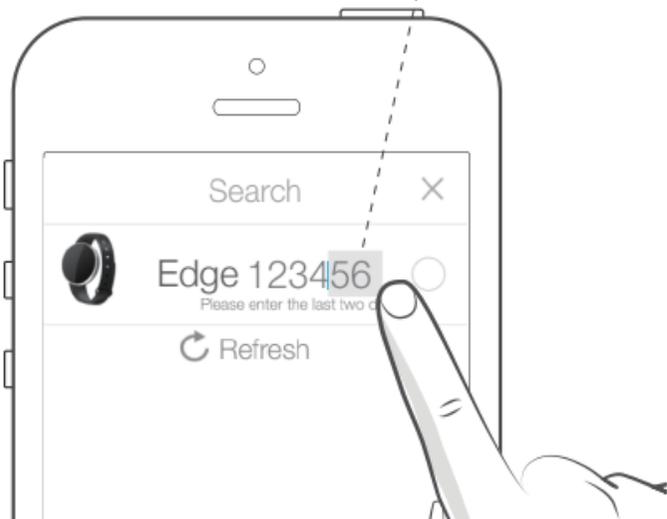

7 Emparejamiento correcto

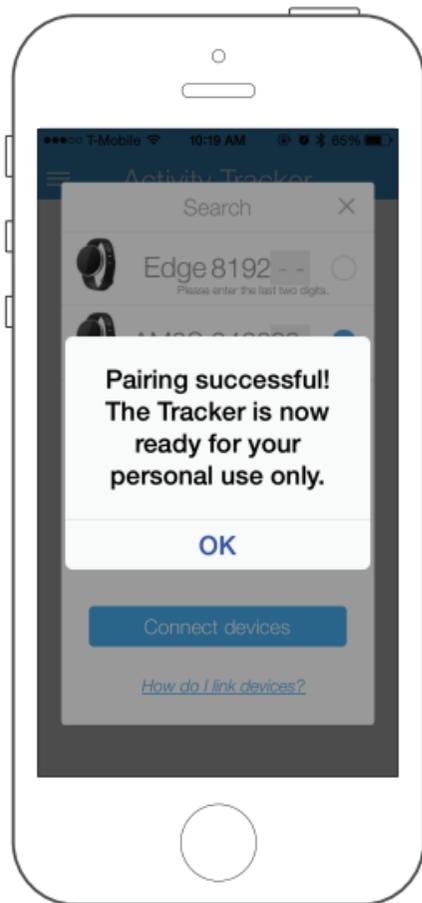

PANTALLAS

Fecha/Hora

Mon 05-05
08:30 am

Objetivo/Progreso

1

2

3

Número de pasos realizados

6000

Levante la muñeca o
suéltelo de la cintura
y
toque para navegar

Calorías quemadas

420

Distancia cubierta

3.93

MODO

Modo sueño



Modo entrenamiento



Registre automáticamente la calidad de su sueño y de su entrenamiento.

PERSONALIZAR

Modo sueño



Modo entrenamiento



¿Le apetece personalizar el monitor?
Cambie los personajes que aparecen en el monitor en la sección de Ajustes de la aplicación.

INFORMACIÓN IMPORTANTE REQUERIDA POR LA FCC

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas FCC. Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados específicamente por iHealth Lab Inc. anularán la autorización del usuario para usar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con las limitaciones de los dispositivos digitales de Clase B, según el Apartado 15 de las normas FCC. Estas limitaciones se han diseñado para proporcionar una protección razonable frente a interferencias nocivas en una instalación doméstica. Este producto genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencias nocivas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este producto genera interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir las interferencias con una o más de las medidas siguientes:

- Reoriente o recolocque la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente o circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite ayuda al vendedor o a un técnico de radio/TV experimentado.

El dispositivo cumple con la norma RSS exenta de licencia del Ministerio de industria de Canadá. Su funcionamiento tiene que cumplir los dos requisitos siguientes:

- (1) este dispositivo no podrá provocar interferencias, y
- (2) este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia, incluidas interferencias que podrían producir un funcionamiento no deseado del dispositivo



PRECAUCIÓN

EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE
POR UNA DE TIPO INCORRECTO.
DESECHE LAS BATERÍAS USADAS SIGUIENDO
LAS INSTRUCCIONES

Por la presente, [iHealth Lab Inc.] declara que este [AM3S EDGE] cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC.

La declaración de conformidad de la Directiva 1999/5/EC y todos los documentos de certificación y reglamentación de iHealth se pueden descargar del siguiente enlace:

<https://www.ihealthlabs.eu/support/certifications>


Contacto y servicio de atención al cliente:

Fabricado por iHealth Lab Inc.

iHealth Lab Inc.

719N. Shoreline Blvd., Mountain View, CA 94043, EE. UU.

Tel: +1-855-816-7705 www.ihealthlabs.com

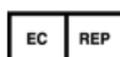

Fabricado por iHealth Lab Europe.

3 rue Tronchet, 75008, Paris, France

www.ihealthlabs.eu

Fabricado por iHealth Lab Inc..

No. 3 Jinping Street, YaAn Road, Nankai District, Tianjin 300190, China.

Visite www.ihealthlabs.com
para obtener más información

iHealth[®] Edge