



1



2



3




4



5



6

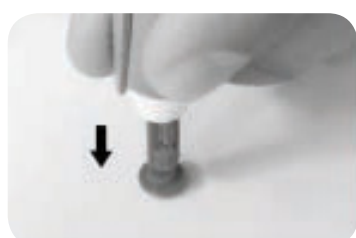

7



8

ESPAÑOL

DISPOSITIVO AUTO LANCETAS

Nombre del Dispositivo:

Dispositivo de Punción

Principios y Uso previsto:

Ayudar a la lanceta para la toma de muestras de sangre periférica de la yema del dedo o de la pata para el análisis de glucosa en sangre u otras pruebas que utilizan una pequeña cantidad de sangre, es el dispositivo no invasivo y no entra en contacto con la sangre, solo hace un breve contacto con la superficie de la piel durante unos pocos segundos. El dispositivo de punción no es estéril.

Precaución:

1. El Dispositivo de Punción es para uso de un solo paciente. ¡No lo comparta con nadie, ni siquiera con otros miembros de la familia! ¡No lo use en varios pacientes!
2. No reutilice la lanceta, siempre use una nueva lanceta estéril para la prueba.
3. Tenga cuidado siempre que la aguja de la lanceta esté expuesta, especialmente al retirar la lanceta usada del dispositivo y al desechar la lanceta usada.
4. Un aviso al usuario y/o al paciente de que cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el dispositivo debe ser notificado al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

Vida útil:

El período de validez del producto es de 5 años

Instrucciones de Uso:

1. El dispositivo puede ser reutilizado. Mantenga limpio el Dispositivo de Punción, desinfecte la tapa del Dispositivo de Punción con una almohadilla de alcohol o bolas de algodón antes de usarlo.
2. Gire la tapa del Dispositivo de Punción.
3. Inserte una nueva lanceta estéril en el Porta-Lanceta. Empuje hacia abajo con firmeza hasta que esté completamente asentada.
4. Retire la tapa protectora de la lanceta y guarde la tapa para usarla más tarde. Vuelva a colocar la tapa del Dispositivo de Punción.
5. Ajuste el nivel de punción girando la Punta Ajustable hasta que el número se alinee con la Flecha. Para seleccionar la mejor profundidad:
 - 1-2 para pieles suaves o finas
 - 3 para pieles medias
 - 4-5 para piel gruesa o callosa
6. Tire lentamente del control de amortillamiento. Escuchará un clic, indicando que el dispositivo de punción está ahora cargado y listo para ser usado.
7. Sostenga el Dispositivo de Punción firmemente contra un lado de la punta del dedo. Presione el botón de liberación. Deje el Dispositivo de Punción a un lado y proceda con su prueba de glucosa en sangre de acuerdo con las instrucciones de su medidor de glucosa en sangre.
8. Después de usarla, desenrosque la tapa del Dispositivo de Punción. Empuje la punta expuesta de la lanceta dentro de su tapa protectora.
9. Deslice el Eyector de Lanceta hacia adelante y deseche la lanceta usada en un recipiente aprobado. Deseche la lanceta usada de acuerdo con las normas de seguridad de su país. Vuelva a colocar la tapa del Dispositivo de Lanceta.

Las características de funcionamiento de los dispositivo:

El producto está compuesto por el cuerpo principal, el mecanismo emergente y el conjunto de ajuste.

Transporte y Almacenamiento:

Se dispone de medios de transporte comunes en el transporte, por favor, evitar la presión intensa, el agua de lluvia y nieve y la colisión; los productos envasados se almacenarán en una sala bien ventilada y libre de cualquier sustancia venenosa, nociva y corrosiva.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

	Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745
	Fecha de fabricación
	Fabricante
	Fecha de caducidad
	Código producto
	Número de lote
	Límite de temperatura
	Límite de humedad
	Conservar en un lugar fresco y seco
	Consultar las instrucciones de uso
	Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	Producto sanitario

REF E (23919)

Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd
Address: No.1 Shuangshan Sanjian Road,
250200 Zhangqiu City, Jinan Shandong,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Made in China

Linkfar Healthcare GmbH
Niederrheinstraße 71, 40474 Düsseldorf,
Germany

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

