



GIMA

Lector de recipientes de análisis

Manual del usuario

ACR-100



Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.

Índice

Capítulo 1 Introducción	3
1.1 Uso previsto	3
1.2 Ámbito de aplicación.....	3
1.3 Nombre del producto y tipo de modelo.....	3
Capítulo 2 Advertencias y uso seguro	4
Capítulo 3 Componentes y estructura	6
3.1 Lista de equipo estándar	6
3.2 Lector de recipientes de análisis	6
3.3 Especificaciones técnicas.....	8
Capítulo 4 Instalación	9
4.1 Lista de comprobación al abrir la caja	9
4.2 Requisitos ambientales	9
4.3 Colocación	9
4.4 Requisitos de tensión del suministro eléctrico	10
4.5 Instalación del lector	10
Capítulo 5 Instrucciones de uso	11
5.1 Inicio del lector.....	11
5.2 Funciones principales	12
5.3 Funciones auxiliares	23
Capítulo 6 Solución de problemas	26
Capítulo 7 Limpieza y mantenimiento diarios	27

7.1 Mantenimiento	27
7.2 Plan de mantenimiento	27
7.3 Precauciones	27
Capítulo 8 Mantenimiento, reparación y eliminación	28
Capítulo 9 Información del fabricante	29
Apéndice	30
A. Garantía	30
B. Tarjeta de garantía	32

Capítulo 1 Introducción

1.1 Uso previsto

El lector de recipientes es un instrumento diseñado para obtener de forma digital los resultados de una prueba de drogas en un recipiente de orina y ofrecerlos en un formato electrónico imprimible. Solo muestra e imprime resultados cualitativos. El lector está diseñado para recopilar la información del producto mediante un código QR y solo se pueden utilizar recipientes de análisis de drogas fabricados por **AllTest**. Se trata de un lector de recipientes de gran precisión que proporciona los resultados con rapidez. El lector de recipientes solo se debe utilizar con consumibles fabricados por **Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.** según las indicaciones del prospecto suministrado.

Antes del uso, lea atentamente este manual del usuario.

1.2 Ámbito de aplicación

El lector de recipientes de análisis se ha diseñado para leer los resultados de las pruebas obtenidas con el recipiente de análisis rápido de drogas para la detección de drogas en orina. Para diagnóstico profesional *in vitro* y en el punto de atención sanitaria. Se puede utilizar en laboratorios centrales de instituciones médicas, servicios de urgencias y ambulatorios, departamentos clínicos o servicios médicos (como, por ejemplo, centros de salud) o centros médicos, etc. También se puede utilizar en laboratorios de investigación.

1.3 Nombre del producto y tipo de modelo

- Nombre del producto: **Lector de recipientes de análisis**
- Modelo/especificaciones: **ACR-100**

Capítulo 2 Advertencias y uso seguro

Advertencias:

- 1) El incumplimiento con lo indicado en el manual del usuario podría dar lugar a daños y resultados imprecisos.
- 2) El ID de paciente y el tipo de prueba no se pueden editar una vez que la prueba comience.
- 3) No abra la tapa de la cámara del lector de recipientes de análisis durante la lectura.
- 4) No vuelva a analizar un recipiente ya usado cuando se haya notificado el resultado.
- 5) No retire la unidad USB durante la actualización del software.

Precauciones:

- 1) Utilice únicamente el suministro eléctrico recomendado para el lector de recipientes de análisis. Utilice el adaptador de alimentación suministrado con el lector de recipientes de análisis. El suministro eléctrico correcto puede mantener la seguridad y la compatibilidad electromagnética del lector de recipientes de análisis.
- 2) Utilice siempre el lector de recipientes de análisis en una superficie limpia, plana, nivelada y estable, y alejado de la luz solar directa.
- 3) No mueva el lector de recipientes de análisis mientras se realiza una prueba.
- 4) Siga las directrices de control de infecciones adecuadas para el manejo de las muestras y elementos relacionados. Deseche correctamente los residuos contaminados según la normativa local. Limpie el lector de recipientes de análisis y sus superficies externas según las instrucciones indicadas en el **Capítulo 7 Limpieza y mantenimiento diarios**.
- 5) Riesgo de descarga eléctrica. No utilice el lector de recipientes de análisis si se ha abierto, dañado o expuesto a humedad, condensación o lluvia.
- 6) No desmonte ni intente reparar el lector de recipientes de análisis u otros accesorios ya que podría dañarse. El lector de recipientes de análisis no tiene piezas que necesiten mantenimiento. Se ha de devolver para su reparación. El desmontaje del lector de recipientes de análisis también anulará la garantía.

- 7) Utilice únicamente el lector de recipientes de análisis para su uso previsto y de acuerdo con el manual del usuario y las advertencias. Si el lector de recipientes de análisis se utiliza de un modo no especificado en el manual del usuario, se anulará la protección que brinda la garantía. El lector de recipientes de análisis (incluido el suministro eléctrico) está diseñado para funcionar según las especificaciones del fabricante.
- 8) Coloque el lector de recipientes de análisis de modo que se facilite el acceso a los conectores. Mantenga los cables conectados alejados de las áreas de trabajo, de modo que, en caso de que alguien tropiece o se enrede con ellos, no tire el lector de recipientes de análisis de la mesa. La toma de corriente diseñada para su empleo con el lector de recipientes de análisis debe estar cerca de este y ser de fácil acceso. El fabricante recomienda que se desconecten los cables cuando no se vaya a utilizar el dispositivo durante un largo periodo de tiempo.
- 9) No sumerja el lector de recipientes de análisis en agua ni en soluciones de limpieza.
- 10) Utilice únicamente la soluciones de limpieza indicadas.

Capítulo 3 Componentes y estructura

3.1 Lista de equipo estándar

Lista de embalaje

N.º	Descripción	Modelo	Cantidad
1	Lector	ACR-100	1
2	Adaptador de corriente	GSM40A12-P1J	1
3	Cable de alimentación	/	1
4	Rollo de papel de impresión	57 × 30 mm	1
5	Manual del usuario	/	1
6	Recipiente de calibración	/	1
7	Lápiz táctil	/	1
8	Escáner	/	Opcional

Al recibir la caja, compruebe su contenido con la lista y asegúrese de que no falta nada. El escáner es un accesorio opcional, que sólo está disponible para necesidades específicas y no como accesorio estándar.

Nota: Si faltara alguna pieza o estuviera dañada, póngase en contacto con el distribuidor local.

3.2 Lector de recipientes de análisis

3.2.1 Vista externa (Ref. Fig. 1 y Fig. 2)

El interruptor de alimentación está en la parte trasera del lector. El puerto de conexión del adaptador, el puerto LAN y los puertos USB están en la parte izquierda del lector para la conexión del lector con la toma de corriente, el sistema de información de laboratorio o el teclado, etc.



Fig. 1

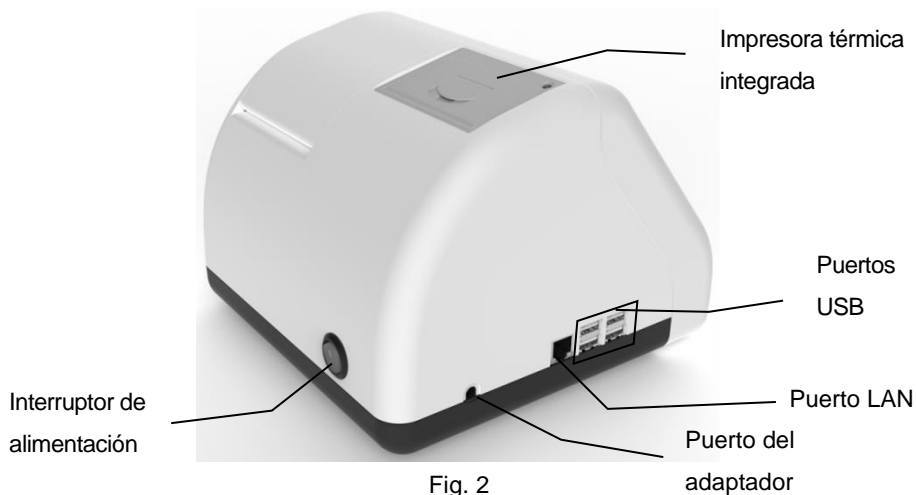


Fig. 2

3.2.2 Adaptador de alimentación (Ref. Fig. 3)



Fig. 3

3.3 Especificaciones técnicas

• Principios	Conversión fotoeléctrica
• Formatos de prueba	Recipiente
• Pantalla táctil	7 pulgadas
• Medición	Cualitativa
• Tiempo de lectura	1-2,5 minutos (depende de la ubicación del código QR)
• Fuente de alimentación	12 V CC, 2 A
• Dimensiones	221 mm (largo) × 215 mm (ancho) × 165 mm (alto)
• Peso	<1,5 kg
• Fluctuaciones de tensión de la alimentación de red	±10 %
• Categoría de sobretensión	II
• Grado de contaminación	2
• Fuente de luz de excitación	LED
• Puertos de conexión	Puerto LAN, 4 puertos USB
• Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -10 °C-60 °C; humedad relativa: del 20 % al 90 %; presión atmosférica: de 86 kPa a 106 kPa y en un entorno ventilado libre de gases corrosivos. Se deben realizar mediciones para evitar la humedad, así como para evitar los golpes y las vibraciones acusadas durante el transporte.
• Condiciones de funcionamiento	15 °C-30 °C
• Impresora	Impresora térmica integrada
• Ubicación	Uso en interiores, mesa estable, evitar la luz intensa directa y las fuentes de interferencias electromagnéticas fuertes.
• Altitud	Hasta 2000 m

Capítulo 4 Instalación

4.1 Lista de comprobación al abrir la caja

4.1.1 Comprobaciones antes de abrir la caja:

Antes de abrir la caja, compruebe que el embalaje esté en buen estado y que la caja no haya resultado dañada durante el transporte.

4.1.2 Comprobaciones después de abrir la caja:

- ① Abra la caja con cuidado y compruebe su contenido según la **3.1 Lista de equipo estándar** para verificar que no falta nada.
- ② Examine el adaptador de alimentación para ver si está en buen estado. Si tuviera algún defecto, póngase en contacto con el fabricante o el agente local.

Nota 1: Guarde la caja original del lector y los materiales de embalaje para un posible envío posterior o para futura referencia.

Nota 2: *AllTest* se esfuerza para facilitar el enchufe de alimentación adecuado según el país. Sin embargo, en algunos casos, no es posible hacerlo. En estos casos, se recomienda utilizar el adaptador adecuado para conectar el suministro eléctrico.

4.2 Requisitos ambientales

- Temperatura ambiente: 15 °C-30 °C
- Humedad relativa: del 20 % al 90 %

Evite campos magnéticos intensos, vibraciones, golpes, gases corrosivos, luz solar directa, humedad alta y altas temperaturas en el área de trabajo donde se instale el lector para su uso.

4.3 Colocación

- ① El lector se debe colocar en una encimera estable y nivelada, en interiores, en un entorno sin polvo, con luz solar directa y sin gases corrosivos. La encimera debe ser capaz de soportar un peso de 1,5 kg.
- ② No debe haber fuentes de vibraciones ni campos electromagnéticos potentes alrededor.
- ③ El lector debe colocarse en un lugar bien ventilado. Debe haber como mínimo un espacio de 10 cm alrededor del lector para garantizar el espacio

necesario para su funcionamiento y mantenimiento.

4.4 Requisitos de tensión del suministro eléctrico



La fuente de alimentación del lector varía entre 100-240 V 50/60 Hz CA según el país donde se utilice. La tensión de entrada es de 12 V CC. Evite los cortocircuitos y las descargas eléctricas durante el uso. El lector está conectado a tierra a través del adaptador de alimentación.

4.5 Instalación del lector

Utilice el lector en las condiciones adecuadas indicadas en **4.2 Requisitos ambientales**.

1. Coloque el lector en una plataforma estable.
2. Cargue papel.

Abra la cubierta de la impresora, ponga el papel de impresión en la impresora, saque alrededor de 3 cm de papel del rollo y, a continuación, cierre la cubierta.

3. Conecte el adaptador de alimentación y el conector de alimentación del lector.
4. Encienda el interruptor de alimentación e inicie el lector.

Capítulo 5 Instrucciones de uso

El lector de recipientes de análisis se puede manejar con comandos desde la pantalla táctil.

5.1 Inicio del lector

Conecte el lector de recipientes de análisis a la alimentación eléctrica con el adaptador de CC y pulse el interruptor de alimentación para encender el lector. La pantalla de inicialización se mostrará como en la Fig 4.



Fig. 4

Tras el inicio, introduzca el nombre de usuario y la contraseña (Ref. Fig. 5); el lector realizará una autocomprobación. Si la autocomprobación es satisfactoria, se accederá a la interfaz de funcionamiento principal.

5.1.1 Inicio de sesión


Toque  para iniciar el teclado virtual, introduzca el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario inicial es: **admin**, y la contraseña: **admin**, toque **"Inicio de sesión"** para acceder. Se pueden añadir y eliminar usuarios. Consulte **5.2.1.3 Administración de usuarios**.



Fig. 5

5.1.2 Apagar

Toque "**Apagar**"; aparecerá una solicitud como la de la Fig. 6. Toque "**Sí**" para apagar el lector o "**Cancelar**" para no hacerlo.

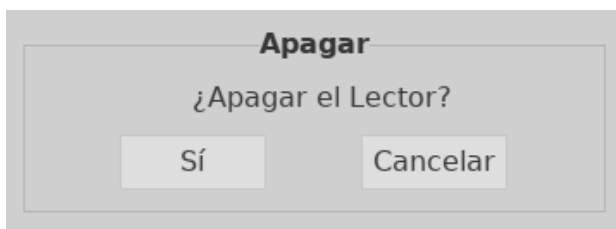


Fig. 6

5.1.3 Autocomprobación

Tras el inicio de sesión, el lector iniciará un procedimiento de autocomprobación. (Ref. Fig. 7)

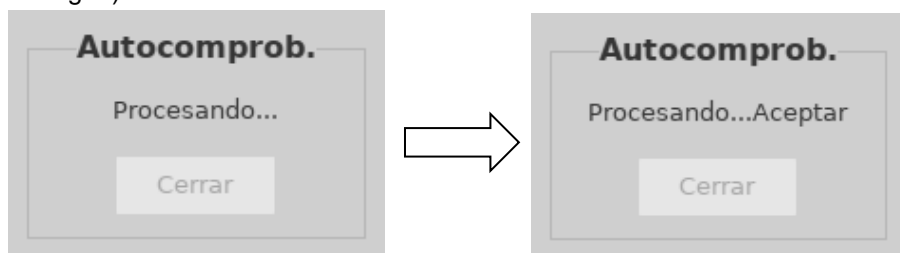


Fig. 7

5.2 Funciones principales

Hay cinco funciones principales: Ajuste, Registros, Leer, Cargar e Imprimir, así como diversas funciones auxiliares. (Ref. Fig. 8)

Iconos de teclado
en pantalla e importar

Iconos de actualizar
y bloqueado

Icono de
apagado

The screenshot shows the GIMA interface with the date and time 2022-10-13 13:18:11. At the top, there are three icons: a keyboard icon, a refresh/lock icon, and a power icon. Below these are two sections: 'Recipiente' (Recipient) and 'Paciente' (Patient). The 'Recipiente' section has fields for 'Ref.' and 'Lote'. The 'Paciente' section has fields for 'ID', 'Nombre', 'Edad', and 'Sexo'. Below these is a large 'Resultado' (Result) area. At the bottom, there are five buttons: 'Ajuste', 'Registros', 'Leer', 'Cargar', and 'Imprimir'.

Área de información del producto y del paciente

Área de resultados

Botones de función

Fig. 8

5.2.1 Ajuste




Pulse "Ajuste" para pasar a la interfaz correspondiente. (Ref. Fig. 9)

The screenshot shows the 'Ajuste' (Adjust) interface. It has two main sections: 'Preferencias' (Preferences) and 'LIS'. The 'Preferencias' section includes a dropdown for 'Idioma' (Language) set to 'español', a date and time field set to '13/10/2022' and '13:18:25', a dropdown for 'Zona horaria' (Time zone) set to 'China', and a 'Modo de Impresión' (Print mode) section with radio buttons for 'Automático' and 'Manual'. The 'LIS' section includes a dropdown for 'Protocolo' (Protocol) set to 'HL7', a text field for 'IP serv.' set to '192.168.168.100', a text field for 'Puerto serv.' set to '2100', and a 'Modo de Carga' (Load mode) section with radio buttons for 'Automático' and 'Manual'. Below these sections is a large keyboard icon.

Fig. 9


5.2.1.1 Ajuste de preferencias

- 1) **Idioma:** se puede seleccionar el idioma. El inglés es el idioma predeterminado.


- 2) **Fecha y hora:** pulse  situado en la parte derecha del cuadro de fecha para seleccionar una fecha; introduzca la hora con el teclado virtual y pulse  para guardar el cambio. (Si el lector está conectado a Ethernet a través de un puerto LAN, la fecha y la hora se sincronizarán en la red y no se podrán modificar).
- 3) **Zona horaria:** se pueden seleccionar el país y la ciudad para establecer la zona horaria. Una vez hecho, pulse  para guardar el cambio.
- 4) **Modo de impresión:** seleccione "**Automático**" para imprimir el resultado de la prueba de forma automática tras cada prueba. Si se selecciona "**Manual**", el resultado de la prueba no se imprimirá automáticamente tras la prueba y el usuario deberá ejecutar un comando de impresión si desea que esta se realice.

5.2.1.2 Ajuste de conexión a LIS

- 1) **Conexión a LIS:** el lector se puede conectar al LIS a través de Ethernet.

Paso 1: seleccione el protocolo de comunicación en el cuadro desplegable correspondiente y pulse  para guardar.

Paso 2: conéctese a Ethernet.

Paso 3: introduzca la dirección IP y la información sobre el puerto en las casillas IP del servidor y Puerto del servidor, respectivamente, y pulse  para guardar.

- 2) **Modo de carga:** seleccione "**Automático**" para cargar automáticamente el resultado de la prueba tras la misma. Si se selecciona "**Manual**", el resultado de la prueba no se cargará automáticamente tras la prueba.

5.2.1.3 Administración de usuarios


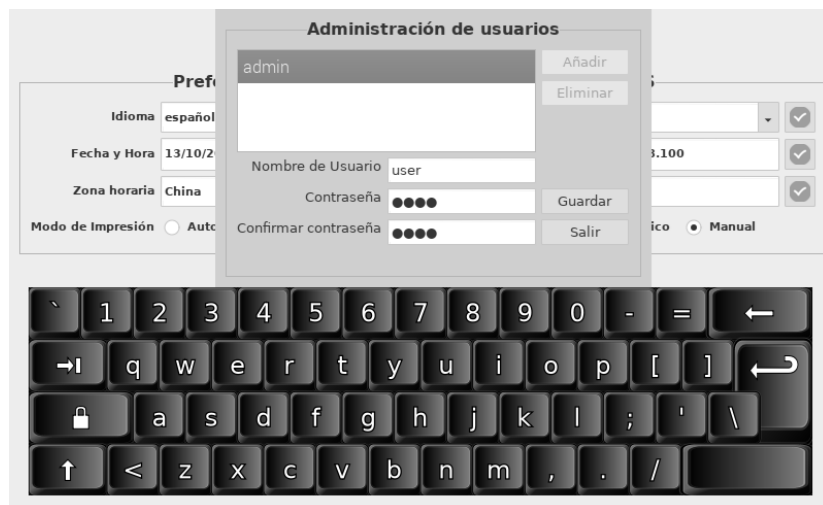
Pulse  para establecer la administración de usuarios. Se mostrará una pantalla como la de la Fig. 10.



Fig. 10

- **Añadir un usuario:** pulse **Añadir**, introduzca el nombre de usuario, la contraseña y confirme la contraseña, toque **Guardar** para guardar y **Salir** para salir de esta pantalla (Ref. Fig. 11).



(a)



(b)

Fig. 11

- **Eliminar un usuario:** seleccione el usuario que desee y pulse **Eliminar**. (Ref. Fig. 12)



Fig. 12

5.2.1.4 Acerca de



Pulse  para que se muestre la versión del software y el número de serie tal y como se muestra en la Fig. 13. Pulse  para volver a la interfaz de funcionamiento principal.



Fig. 13

5.2.2 Registros

Pulse "Registros" para acceder a la interfaz de registros (Ref. Fig. 14). Los resultados se mostrarán en los registros y se indicará información detallada en el área de resultados. Pulse la fila que desee y aparecerá la información correspondiente. Las funciones de los botones se explican en la tabla 1.

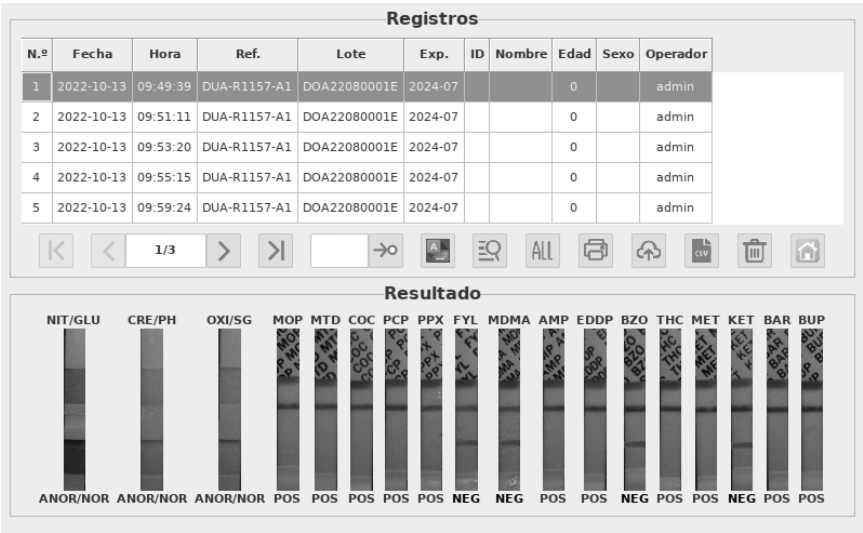















Fig. 14

Tabla 1 Botones de función

Botón	Función
 	Página anterior o siguiente
 	La primera o la última página
	Pasar a la página indicada en el cuadro de diálogo

Botón	Función
	Pulsar para iniciar o cerrar el teclado virtual
	Buscar registros con la información indicada en el cuadro de diálogo
	Mostrar todos los registros
	Imprimir los registros seleccionados
	Transferir los registros seleccionados a LIS
	Exportar registros a Excel
	Eliminar los registros seleccionados
	Volver a la interfaz de funcionamiento principal

5.2.3 Leer

Deje que el recipiente, la muestra de orina o los controles alcancen la temperatura ambiente (15 °C-30 °C) antes de realizar el análisis.

1. Calibración del sistema

Paso 1: saque el recipiente de calibración y póngalo en la cámara de detección del lector.

Paso 2: toque "Leer" para leer los resultados. (Ref. Fig. 15)

Nota:

- 1) El tiempo de lectura puede ser de 1 a 2,5 minutos; esto depende de la colocación del código QR.
- 2) Al colocar el recipiente en la cámara del lector, alinee el código QR de la etiqueta del recipiente en la dirección que se muestra en la Fig. 17 para obtener los resultados con más rapidez.

Interpretación del resultado:

Un resultado **APROBADO** significa que el funcionamiento del sistema es normal y que puede realizar una prueba. Si el resultado de la calibración indica **SUSPENSO**, no utilice el dispositivo y póngase en contacto con **AllTest** para recibir asistencia técnica.

The screenshot shows the GIMA software interface. At the top, there's a header with the GIMA logo, a timestamp '2022-10-13 13:25:36', and three icons (a person, a lock, and a power button). Below the header, there are two main sections: 'Recipiente' (Recipient) and 'Paciente' (Patient). The 'Recipiente' section has fields for 'Ref.' (filled with 'Calibration_Cup'), 'Lote' (filled with 'N/A'), and 'Exp.' (filled with 'N/A'). The 'Paciente' section has fields for 'ID', 'Nombre', 'Edad', and 'Sexo'. Below these sections is a 'Resultado' (Result) table with 15 columns labeled T1 through T15. Each column has a vertical bar with a horizontal line through it, and the word 'APRO' is written below each bar. At the bottom of the interface are five buttons: 'Ajuste', 'Registros', 'Leer', 'Cargar', and 'Imprimir'.

Recipiente	Paciente
Ref. Calibration_Cup	ID
Lote N/A	Nombre
Exp. N/A	Edad
	Sexo

Resultado
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15

APRO APRO APRO APRO APRO APRO APRO APRO APRO APRO APRO APRO APRO APRO APRO

Ajuste Registros Leer Cargar Imprimir

Fig. 15

2. Realizar una prueba

Paso 1: ponga la bolsa con el recipiente a temperatura ambiente antes de abrirla. Saque el recipiente de la bolsa sellada y utilícelo antes de que transcurra una hora.

Paso 2: recoja la muestra.

Paso 3: fije la tapa y coloque el recipiente sobre una superficie plana.

Paso 4: compruebe la etiqueta de temperatura 4 minutos tras la recogida de la muestra. Aparecerá un color verde para indicar la temperatura de la muestra de orina. El intervalo adecuado para una muestra no adulterada es de 32 °C-38 °C (90 °F-100 °F).

Paso 5: ponga la fecha y las iniciales correspondientes en el sello de seguridad y fíjelo a la tapa del recipiente.

Paso 6: retire la etiqueta del envase.

3. Leer los resultados con el lector

Paso 1: introduzca la información del paciente, como su ID, nombre, edad y sexo en la pantalla.

Paso 2: ponga el recipiente en la cámara de detección del lector a los 5 minutos, y cierre la tapa de la cámara, como se muestra en la Fig. 16

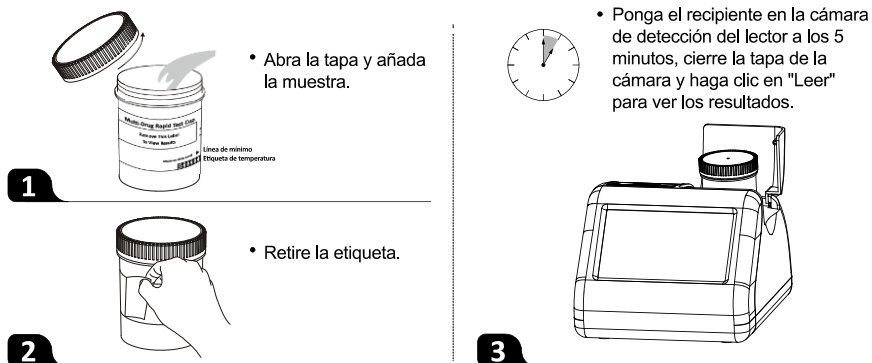


Fig. 16 Funcionamiento del recipiente para orina

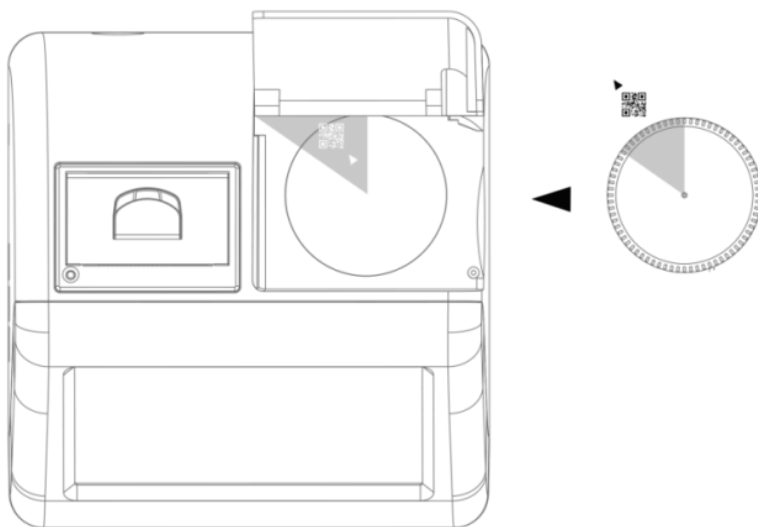


Fig. 17 Orientación del recipiente para orina

Paso 3: toque "Leer" para leer los resultados. (Ref. Fig. 18)

The screenshot shows the GIMA software interface at 2022-10-13 13:27:26. The interface is divided into three main sections: Recipiente, Paciente, and Resultado. The Recipiente section has three input fields: Ref. (empty), Lote (empty), and Exp. (empty). The Paciente section has four input fields: ID (123), Nombre (Abc), Edad (20), and Sexo (Hombre). The Resultado section is a large empty box. At the bottom, there are five buttons: Ajuste, Registros, Leer, Cargar, and Imprimir.

Recipiente			Paciente	
Ref.			ID	123
Lote		Exp.	Nombre	Abc
			Edad	20
			Sexo	Hombre

Resultado

Ajuste Registros Leer Cargar Imprimir

Fig. 18

La información relativa al recipiente se rellenará automáticamente en las casillas correspondientes transcurridos unos pocos segundos tras el inicio de la prueba, y el proceso cambiará de forma continua del 0% al 100%. (Ref. Fig. 19)

The screenshot shows the GIMA software interface at 2022-10-13 13:30:55. The Recipiente section is now filled with data: Ref. (DUA-R1157-A1), Lote (DOA22080001E), and Exp. (2024-07). The Paciente section remains the same. The Resultado section now displays 'Procesando... 10%'. The buttons at the bottom are the same as in Fig. 18.

Recipiente			Paciente	
Ref.	DUA-R1157-A1		ID	123
Lote	DOA22080001E	Exp.	Nombre	Abc
		2024-07	Edad	20
			Sexo	Hombre

Resultado

Procesando... 10%

Ajuste Registros Leer Cargar Imprimir

Fig. 19

Paso 4: cuando el proceso alcance el 100 %, aparecerá el resultado de la prueba en la pantalla como se muestra en la Fig. 20.

GIMA 2022-10-13 13:31:59

Recipiente
 Ref. DUA-R1157-A1
 Lote DOA22080001E Exp. 2024-07

Paciente
 ID 123 Nombre Abc
 Edad 20 Sexo Hombre

Resultado

NIT/GLU	CRE/PH	OXI/SG	MOP	MTD	COC	PCP	PPX	FYL	MDMA	AMP	EDDP	BZO	THC	MET	KET	BAR	BUP
ANOR/NOR	ANOR/NOR	ANOR/NOR	POS	POS	POS	POS	POS	POS	NEG	POS	POS	NEG	POS	POS	NEG	POS	POS

Ajuste Registros Leer Cargar Imprimir

Fig. 20

5.2.4 Cargar

Tras cada prueba, pulse "**Cargar**" para transferir el resultado a LIS. (El resultado se transferirá de forma automática si se han establecido correctamente los ajustes de LIS). (Ref. Fig. 21)



Fig. 21

5.2.5 Imprimir

Pulse "**Imprimir**" para imprimir el resultado actual con la impresora térmica integrada. (Ref. Fig. 22) (El resultado se imprimirá de forma automática si la función de impresión automática está activada).

TEST REPORT

1) CUP
 Ref.: DOA-A1157-007-A1
 Lot: DOA19090021U
 Expiry Date: 202108

2) PATIENT
 ID:
 Name:
 Age: 0
 Gender:

3) RESULT

ITEM	RESULT
BUP	POS
THC	POS
TCA	POS
MET	POS
AMP	POS
BZO	POS
BAR	POS
MTD	POS
CDC	POS
PCP	NEG
EDDP	POS
OXY	POS
MOPA	POS
OPT	POS
NOP	POS

Tested: 2020-05-05 19:59:24
 Printed: 2020-05-05 20:25:50

Fig. 22

5.3 Funciones auxiliares

Funciones auxiliares: Importar, Actualizar, Bloqueado y Apagar.

5.3.1 Importar

Se proporcionará un archivo de configuración específico con un lote de recipientes de prueba. Si llega un nuevo lote, el archivo de configuración se debe


almacenar en un disco USB e importar en el lector pulsando el botón . (Ref.

Fig. 23)

Importar

Nombre	Tamaño	Modificado

Inserte la unidad flash USB en un puerto USB y, a continuación, toque "Leer USB".



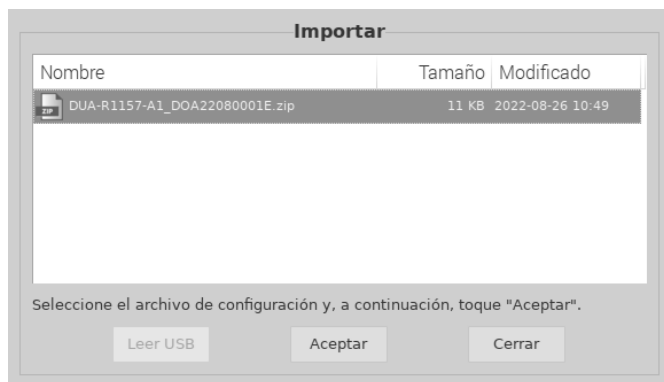



Fig. 23

5.3.2 Actualizar

El software se actualiza a través del puerto USB. Se proporcionará una nueva versión de software por correo electrónico cuando el lector no funcione correctamente debido a daños en el software. Pulse  en la interfaz de funcionamiento principal. (Ref. Fig. 24) Toque "Sí" para acceder al procedimiento de actualización; toque "Cancelar" para no hacerlo.

Advertencia: No retire la unidad USB durante la actualización del software.

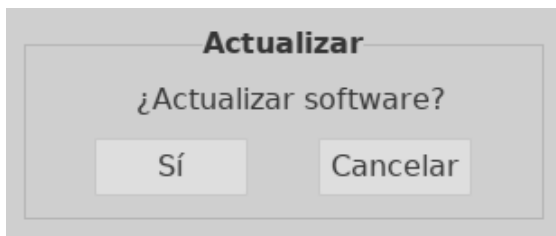




Fig. 24

5.3.3 Bloqueado

Cuando el lector no se va a usar durante un día, se puede bloquear temporalmente tocando el icono . Cuando se vaya a utilizar otra vez, introduzca el nombre de usuario y la contraseña para acceder a la interfaz de funcionamiento. Recomendamos que se apague el instrumento tras usarlo un día.

5.3.4 Apagar

Pulse  para apagar el lector. Aparecerá el mensaje "**¿Apagar el lector?**" en la pantalla, pulse "**Sí**" para apagar o "**Cancelar**" para no hacerlo.

Nota: No apague el interruptor de alimentación inmediatamente después de apagar la pantalla; puede apagarlo aproximadamente un minuto después.

Capítulo 6 Solución de problemas

Un manejo y mantenimiento del lector de recipientes de análisis siguiendo las instrucciones indicadas en este manual del usuario permite que el lector funcione correctamente. Pueden producirse algunos fallos comunes durante el uso del lector. En la siguiente tabla se indican los fallos comunes y las soluciones:

Tabla 2 Solución de problemas

Descripción del error	Soluciones
Indicaciones de contraseña o nombre de usuario no válido al iniciar sesión.	<ol style="list-style-type: none">1. Asegúrese de que el nombre de usuario o la contraseña existen y son correctos, vuelva a iniciar sesión.2. Si la indicación sigue apareciendo, introduzca el nombre de usuario y la contraseña para comprobar la información de usuario añadida.
El teclado virtual bloquea la interfaz de inicio de sesión.	<ol style="list-style-type: none">1. Toque la casilla de introducción de la contraseña, pulse la tecla de tabulación y, a continuación, toque la tecla Intro y se solucionará el problema.2. Toque el icono del teclado virtual para iniciar el teclado virtual.3. Si el error persiste, póngase en contacto con el distribuidor local o con el fabricante.
No se ha encontrado la información de lote.	<ol style="list-style-type: none">1. Importe el archivo de configuración correspondiente e inténtelo de nuevo.2. Si el error persiste, póngase en contacto con el distribuidor local o con el fabricante.
Mensaje "¿Recipiente no válido?"	<ol style="list-style-type: none">1. Saque el recipiente; asegúrese de que haya un código QR en la etiqueta del recipiente.2. Compruebe que la orientación del código QR sea correcta; ponga el recipiente en la cámara como se muestra en la Fig. 17.3. Si el error persiste, póngase en contacto con el distribuidor local o con el fabricante.
La pantalla táctil está bloqueada.	<ol style="list-style-type: none">1. Apague y reinicie el lector de recipientes de análisis.2. Si el error persiste, póngase en contacto con el distribuidor local o con el fabricante.

Capítulo 7 Limpieza y mantenimiento diarios

7.1 Mantenimiento

El mantenimiento básico consiste en mantener la parte exterior del lector de recipientes de análisis limpia.

Método de mantenimiento y limpieza externos: limpie la superficie exterior del lector con un paño empapado con alcohol al 70 % como máximo. No utilice lejía fuerte ($\geq 0,5$ % de solución de lejía) ya que los disolventes y las sustancias oxidantes pueden dañar la pantalla táctil y las piezas del lector. **No limpie las piezas internas ni la superficie interior.**



Apague el interruptor de alimentación antes de la limpieza. Compruebe que el cable de alimentación está desconectado para evitar el riesgo de cortocircuito y descarga eléctrica.

7.2 Plan de mantenimiento

Elemento de mantenimiento	Cada semana	Cuando sea necesario
Limpieza del polvo	X	
Sustituir el papel para impresión		Cuando se agote el papel

7.3 Precauciones

- No ponga el lector en una posición en la que resulte difícil manejarlo o desconectarlo.
- Trate las muestras analizadas como posibles muestras contaminadas y utilice guantes de protección y otras medidas de protección.
- Utilice únicamente kits de prueba fabricados por **Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.** y suministrados por distribuidores autorizados de **Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.**
- No sustituya el cable de alimentación a RED extraíble con un cable de alimentación con una capacidad inadecuada.
- Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo se deberá notificar al fabricante y a las autoridades competentes.

Capítulo 8 Mantenimiento, reparación y eliminación

El lector de recipientes de análisis no requiere un mantenimiento especial excepto su limpieza y la sustitución del papel de impresión cuando sea necesario. Si se requiere mantenimiento, póngase en contacto con el distribuidor local.

Las piezas internas del lector de recipientes de análisis, incluidos los módulos de detección óptica, las placas de circuitos impresos y la pantalla y la impresora térmica integrada, solo las puede suministrar el fabricante. Estos elementos no se deben adquirir de terceros, incluso aunque se indique que tienen la misma función. Si se producen problemas relacionados con el lector, póngase en contacto con el distribuidor local. Proporcionamos asistencia técnica para que los usuarios solucionen problemas. Si el lector ha de devolverse al fabricante, debe ponerse en contacto con el distribuidor local o con Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd. Se tarda aproximadamente una semana en arreglar los problemas. Si no se pudiera reparar el lector durante el periodo de garantía, lo sustituiremos por uno nuevo. Si, por cualquier motivo, el lector tiene que ser eliminado, siga las prácticas y normas locales.

Proporcionamos asistencia técnica y mantenimiento de software, incluidos el mantenimiento funcional y el mantenimiento correctivo, así como actualizaciones o correcciones de software. Solo somos responsables y proporcionamos servicio si el lector se utiliza adecuadamente cumpliendo las instrucciones del fabricante; de lo contrario, no se cubrirá ningún daño que se produzca.

Este producto cumple con la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) de la Unión Europea. Si tiene que desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con el proveedor para obtener más información.



Capítulo 9 Información del fabricante

Nombre: Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.
Dirección: # 550, Yinhai Street, Hangzhou Economic & Technological Development Area, Hangzhou, 310018 P.R. China
Tel.: +86-571-56267891
Web: www.alltests.com.cn
Correo electrónico: info@alltests.com.cn

Índice de símbolos

	Consultar las instrucciones de uso		Pruebas por kit		Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>
	Límite de temperatura -10 °C-60 °C		ACR-100		Representante autorizado en la UE
	Fabricante		Marcado CE		Mantener en lugar seco
	Frágil, manejar con cuidado		Manténgase alejado de la luz solar		Proteger de fuentes de calor y de radiactividad
	Precaución		Riesgos biológicos		Identificación única del producto
	Número de serie		Fecha de fabricación		Limitación de la humedad



Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.
#550, Yinhai Street,
Hangzhou Economic & Technological Development Area,
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn



MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10,
48163 Muenster,
Germany



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Número: 14602853000
Fecha de revisión: 2025-01-14

Apéndice

A. Garantía

Rellene la tarjeta de garantía incluida en el embalaje. Debe enviarla por correo postal en un plazo no superior a un año desde la compra a su distribuidor local para el registro de la compra.

Para que conste en sus registros, escriba la fecha de la compra del kit de inicio aquí:

Nota: Esta garantía cubre únicamente el lector de la compra original. No cubre el resto de materiales incluidos con el lector.

Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd. garantiza al comprador original que este lector está exento de defectos en los materiales y de mano de obra durante un periodo de un año (12 meses).

El año se inicia en la fecha de la compra original o de la instalación (excepto como se indica a continuación). Durante el periodo anual descrito, **AllTest** sustituirá la unidad en garantía por una unidad reacondicionada o, a su elección, reparará sin cargo alguno la unidad que se haya encontrado defectuosa. **AllTest** no será responsable de los gastos de envío que se produzcan en la reparación del lector.

Esta garantía está sujeta a las siguientes excepciones y limitaciones:

Esta garantía se limita a la reparación o sustitución debidas a defectos en las piezas o en la fabricación. Las piezas necesarias que no eran defectuosas se sustituirán con un coste adicional. **AllTest** no realizará ninguna reparación ni sustitución de ninguna pieza que se requiera debido a mal uso, accidente, alteración, uso indebido, negligencia, manejo del lector sin tener en cuenta el manual de funcionamiento o mantenimiento no realizado por **AllTest**.

Además, **AllTest** no se hace responsable del mal funcionamiento del lector ni de los daños que este sufra como consecuencia del uso de productos no fabricados por **AllTest**. **AllTest** se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño de este lector sin tener la obligación de incorporar dichos cambios en los lectores fabricados previamente.

Exención de responsabilidad

Esta garantía sustituye a cualquier otra garantía expresa o implícita (ya sea de

hecho o conforme a derecho), incluidas las garantías de comerciabilidad y adecuación a un uso, que se excluyen de forma expresa, y es la única garantía otorgada por **AIITest**.

Limitaciones de responsabilidad

En ningún caso **AIITest** será responsable de daños indirectos, especiales o consecuentes, incluso aunque **AIITest** haya sido informado de la posibilidad de dichos daños.

Para obtener servicio de garantía, póngase en contacto con el distribuidor local.

B. Tarjeta de garantía

Rellene esta tarjeta de garantía y envíela por correo postal en un plazo no superior a un año desde la compra a su distribuidor local para el registro de la compra.

Comprador	
Modelo	
Número de serie	
Fecha de la compra	
Dirección	
Número de teléfono	
Dirección de correo electrónico	



GIMA

Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.

#550, Yinhai Street,
Hangzhou Economic & Technological Development Area,
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn