



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

GONIOMETRO DIGIT 1 CON DESIGN PER LE DITA DIGIT 1 FINGER DESIGN GONIOMETER GONIOMÈTRE NUMÉRIQUE POUR DOIGT DIGIT 1 GONIÓMETRO DE DEDOS DIGIT 1

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso

Le misure si intendono indicative
The measures are intended as indicative
Les mesures sont destinées à être indicatives
Las medidas tienen carácter indicativo

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

GIMA 24901


Fabbricante, Manufacturer, Fabricante, Fabricante:
JIMCO INDUSTRIES
4-KM Aimen Abad Road Near Akbar Abad Chowk Bhadal,
Sialkot-51310-Punjab - Pakistan - info@jimcoind.com
Made in Pakistan

REF RE-220-10

Importato da / Imported by / Importé par/ Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Incrementi di 5° in pollici e centimetri
5° increments in inches and centimeters
Incréments de 5 degrés en pouces et en centimètres
Intervalos de 5°, en pulgadas y centímetros

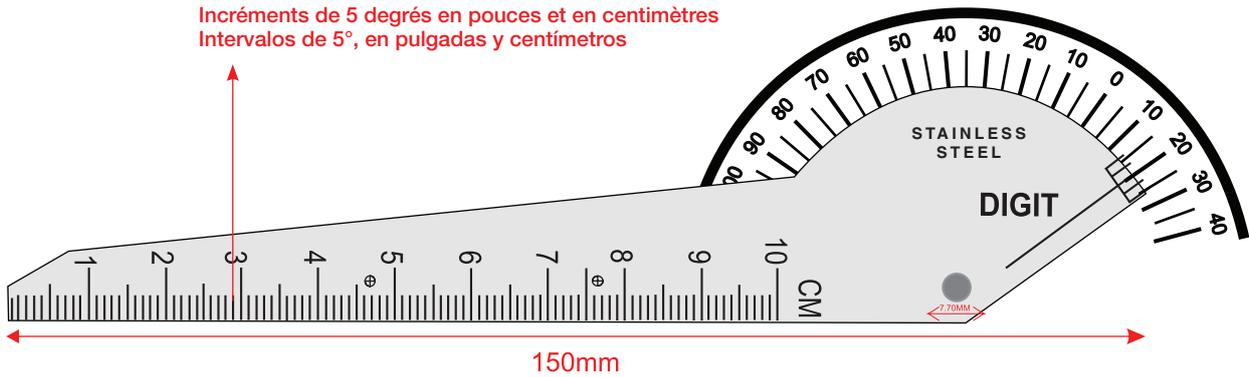

Tipo di acciaio - Steel Type - Type d'acier - Tipo de acero: AISI 430

ES - INSTRUCCIONES DE USO

Un goniómetro de dedos mide el rango de movimiento (ROM) de las articulaciones de los dedos (interfalángicas y metacarpofalángicas) y de otras articulaciones pequeñas, incluyendo los dedos del pie. El diseño exclusivo permite hacer las medidas usando solo una mano; por consiguiente la otra mano queda libre para estabilizar al paciente durante la medición o bien para anotar los resultados de la medición; el goniómetro de dedos estándar requiere el uso de dos manos para realizar una medición del ROM de dedos. El goniómetro de dedos de acero inoxidable estándar 6" cuenta con una cabeza de escalas opuestas de 180° a 30°, divididas en intervalos de 5°. La escala lineal en el brazo mide en pulgadas y centímetros, y cuenta con una escala 10cm / 4".

INDICACIONES DE USO Y PRECAUCIONES

Estos dispositivos están diseñados para uso profesional por operadores cualificados con las habilidades necesarias. El uso del producto implica el contacto directo con la piel del paciente; siempre utilizar guantes de protección, no utilizar en la piel opaca y manejar con cuidado para evitar la abrasión accidental.

Limpiar y esterilizar antes de cada uso; utilizar una solución desinfectante neutral no agresiva (PH7), no utilizar soluciones que contengan iones de cloruro o alto contenido de alcohol.

Este producto está destinado a proporcionar medidas indicativas fáciles de leer.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses