

TRITURADOR DE PÍLDORAS




Pulveriza píldoras de cualquier tamaño

- 1) Colocar la píldora en la cavidad transparente
- 2) Enroscar la parte azul hasta el fondo
- 3) Disolver el medicamento en polvo en la leche, el agua...



ATENCIÓN: No triturar cápsulas de liberación temporizada, en caso de duda consultar al propio farmacéutico

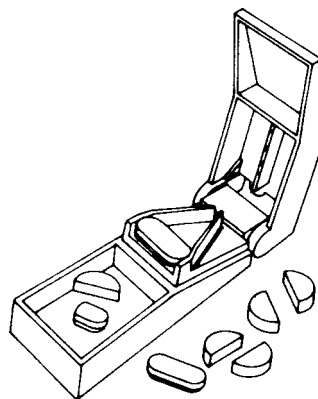

CORTAPÍLDORAS



Corta en dos píldoras de cualquier tamaño

- 1) Posicionarlo en una superficie lla
- 2) Colocar la píldora en la “V” de modo que píldora toque las dos extremidades de la “V”
- 3) Bajar dulcemente la tapa hasta cerrar

cortapíldoras

- 4) Conservar las porciones no utilizadas en sección dispuesta al efecto



ATENCIÓN: hoja cortante, mantener lejos del alcance de los niños



GIMA

TAGLIAPILLOLE - FRANTUMAPILLOLE
PILL SPLITTER - PILL PULVERIZER
COUPE-PILULE - BROYEUR DE PILULES
CORTAPÍLDORAS - TRITURADOR DE PÍLDORAS
CORTA-COMPRIMIDOS - QUEBRA-COMPRIMIDOS
ΚΟΜΜΑΤΙΑΣΤΗΣ ΧΑΠΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΧΑΠΙΩΝ

مكسر لأقراص الدواء - قاطع لأقراص الدواء

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.

الحذر: على العمال قراءة وفهم هذا الدليل بكامله قبل البدء باستعمال المنتج.



M25730-M-Rev.2-03.10

GIMA Spa - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italia

ITALIA: Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403

E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

INTERNATIONAL: Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056

E-mail: export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com