



## Temperature Bracelet Instructions

### 体温スマートウォッチ説明書


Manual de instrucciones de la pulsera de salud y actividad física

## PREPARACIÓN DEL USO

Asegúrese de que la potencia es suficiente antes de encenderlo, debido a que se carga mediante el puerto de contacto USB, por favor, conecte la pulsera en el puerto USB, por ejemplo, cabezal de carga, el puerto USB del portátil para cargarlo.



Primero extraiga la cinta de la pulsera y saque el cuerpo de la pulsera

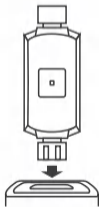


Enchufe el cabezal de carga USB para cargarlo

Por favor saque la pulsera antes del uso primero, cargue el dispositivo con el cargador correspondiente. La pulsera se encenderá automáticamente al cargar.(El método de carga es el siguiente: saque el cuerpo de la pulsera de la cinta, conecte el puerto de carga a un puerto USB estándar para cargarlo.)

## MÉTODO DE LLEVAR

1. Es mejor llevarlo detrás del codo.
2. Ajuste bien el tamaño de la muñeca de acuerdo con el agujero de la cinta, y abroche la hebilla.
3. El sensor debe estar cerca de la piel para evitar el movimiento.

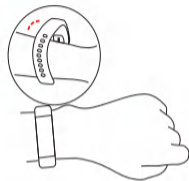

## ENCENDIDO Y APAGADO

1. Cuando la pulsera está apagado, mantenga presionada la tecla de función durante más de 3 segundos puede encender el dispositivo en forma de vibración.
2. Cuando la pulsera está encendido, cambie a la interfaz de apagado, mantenga presionada la tecla de función durante más de 3 segundos puede apagar el dispositivo en forma de vibración.

## DESCARGA DE APP MÓVIL

Escanee los siguientes códigos QR o entra en los principales mercados de aplicaciones móviles para descargar e instalar "DayBand"



Google Play



iOS

El equipo: IOS 8.0 y superiores; Android 4. 4 y superiores

## CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO

Necesita conectar la aplicación para la calibración en el primer uso de la pulsera, después de que la conexión se realice correctamente la pulsera sincroniza automáticamente la hora, de lo contrario, los datos del podómetro y del sueño son

Enciende la APLICACIÓN del móvil  
Haga clic en el icono de configuración




Mi dispositivo(iOS)/ Dispositivo de búsqueda(Android)



Tire hacia abajo del dispositivo de escaneo



Haga clic en la conexión del dispositivo

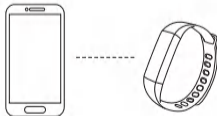

**Conexión Bluetooth :** La aplicación guarda automáticamente la dirección Bluetooth de la pulsera después de que el enlace se realiza correctamente, la aplicación se abre o corriendo en segundo plano, buscará y conectará automáticamente la pulsera.

**Sincronización de datos :** Despliegue manual de datos de sincronización en la página de inicio de la aplicación. la pulsera puede almacenar siete días de datos fuera de línea, cuantos más datos, más larga será la sincronización, hasta unos 2 minutos, después de sincronizar habrá un mensaje de "Sincronización completa"


## FUNCIONES Y AJUSTES DE APP

### Información personal y objetivos de deporte

Por favor configure la información personal después de entrar en la APP

Configuración→Configuración personal  
Puede configurar cabeza - género - edad - altura - peso

La integridad de la información personal puede mejorar la precisión de los datos.  
Establece el objetivo de deporte personal del día, planificación razonable del ejercicio, contribuya a la mejora de la forma física.

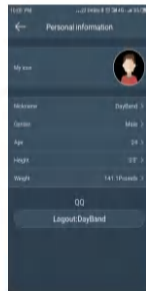

## INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DE PULSERA

### Interfaz principal

Cuando no aparece el icono de conexión, indica que la pulsera no está conectado al teléfono, cuando aparece el icono de conexión, indica que la conexión se realizó correctamente. Cuando la pulsera y la APPILCACIÓN conecta con éxito por primera vez, la pulsera sincroniza la hora, la fecha y la semana del teléfono.

### Interfaz de temperatura corporal

En la interfaz de monitoreo de temperatura corporal, por favor espere decenas de segundos, los datos aparecerán

**póntelo durante al menos 1 minuto cuando toma la temperatura, los datos serán más precisos.**

### Interfaz de datos de movimiento

Mostrar podómetro, la pulsera está en modo de datos de movimiento normal, pon la pulsera en la muñeca, cuando el usuario camina y balancea los brazos, la pulsera se registra como el número de pasos a pie de acuerdo con el número de tiempos de balanceo, calorías quemadas y distancia recorrida.

### Interfaz de frecuencia cardíaca

En la interfaz de monitoreo de frecuencia cardíaca, por favor espere decenas de segundos, los datos aparecerán

### Interfaz de presión arterial

En la interfaz de monitoreo de presión arterial, por favor espere decenas de segundos, los datos aparecerán

### Interfaz de oxígeno en la sangre

En la interfaz de monitoreo de oxígeno en la sangre, por favor espere decenas de segundos, los datos aparecerán

- Durante la prueba, el icono latirá y la luz LED de frecuencia cardíaca en la parte posterior de la pulsera se encenderá.
- Durante la prueba, el sensor debe estar cerca de la piel para evitar que la luz externa afecte a la precisión de la prueba.
- El área de prueba debe mantenerse limpia. El sudor o las manchas pueden afectar los resultados.

### Interfaz de movimiento

En la interfaz de movimiento, presione durante tres segundos para ingresar a la interfaz de movimiento específica, incluye múltiples modos de deporte, haga clic para cambiarlo. Mantenga presionada la interfaz de movimiento durante tres segundos para iniciar el movimiento, mantenga presionado durante tres segundos para pausar y haz clic para cambiar el modo deportivo.

### Interfaz de información

En la interfaz de mensajes, mantenga pulsado durante tres segundos para ver el mensaje, haga clic para ir a la página siguiente, puede salir o pulsar durante tres segundos para salir después de ver la información.

### Interfaz de más funciones

En la interfaz de más funciones, mantenga pulsado durante tres segundos para entrar en la interfaz del submenú, puede realizar operaciones más funcionales.

### Interfaz de buscar teléfono

Cuando esté conectado, haga clic en la opción "Buscar teléfono", el teléfono enviará una vibración o un timbre para recordarle.

### Interfaz de configuración de recuperación

Mantenga pulsado durante tres segundos en la interfaz de configuración de recuperación, la pulsera se restablecerá a la configuración de fábrica.

## Sobre la interfaz

En la interfaz de la pulsera, muestre los últimos cuatro dígitos de la dirección bluetooth y el número de versión del software.

## Interfaz de apagado

En la interfaz de apagado, mantenga pulsado el teléfono durante más de tres segundos para apagarlo en forma de vibración.

## FUNCIÓN DE RECORDATORIO

La función de recordatorio debe establecerse en el centro del terminal APP para encender el interruptor de recordatorio, y mantener el teléfono y la pulsera conectados con éxito en el estado de bluetooth, alerta de vibración cuando llegue un mensaje.



**Recordatorio de llamada** : Cuando llega una llamada, la pulsera vibra y muestra el nombre o el número de la llamada. (Si el nombre de la persona que llama se guarda en la libreta de direcciones del teléfono, se muestra el nombre, de lo contrario se muestra el número)

**Recordatorio SMS** : Cuando recibe un mensaje, la pulsera vibra y muestra recordatorio de icono de SMS : El SMS del contacto de la libreta de direcciones solo muestra el nombre, los mensajes de texto extraños solo muestran el número.

**Despertador inteligente** : Puede configurar tres despertadores, después de configurarlo, el despertador se sincronizará con la pulsera. El reloj despertador inteligente es un reloj despertador silencioso, la pulsera vibra moderadamente cuando suena la campana, soporte recordatorio de alarma fuera de línea.

**Recordatorio sedentario** : El intervalo de recordatorio normal es de una hora. En el estado conectado, si el usuario no hace ejercicio dentro de una hora después de la apertura, la pulsera vibrará para recordar al usuario hacer ejercicio.

## PARÁMETROS DE LA PULSERA

Dimensión de pantalla	0.96pulgadas	Bluetooth	Bluetooth4.0
Tipo de batería	Polimero de litio	Nivel de seguro	Ip67
Tiempo de carga	1.5-2 horas	Capacidad de la batería	90mAh
Tamaño de la cinta	245mm*16mm*11.5mm	Contenido de paquete	Pulsera + Instrucciones

## ADVERTENCIA

- Por favor, evite un fuerte impacto en la pulsera, el calor extremo y la exposición al sol.
- Por favor, no desmonte, repare o cambie la máquina por sí mismo.
- La máquina es adecuada para el entorno de funcionamiento de 0°C a 45°C, está prohibido arrojarlos al fuego por miedo a causar una explosión.
- Cuando la pulsera esté mojado, séquelo con un paño suave antes de cargarlo, de lo contrario, el punto de contacto de carga se corroerá, lo que provocará un fallo de carga.
- Por favor, no póngase en contacto con gasolina, disolventes de limpieza, propanol, alcohol o repelente de insectos y otros productos químicos.
- Por favor, no utilice este producto en ambientes magnéticos de alta tensión y alta tensión.
- Si eres piel sensible o lleva la pulsera demasiado apretado, es posible que se sienta incómodo.
- Por favor, seque el sudor en sus muñecas a tiempo, si la cinta de reloj ha estado expuesta a jabón, sudor, alérgenos o ingredientes contaminados durante mucho tiempo, puede causar irritación de la piel y picazón.
- Si lo lleva regularmente, se recomienda limpiar la pulsera semanalmente. Limpie con un paño húmedo, retire el aceite o el polvo del agua jabonosa suave.
- No es adecuado llevar la pulsera cuando toma un baño caliente.
- Después de nadar, por favor limpie la pulsera a tiempo para mantenerla seca.